

# HearSIM™

使用说明 - ZH



**Copyright © OtoAccess** 保留所有权利。未经 OtoAccess 事先书面许可，不得以任何方式或手段复制或传播本出版物的任何部分。本出版物中的信息归 OtoAccess 所有。

# 目录

|          |                             |          |
|----------|-----------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>简介</b>                   | <b>1</b> |
| 1.1      | 关于本手册                       | 1        |
| 1.1.1    | 支持的设备类型                     | 1        |
| 1.2      | 常规                          | 2        |
| 1.3      | 用途                          | 2        |
| <b>2</b> | <b>HearSIM™的安装</b>          | <b>3</b> |
| 2.1      | 安装前的注意事项                    | 3        |
| 2.1.1    | PC 的最低要求                    | 3        |
| 2.2      | HearSIM™的安装                 | 3        |
| 2.3      | 启动 HearSIM™并登录              | 4        |
| 2.4      | 首次启动时进行数据迁移                 | 4        |
| 2.5      | 设备驱动程序安装                    | 6        |
| <b>3</b> | <b>患者和测试管理</b>              | <b>7</b> |
| 3.1      | 患者列表                        | 7        |
| 3.1.1    | 显示患者                        | 7        |
| 3.1.2    | 列表格式                        | 7        |
| 3.1.2.1  | 性别符号                        | 7        |
| 3.1.2.2  | 最后更新日期                      | 8        |
| 3.1.2.3  | 测试摘要                        | 8        |
| 3.1.3    | 排序列表                        | 8        |
| 3.1.4    | 搜索患者                        | 8        |
| 3.2      | 筛选列表                        | 9        |
| 3.2.1    | 全部                          | 9        |
| 3.2.2    | Ear(s) Did Not Pass (未通过的耳) | 9        |
| 3.2.3    | Ear(s) Not Tested (未测试的耳)   | 10       |
| 3.2.4    | Flagged (已标记)               | 10       |
| 3.2.5    | Just Transferred (刚已传输)     | 10       |
| 3.2.6    | 刚导入的                        | 10       |
| 3.2.7    | 年龄<10 天                     | 10       |
| 3.2.8    | Ear(s) Tested (已测试的耳)       | 10       |
| 3.2.9    | 修改日期范围筛选器                   | 10       |
| 3.3      | 选择患者                        | 12       |
| 3.3.1    | 选择单个患者                      | 12       |
| 3.3.2    | 全选 (显示的患者)                  | 13       |
| 3.3.3    | 取消全选 (显示的患者)                | 13       |
| 3.4      | 打印患者列表                      | 13       |
| 3.4.1    | 打印预览                        | 14       |

|          |                            |    |
|----------|----------------------------|----|
| 3.5      | 打印患者测试报告 .....             | 14 |
| 3.5.1    | 测试报告打印预览 .....             | 15 |
| 3.6      | 标记患者 .....                 | 15 |
| 3.6.1    | 标记单个患者 .....               | 15 |
| 3.6.2    | 标记列表中的多名或全部所示患者 .....      | 15 |
| 3.6.3    | 取消标记所选定的患者 .....           | 16 |
| 3.6.4    | 已标记患者的筛选列表 .....           | 16 |
| 3.7      | 将患者传输到设备 .....             | 16 |
| 3.7.1    | 设备状态和传输控制 .....            | 17 |
| 3.7.2    | 传输患者 .....                 | 18 |
| 3.8      | 添加新患者 .....                | 18 |
| 3.8.1    | 患者 ID .....                | 19 |
| 3.8.1.1  | 患者 ID 冲突 .....             | 19 |
| 3.8.2    | 姓 & 名 .....                | 19 |
| 3.8.3    | 出生日期 .....                 | 19 |
| 3.8.4    | 生理性别 .....                 | 19 |
| 3.8.5    | 同意筛查 .....                 | 20 |
| 3.8.6    | 同意跟踪 .....                 | 20 |
| 3.8.7    | 民族 .....                   | 20 |
| 3.8.8    | 跟踪 ID .....                | 20 |
| 3.8.8.1  | 跟踪 ID 和 HiTrack 导出文件 ..... | 20 |
| 3.8.9    | 标记 .....                   | 20 |
| 3.8.10   | 保存 .....                   | 20 |
| 3.8.11   | 保存并编辑 .....                | 21 |
| 3.8.12   | 关闭 .....                   | 21 |
| 3.9      | 患者的详细信息 .....              | 21 |
| 3.9.1    | 基本信息 .....                 | 21 |
| 3.9.2    | 详细信息 .....                 | 22 |
| 3.9.3    | 风险因素 .....                 | 22 |
| 3.10     | 联系信息 .....                 | 22 |
| 3.10.1   | 母亲的信息 .....                | 22 |
| 3.10.2   | 备用联系人信息 .....              | 23 |
| 3.11     | 编辑患者和联系信息 .....            | 23 |
| 3.11.1   | 编辑基本信息字段 .....             | 23 |
| 3.11.2   | 编辑详细信息字段 .....             | 23 |
| 3.11.2.1 | 出生顺序 .....                 | 24 |
| 3.11.2.2 | 出生体重 [g] .....             | 24 |
| 3.11.2.3 | 胎龄 [wks] .....             | 24 |

|           |                    |    |
|-----------|--------------------|----|
| 3.11.2.4  | 出生时间 [hh: mm]..... | 24 |
| 3.11.2.5  | 预计出生日期.....        | 24 |
| 3.11.2.6  | 种族 .....           | 24 |
| 3.11.2.7  | 出生机构.....          | 24 |
| 3.11.2.8  | 托儿所类型 .....        | 25 |
| 3.11.2.9  | 保险 .....           | 25 |
| 3.11.2.10 | 医生 .....           | 25 |
| 3.11.2.11 | 区域唯一 ID .....      | 25 |
| 3.11.2.12 | 跟踪变量 1.....        | 25 |
| 3.11.2.13 | 未筛查原因.....         | 25 |
| 3.11.2.14 | 注意 .....           | 25 |
| 3.11.3    | 编辑风险因素 .....       | 25 |
| 3.11.3.1  | 风险因素控制.....        | 26 |
| 3.11.4    | 编辑母亲的信息 .....      | 26 |
| 3.11.4.1  | 母亲的身份证号 .....      | 26 |
| 3.11.4.2  | 母亲的姓氏、名字和曾用名 ..... | 26 |
| 3.11.4.3  | 母亲的出生日期 .....      | 26 |
| 3.11.4.4  | 母亲的住址 .....        | 27 |
| 3.11.4.5  | 母亲的电话号码 .....      | 27 |
| 3.11.4.6  | 母亲的电子邮件地址 .....    | 27 |
| 3.11.4.7  | 母亲的语言、教育程度 .....   | 27 |
| 3.11.4.8  | 母亲的 WIC 参与情况 ..... | 27 |
| 3.11.4.9  | 需要 ADA 交流.....     | 27 |
| 3.11.4.10 | 视觉口语 .....         | 27 |
| 3.11.5    | 编辑备用联系人的信息.....    | 27 |
| 3.11.5.1  | 姓氏、名字 .....        | 27 |
| 3.11.5.2  | 地址 .....           | 27 |
| 3.11.5.3  | 电话号码.....          | 27 |
| 3.11.5.4  | 语言 .....           | 27 |
| 3.11.5.5  | 与患者（孩子）的关系 .....   | 28 |
| 3.11.6    | 保存或取消更改 .....      | 28 |
| 3.11.6.1  | 保存更改.....          | 28 |
| 3.11.6.2  | 取消 .....           | 28 |
| 3.12      | 删除患者 .....         | 28 |
| 3.12.1    | 删除确认 .....         | 28 |

|          |                          |           |
|----------|--------------------------|-----------|
| 3.13     | 测试结果列表 .....             | 29        |
| 3.14     | 测试细节显示 .....             | 30        |
| 3.14.1   | 图表显示 .....               | 30        |
| 3.14.2   | 测量信息 .....               | 30        |
| 3.14.3   | 设备信息 .....               | 30        |
| 3.14.4   | 协议信息 .....               | 30        |
| 3.15     | 编辑测试字段 .....             | 31        |
| 3.15.1   | 编辑测试信息窗口 .....           | 31        |
| 3.15.1.1 | 不可编辑的字段 .....            | 31        |
| 3.15.1.2 | 停止原因 .....               | 31        |
| 3.15.1.3 | 耳侧 .....                 | 31        |
| 3.15.1.4 | 筛查者 .....                | 32        |
| 3.15.1.5 | 设施 .....                 | 32        |
| 3.15.1.6 | 就诊状态 .....               | 32        |
| 3.15.1.7 | 筛查阶段 .....               | 32        |
| 3.15.1.8 | 测试注释 .....               | 32        |
| 3.15.2   | 保存或取消更改 .....            | 32        |
| 3.15.2.1 | 保存更改 .....               | 32        |
| 3.15.2.2 | 取消 .....                 | 32        |
| 3.16     | 打印患者报告 .....             | 32        |
| 3.16.1   | 打印默认 .....               | 32        |
| 3.16.2   | 选择测试 .....               | 33        |
| 3.16.3   | 执行报告打印 .....             | 34        |
| 3.16.4   | 打印预览 .....               | 34        |
| 3.16.5   | 报告格式 .....               | 35        |
| 3.17     | 将数据从设备传输到 HearSIM™ ..... | 35        |
| 3.17.1   | 设备数据导入 .....             | 35        |
| 3.17.1.1 | 筛查与诊断设备型号 .....          | 36        |
| 3.17.2   | 合并冲突解决 .....             | 36        |
| 3.17.2.1 | 更改患者 ID .....            | 37        |
| 3.17.3   | 导入未分配的测试 .....           | 38        |
| <b>4</b> | <b>未分配的测试 .....</b>      | <b>39</b> |
| 4.1      | 为新患者分配测试 .....           | 40        |
| 4.2      | 将测试分配给当前患者 .....         | 41        |
| 4.3      | 删除未分配的测试 .....           | 42        |
| <b>5</b> | <b>导入患者 .....</b>        | <b>43</b> |
| 5.1      | 导入字段 .....               | 43        |

|          |              |           |
|----------|--------------|-----------|
| 5.2      | 导入文件的格式      | 43        |
| 5.2.1    | HiTrack 文件格式 | 43        |
| 5.2.2    | HearSIM XML  | 43        |
| 5.3      | 设置           | 44        |
| 5.4      | 执行导入         | 44        |
| <b>6</b> | <b>导出测试</b>  | <b>45</b> |
| 6.1      | 自动导出         | 45        |
| 6.2      | 手动导出         | 45        |
| 6.2.1    | 导出测试对话框      | 45        |
| 6.2.1.1  | 日期范围         | 45        |
| 6.2.1.2  | 排除不完整的结果     | 46        |
| 6.2.1.3  | 排除已导出的结果     | 46        |
| 6.2.1.4  | 搜索           | 46        |
| 6.2.1.5  | 导出测试列表       | 46        |
| 6.2.1.6  | 导出测试列表的排序方法  | 46        |
| 6.2.2    | 导出           | 46        |
| <b>7</b> | <b>配置</b>    | <b>47</b> |
| 7.1      | 筛查者          | 47        |
| 7.1.1    | 添加筛查者        | 47        |
| 7.1.2    | 删除筛查者        | 48        |
| 7.1.3    | 编辑密码         | 48        |
| 7.2      | 机构           | 48        |
| 7.2.1    | 添加机构         | 48        |
| 7.2.2    | 删除机构         | 48        |
| 7.3      | 风险因素         | 48        |
| 7.3.1    | 添加风险因素       | 49        |
| 7.3.2    | 删除风险因素       | 49        |
| 7.3.3    | 恢复制造商默认设置    | 49        |
| <b>8</b> | <b>设备</b>    | <b>50</b> |
| 8.1      | 筛查者          | 50        |
| 8.1.1    | 启用或禁用设备传输    | 50        |
| 8.1.2    | 顺序           | 50        |
| 8.2      | 机构           | 51        |
| 8.3      | 风险因素         | 51        |
| 8.4      | 民族           | 51        |
| 8.5      | 选项           | 51        |
| 8.5.1    | 筛查员登录        | 52        |
| 8.5.2    | 快速测试         | 52        |

|          |                          |           |
|----------|--------------------------|-----------|
| 8.5.3    | 测试字段 .....               | 52        |
| 8.5.4    | 停止原因 .....               | 52        |
| 8.5.5    | 自动 ID .....              | 52        |
| 8.5.6    | 打印 .....                 | 53        |
| 8.5.7    | 注释 .....                 | 53        |
| 8.5.8    | 筛查阶段 .....               | 53        |
| 8.5.9    | 民族 .....                 | 53        |
| 8.6      | 患者字段 .....               | 53        |
| 8.7      | 协议 .....                 | 53        |
| 8.7.1    | 将协议添加到列表中 .....          | 53        |
| 8.7.2    | 测试类型和名称 .....            | 54        |
| 8.7.3    | 启用或禁用设备传输 .....          | 55        |
| 8.7.4    | 顺序 .....                 | 55        |
| 8.7.5    | 从列表中删除协议 .....           | 56        |
| 8.7.6    | 自定义协议 .....              | 56        |
| 8.8      | 将自定义设置传送到设备 .....        | 56        |
| 8.8.1    | 不兼容的设备设置 .....           | 57        |
| <b>9</b> | <b>管理 .....</b>          | <b>58</b> |
| 9.1      | 导出 .....                 | 58        |
| 9.1.1    | 导出设置/配置 .....            | 58        |
| 9.1.2    | 自动跟踪导出 .....             | 59        |
| 9.1.2.1  | 自动跟踪导出 - 开/关设置 .....     | 59        |
| 9.1.2.2  | 文件格式 .....               | 59        |
| 9.1.2.3  | 目标文件 .....               | 59        |
| 9.1.2.4  | 排除不完整的结果 .....           | 59        |
| 9.1.2.5  | 加密（解密）导出文件 .....         | 59        |
| 9.1.3    | 同意跟踪 .....               | 60        |
| 9.1.4    | 跟踪导出上传 .....             | 60        |
| 9.1.4.1  | 自动上传自动跟踪导出文件 .....       | 61        |
| 9.1.4.2  | 允许上传手动跟踪导出文件 .....       | 61        |
| 9.1.4.3  | 上传匿名的导出文件 .....          | 61        |
| 9.2      | 打印设置 .....               | 62        |
| 9.2.1    | 文本 .....                 | 62        |
| 9.2.2    | 商标 .....                 | 62        |
| 9.2.2.1  | 删除徽标 .....               | 62        |
| 9.2.3    | 报告格式 .....               | 62        |
| 9.2.4    | OtoAccess® 预览/报告创建 ..... | 63        |
| 9.3      | 导入 .....                 | 63        |

|           |                                  |           |
|-----------|----------------------------------|-----------|
| 9.3.1     | 导入设置/配置 .....                    | 63        |
| 9.3.2     | 导入 HiTrack 选取列表 .....            | 64        |
| 9.4       | 患者的详细信息 .....                    | 64        |
| 9.4.1     | 默认值字段 .....                      | 65        |
| 9.5       | 审核记录 .....                       | 65        |
| 9.5.1     | 搜索参数 .....                       | 66        |
| 9.5.1.1   | 患者 ID .....                      | 66        |
| 9.5.1.2   | 测试 ID .....                      | 66        |
| 9.5.1.3   | 日期范围 .....                       | 66        |
| 9.5.1.4   | 包括患者更改 .....                     | 66        |
| 9.5.1.5   | 包括测试更改 .....                     | 67        |
| 9.5.1.6   | 导出审核日志 .....                     | 67        |
| 9.6       | 关于 .....                         | 67        |
| 9.6.1     | 允许统计使用情况 .....                   | 67        |
| 9.6.2     | 上传 .....                         | 67        |
| <b>10</b> | <b>OtoAccess®功能 .....</b>        | <b>68</b> |
| 10.1      | OtoAccess®Database 数据库 .....     | 68        |
| 10.2      | OtoAccess®Database 数据库管理工具 ..... | 68        |
| 10.2.1    | 用户帐户 .....                       | 69        |
| <b>11</b> | <b>故障排除和反馈分享 .....</b>           | <b>70</b> |
| 11.1      | 系统崩溃 .....                       | 70        |
| 11.2      | 分享反馈 .....                       | 71        |
| <b>12</b> | <b>所有权、担保和免责声明 .....</b>         | <b>73</b> |
| 12.1      | 所有权 .....                        | 73        |
| 12.2      | 版权 .....                         | 73        |
| 12.3      | 限制 .....                         | 73        |
| 12.4      | 保修期限 .....                       | 73        |
| 12.5      | 免责声明 .....                       | 74        |
| 12.6      | 一般条款和条件 .....                    | 74        |

# 1 简介

## 1.1 关于本手册

本手册适用于 HearSIM™ 3.3 版。本产品制造商：  
OtoAccess A/s  
Audiometer Allé 1  
5500 Middelfart  
Denmark

本手册介绍了 HearSIM™的功能。 建议用户在使用本软件之前仔细阅读本手册。

HearSIM™3.0 及以上版本需要预先安装支持 HearSIM 的 OtoAccess®Database 数据库软件（2.0 版或更高版本）™。 如果未安装 OtoAccess®Database 数据库，HearSIM™应用程序将不能发挥作用。 在本手册中，通常将软件称为 HearSIM™，但用户应了解，OtoAccess®Database 数据库是支持 HearSIM™发挥作用必不可少的应用程序。

OtoAccess®Database 数据库有其自己的用户手册。 本 HearSIM™手册可能会要求您参考 OtoAccess®Database 手册，了解仅 OtoAccess®Database 数据库应用程序中某些可用功能和设置的说明。 本 HearSIM™手册仅介绍了 HearSIM 的可用功能™。

可选择的菜单、图标和功能将以**粗体**显示。

### 1.1.1 支持的设备类型

HearSIM™ 3.0 及以上版本在产品系列中支持两种设备类型。在大多数情况下，本手册中介绍的 HearSIM™功能均与两种设备相关。 但是，有些功能特定于其中一种设备，另一种设备可能不支持。 在此种情况下，手册将提供所支持设备类型的图形，如下所示：

|                                                                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | 该图形将用于表示 <b>HearSIM™</b> 功能仅适用于该触摸屏设备，该型号具有同时支持 AABR 和 OAE 技术的“主页”按钮。             |
|  | 该图形表示 <b>HearSIM™</b> 功能仅适用于此设备类型，该设备仅是一个 OAE 仪器（筛查器设备），带有小 LCD 屏幕和几个用于操作菜单的功能按钮。 |

## 1.2 常规

感谢您购买由 HearSIM™ 筛查信息管理软件支持的系统。您的设备完全可以在未使用 HearSIM™ 的条件下用于听力筛查。

结合 OtoAccess® Database 数据库使用的 HearSIM™ 是一个配套的软件工具，可使您：

- 存储、查看和管理患者信息
- 存储、查看和管理从受支持设备传输过来的测试数据
- 将需测试患者的姓名传输到受支持的设备
- 在标准 PC 兼容打印机上打印测试结果
- 导出患者和测试数据（支持 HiTrack、OZ eSP™、XML 和 CSV 格式）
- 根据您的喜好自定义设备的设置
- 管理设备用户
- 管理设备的自定义列表（例如筛查机构名称、风险因素等）
- 管理用户帐户
- 备份并恢复患者数据库和自定义列表
- 从其他第三方数据库导入患者列表
- 导入和导出 HearSIM 的设置，以便在多台电脑之间共享
- 设置显示患者字段和必填字段状态的用户首选项
- 审核对患者信息和测试详细信息所做的更改

## 1.3 用途

该软件旨用作兼容听力筛查设备的附件，用以自定义设备设置和管理筛查数据。请与您当地的代表联系，获取与 HearSIM 兼容的设备清单。

## 2 HearSIM™的安装

### 2.1 安装前的注意事项

#### 2.1.1 PC 的最低要求

- 安装有 OtoAccess®2.0 版或更高版本
- .NET framework 4.6.2

有关该软件安装和最低 PC 硬件要求的详细信息，请参阅《OtoAccess®Database 数据库使用说明》。

### 2.2 HearSIM™的安装

**注意：**在安装软件时，请确保设备未连接到您的计算机。

关闭所有已打开或正在运行的程序。


HearSIM™存储在 USB 驱动器中，以便安装。 该软件必须由 Windows 管理员安装。

将 USB 驱动器插入 PC。 查找“HearSIM Setup.exe”文件并运行。


同意许可条款并**安装**



正在设置

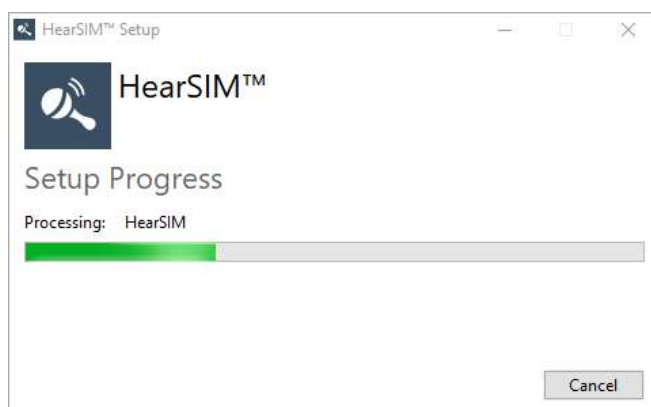

安装完成。 关闭。

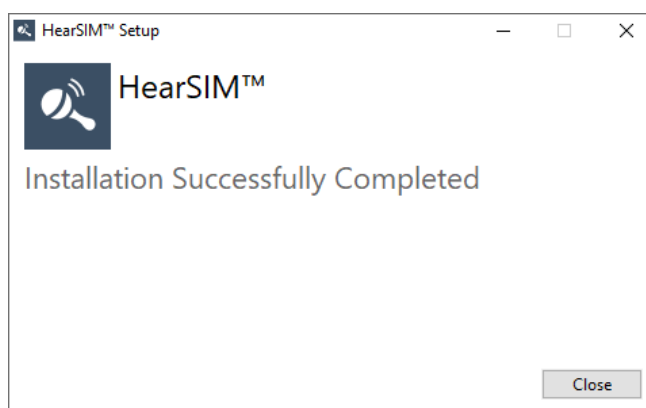

## 2.3 启动 HearSIM™并登录

每次启动 HearSIM™时，均需要使用在 OtoAccess®Database 数据库管理工具中创建的用户帐户进行登录。请参阅《OtoAccess®Database 使用说明》设置和管理用户帐户。

A screenshot of the HearSIM™ LOGIN dialog box. It has a dark blue header with the word 'LOGON' in white. Below the header is a white area with a dark blue user icon. There are two input fields: 'Username' and 'Password'. Below the 'Password' field is a checkbox labeled 'Remember credentials'. At the bottom, there are two buttons: 'Ok' and 'Cancel'.

默认用户名和密码为： 用户名：admin；密码：password。

强烈建议尽快在 OtoAccess®Database 数据库管理程序中更改默认用户名和密码。 虽然无法删除该用户，但是可以更改用户名和密码。 请参阅《OtoAccess 使用说明》设置用户帐户。

## 2.4 首次启动时进行数据迁移

如果您的 PC 安装有旧版 HearSIM™（2.1 或更早版本），则首次启动 HearSIM 3.2 时，系统会询问您是否迁移现有 HearSIM™数据库，使其与 OtoAccess®兼容。

### 迁移后可方便查询

如果想将当前 HearSIM™数据库转换成与 OtoAccess®Database 兼容的格式，请选择 **Migrate**（迁移）。




如果不想转换当前数据库，请选择 **NO**（否）。

通过选中/取消选中相应的复选框，选择将 HearSIM™ 中的哪些数据转换并传输到 OtoAccess® 中。

通过选中/取消选中“成功迁移后删除源文件”复选框，选择完成迁移后从原始 HearSIM™文件夹中删除源文件的首选项。


根据您的首选项设置复选框后，请选择 **Transfer**（传输）。

正在迁移

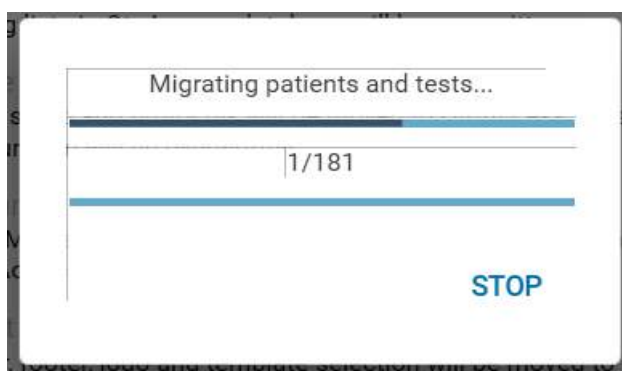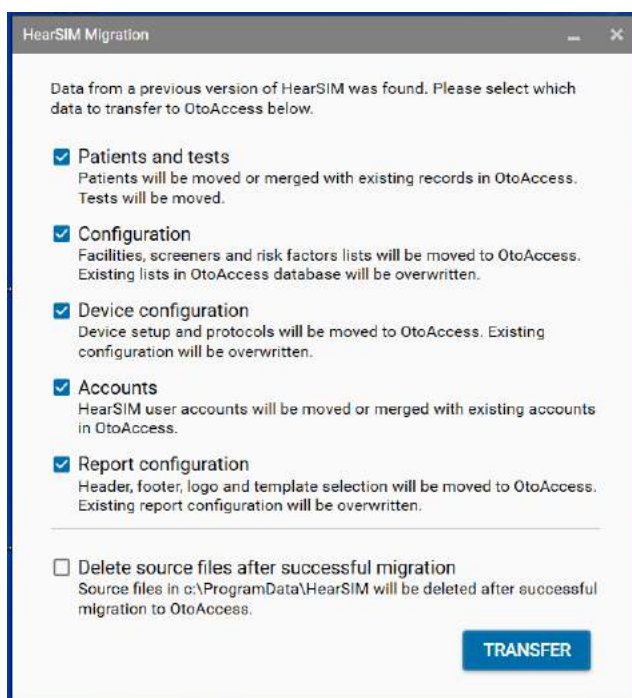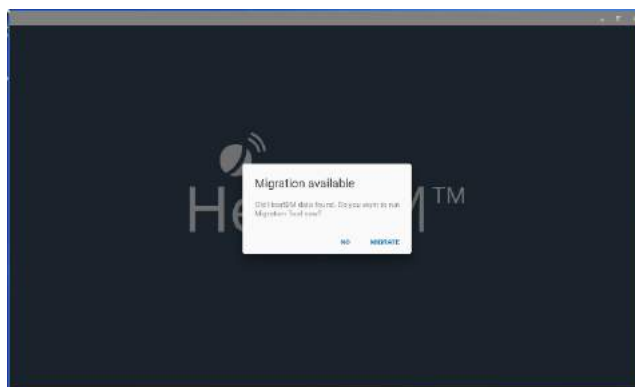

迁移成功

选择 **EXIT**（退出）

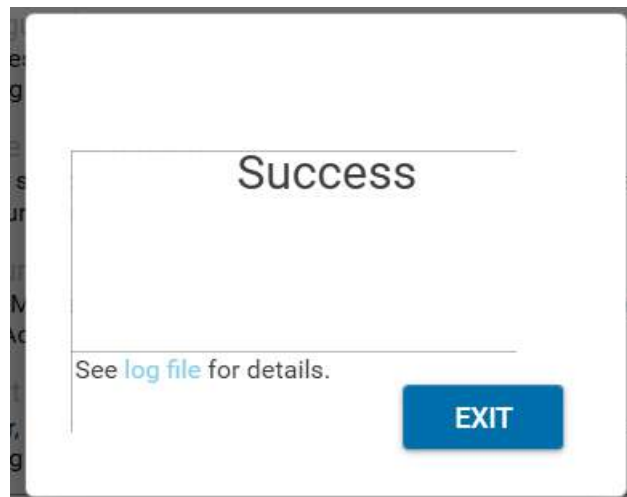


## 2.5 设备驱动程序安装

安装 Otoaccess@Database 和 HearSIM™，以及启动 HearSIM™后，首次连接兼容设备时，将自动安装设备驱动程序。

## 3 患者和测试管理

### 3.1 患者列表

启动 HearSIM™ 软件，您将看到 Patient list（患者列表）的视图。

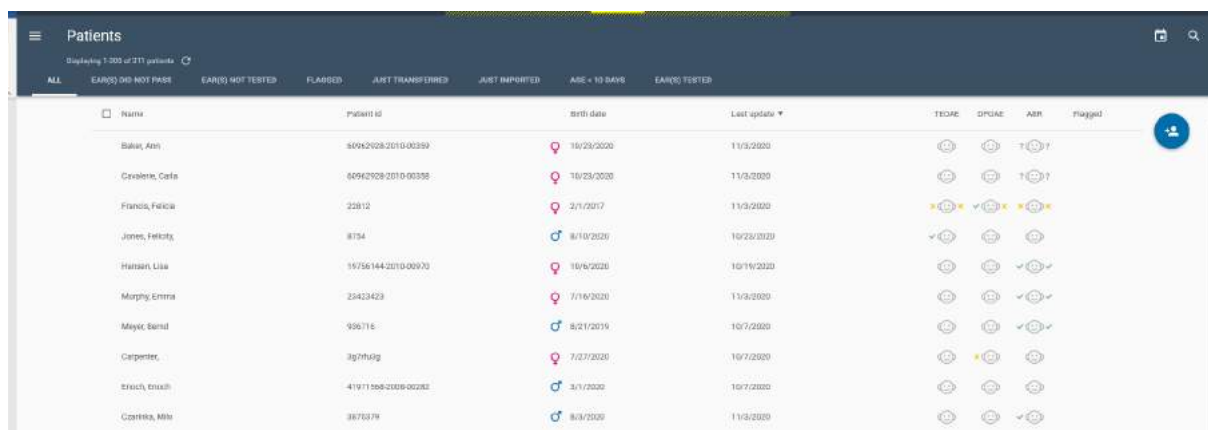

| Name             | Patient ID           | Birth date | Last update | TEOAE | DPOAE | ABR | Flagged |
|------------------|----------------------|------------|-------------|-------|-------|-----|---------|
| Baker, Ann       | 60942928-2010-00392  | 10/23/2020 | 11/3/2020   | 🔊     | 🔊     | 🔊   | ?       |
| Cevalero, Carla  | 60942928-2010-00398  | 10/23/2020 | 11/3/2020   | 🔊     | 🔊     | 🔊   | ?       |
| Francis, Felicia | 22812                | 3/1/2017   | 11/3/2020   | 🔊     | 🔊     | 🔊   | ?       |
| Jones, Felicity  | 8754                 | 8/10/2020  | 10/23/2020  | 🔊     | 🔊     | 🔊   | ?       |
| Hansen, Lisa     | 15756144-2010-00070  | 10/16/2020 | 10/16/2020  | 🔊     | 🔊     | 🔊   | ?       |
| Murphy, Emma     | 28423429             | 7/16/2020  | 11/3/2020   | 🔊     | 🔊     | 🔊   | ?       |
| Meyer, Sami      | 996716               | 8/21/2019  | 10/7/2020   | 🔊     | 🔊     | 🔊   | ?       |
| Carpenter, .     | 3g7h9g               | 7/27/2020  | 10/7/2020   | 🔊     | 🔊     | 🔊   | ?       |
| Krich, Kriash    | 419711508-2009-00282 | 3/1/2020   | 10/7/2020   | 🔊     | 🔊     | 🔊   | ?       |
| Cornelia, Milo   | 3875379              | 8/9/2020   | 11/3/2020   | 🔊     | 🔊     | 🔊   | ?       |

#### 3.1.1 显示患者

为了节省数据在屏幕上显示的时间，默认情况下将显示 100 位最新患者。这由患者列表左上角显示的信息指示，如下所示。



| Name           | Patient ID | Birth date | Last update | TEOAE | DPOAE | ABR | Flagged |
|----------------|------------|------------|-------------|-------|-------|-----|---------|
| Cornelia, Milo | 3875379    | 8/9/2020   | 11/3/2020   | 🔊     | 🔊     | 🔊   | ?       |

向下滚动到列表的底部时，将在显示列表中添加更多患者，有关所显示患者人数的信息将自动更新。

#### 3.1.2 列表格式

列表中的每一行代表一名患者。列标题描述了列中的数据。

- 姓名 - 姓、名
- 患者 ID
- 性别（符号）
- 出生日期
- 最后更新日期
- 测试摘要 - TEOAE / DPOAE / ABR
- 已标记状态

##### 3.1.2.1 性别符号



无符号表示性别不详。


### 3.1.2.2 最后更新日期

患者列表中的最后更新列显示了患者记录最后一次被修改的日期。对于在 HearSIM™ 中新添加的患者，最后更新日期为创建日期。否则，最后更新日期将反映最后一次执行以下操作的日期：

- 添加或编辑任何患者字段的编辑日期；或
- 数据（患者或测试信息）最后一次从设备传输到 HearSIM™ 的数据传输日期

### 3.1.2.3 测试摘要

患者列表中的三列提供了每种测试类型的最后一次患者测试的摘要信息。符号和位置表示：

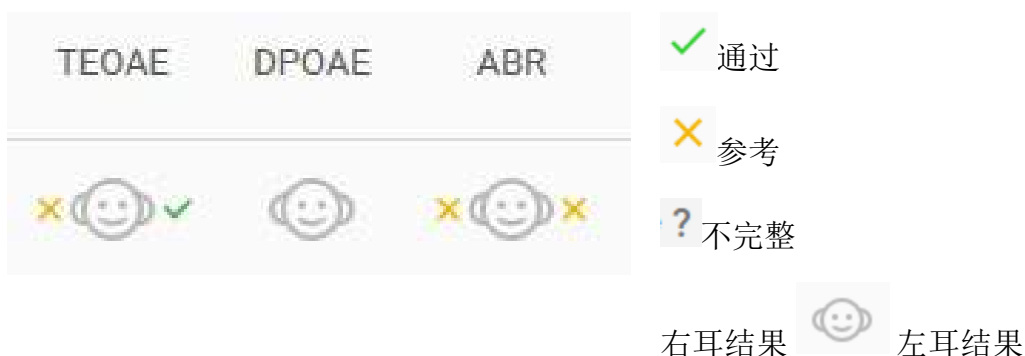


### 3.1.3 排序列表

患者列表可通过选择不同的列标题按名称、患者 ID、出生日期或最后更新日期进行排序。默认以最后更新日期进行排序。



在激活的排序列旁将显示一个箭头符号。

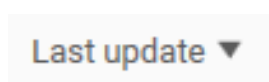

单击列标题可激活列表按所选标准进行排序。再次单击，将对所有列表进行反向排序。


### 3.1.4 搜索患者

单击右上角的 **Search**（搜索）图标  可打开搜索字段。






可以根据患者 ID、姓或名进行搜索。当您在搜索字段中键入字符时，患者列表的范围将随之缩小，仅显示与搜索字符相匹配的患者。患者记录中的匹配字符将以红色字体显示，如下所示。

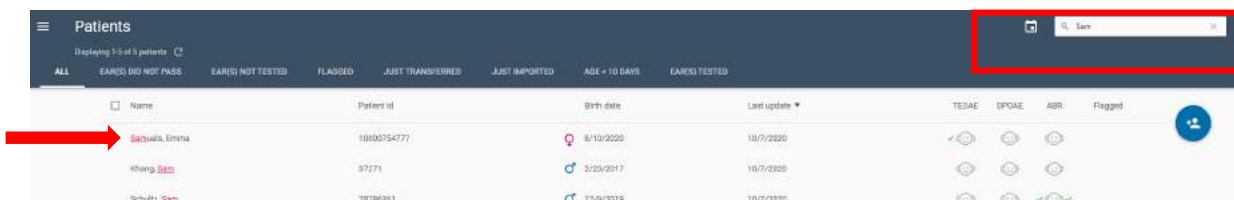

通过单击字段右侧的 X 以清除搜索字段，并返回到完整的患者列表。

## 3.2 筛选列表

启动 HearSIM 时的默认患者列表将显示™完整（ALL）（全部）数据库中 100 名最近更新的患者。

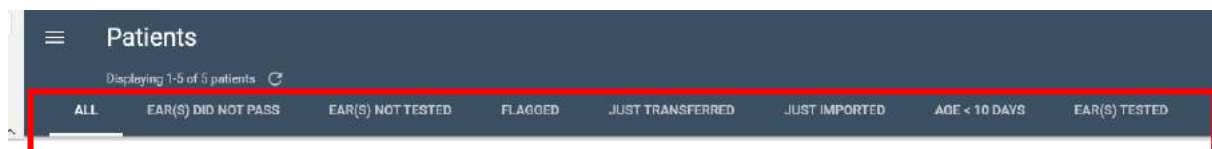

预定义的选项可用于筛选患者数据库以仅显示满足筛选条件的患者子集。 可选择的已筛选列表为：

- **All (default)**（全部（默认））
- **Ear(s) Did Not Pass**（未通过的耳）
- **Ear(s) Not Tested**（未测试的耳）
- **Flagged**（已标记）
- **Just Transferred**（刚已传输）
- **刚导入的**
- **年龄<10 天**
- **Ear(s) Tested**（已测试的耳）

### 3.2.1 全部

选择此选项可从一个已筛选列表返回到完整的患者列表视图。

使用搜索功能  和修改日期范围筛选器  将影响所有患者的列表。 使用其中任一个功能，都将根据您的搜索或筛选条件缩小完整患者列表的范围。

要返回到所有患者的完整列表，请关闭这些工具。

### 3.2.2 Ear(s) Did Not Pass（未通过的耳）

此列表中显示的患者符合以下标准：

- 至少保存有一个测试记录
- 最后一次单耳或双耳测试未通过任何测试类型的测试

这些是可能需要重新筛查或随访的患者。

注意：这并不是所有患者的综合列表，其中的患者基于您的筛查项目协议可能需要随访。 它只是一个工具，您可以用它来确定在上次筛查中双耳未通过至少一种测试类型测试的患者。

### 3.2.3 Ear(s) Not Tested（未测试的耳）

此列表中显示的患者符合此标准：

- 在至少一种测量类型（TE、DP、ABR）中没有单耳或双耳的测试记录

这些是在数据管理器中的患者，需对他们的至少一只耳朵进行首次筛查。

### 3.2.4 Flagged（已标记）

此列表中显示的患者符合此标准：

- 已被用户标记。

### 3.2.5 Just Transferred（刚已传输）

此列表中显示的患者符合此标准：

- 上次连接设备并进行数据导入时从设备转入。

下次从设备导入数据时，“刚已传输”列表中的名称将被覆盖。

“刚已传输”列表中的名称在应用程序关闭时将被清除。

### 3.2.6 刚导入的

选择此选项将仅显示通过 HearSIM™ 导入患者功能导入的患者列表，该功能使用从第三方数据库导出的文件，并将患者信息放入 HearSIM™ 和 OtoAccess® 数据库中。此列表将一直保留，直到导入新的文件，这时列表将被新患者覆盖，或者一直保留到 HearSIM 应用程序关闭，这时列表将被清除。

### 3.2.7 年龄<10 天

此列表中显示的患者符合此标准：

- 根据输入的出生日期，婴儿还不足 10 天

您可以在此过滤列表中查看最有可能最近接受筛查的婴儿子集。


### 3.2.8 Ear(s) Tested（已测试的耳）

此列表中显示的患者符合此标准：

- 数据库中至少保存了 1 个使用 HearSIM 应用程序传输的测试。

### 3.2.9 修改日期范围筛选器


点击右上角的 **Calendar**（日历）图标  可打开控件以设置最后更新日期范围筛选器。在 **From**（从）和 **To**（到）字段中输入日期将缩小患者列表的范围，它仅包括在指定范围内创建或最后一次修改其记录的患者。

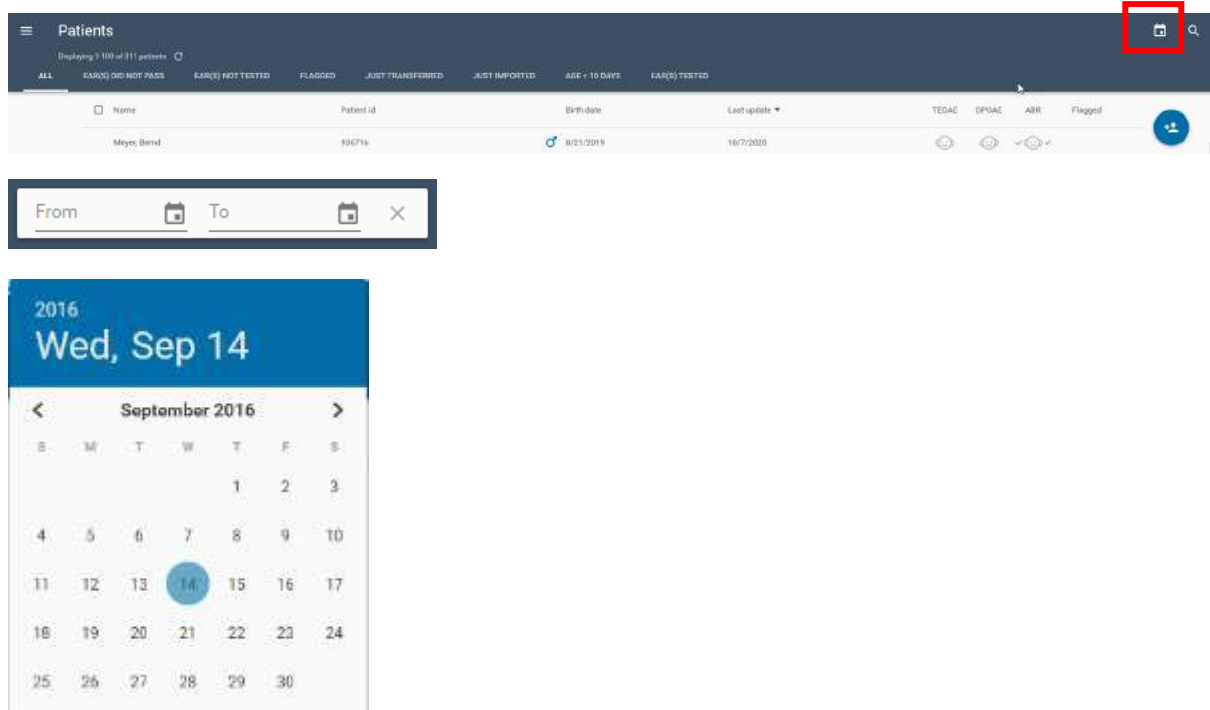

通过在每个字段中键入日期或在弹出日历上选择日期来设置 **From**（从）和 **To**（到）日期，其中的弹出日历可以通过单击字段中的日历控件打开。已圈出今天的日期以供您参考。


日历页面中的控件（< 和 >）让您能够更改月份。

单击日历页面顶部区域可更改页面视图以选择月份。 再次单击可切换为年份视图。

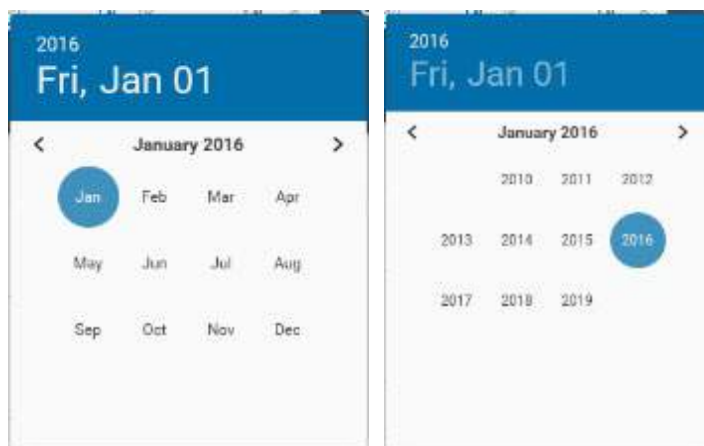

通过选择日期或单击日历区域之外来关闭日历。

单击字段右侧的 **X**、关闭字段、取消筛选并返回到患者的完整列表。

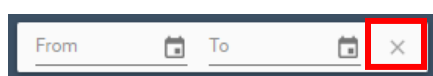

### 3.3 选择患者

选择列表中的患者，以便在执行以下操作时包含有此患者的记录：

- 打印患者列表
- 为选定的患者打印测试报告
- 标记一组患者
- 将患者的信息传输到听力筛查设备

#### 3.3.1 选择单个患者


当您鼠标悬停在患者行上时，**Select**（选择）框将出现在患者记录的左侧。



| Name            | Patient ID  | Birth date | Last update | TEDAE | DPDAE | ABR | Flagged |
|-----------------|-------------|------------|-------------|-------|-------|-----|---------|
| Paulson, Paul   | 99058483821 | 8/22/2019  | 11/3/2020   |       |       |     |         |
| Carpenter, Tina | 997943g     | 7/27/2020  | 11/3/2020   |       |       |     |         |
| Czerkins, Milo  | 9875379     | 8/3/2020   | 11/3/2020   |       |       |     |         |

单击此患者 **Selects**（选择）框后，当您鼠标从患者行上移开时，该选择框保持可见。


可以通过单击每一患者行中的 **Select**（选择）框来选择多名患者。

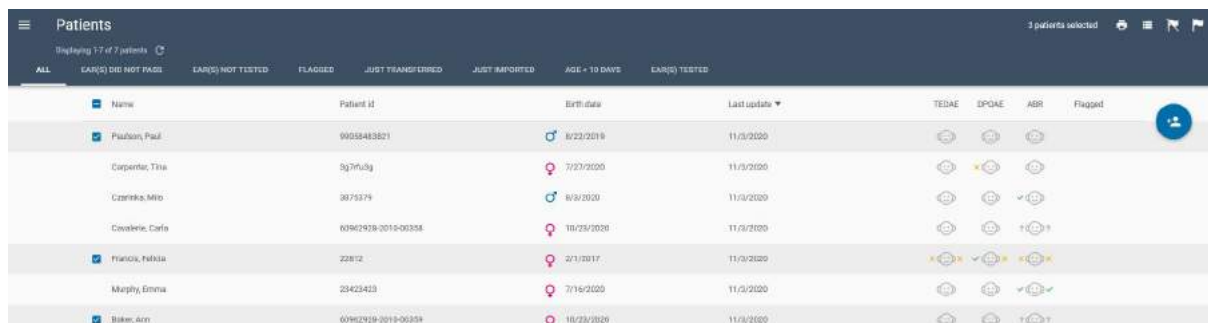

| Name              | Patient ID          | Birth date | Last update | TEDAE | DPDAE | ABR | Flagged |
|-------------------|---------------------|------------|-------------|-------|-------|-----|---------|
| Paulson, Paul     | 99058483821         | 8/22/2019  | 11/3/2020   |       |       |     |         |
| Carpenter, Tina   | 997943g             | 7/27/2020  | 11/3/2020   |       |       |     |         |
| Czerkins, Milo    | 9875379             | 8/3/2020   | 11/3/2020   |       |       |     |         |
| Czevalerie, Carla | 60962928-2019-00358 | 10/25/2020 | 11/3/2020   |       |       |     |         |
| Francis, Melissa  | 22812               | 2/1/2017   | 11/3/2020   |       |       |     |         |
| Murphy, Emma      | 23423423            | 7/19/2020  | 11/3/2020   |       |       |     |         |
| Baker, Ann        | 60962928-2019-00358 | 10/23/2020 | 11/3/2020   |       |       |     |         |

### 3.3.2 全选（显示的患者）

可以通过单击列标题中的 **Select All**（全选）框来选择列表中所显示的所有患者。

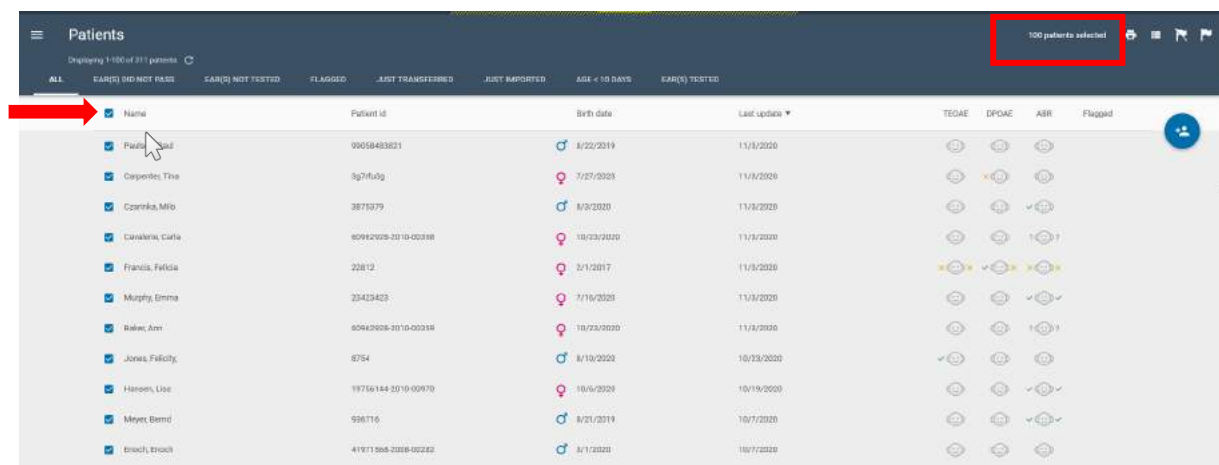

默认情况下，列表中一次只能显示 100 位患者，除非您特意滚动到患者列表底部并选择显示更多患者，可重复进行此操作，直到显示全部患者。因此，您会注意到，选择了显示的全部患者后，信息将显示在屏幕顶部，显示您将对其执行操作的所选患者人数。

### 3.3.3 取消全选（显示的患者）

可以通过再次单击列标题中的 **Select All**（全选）框来取消选择列表中的全部所选患者。

选定的患者仍保持选定状态直到

- 您使用患者行中的 **Deselect**（取消选定）控件取消对单个患者的选定

或

- 您使用 **Deselect all**（取消全选）控件来取消全选
- 您将视图更改为不同的筛选列表
- 您 **Exit**（退出）应用程序

可以通过这三个功能中的任何一个取消选择全部所示患者的选择框，并将患者列表恢复为默认显示 100 名患者。

## 3.4 打印患者列表


选择您想要打印的患者列表，并点击右上角的“打印列表”图标



例如，它可能是您今天需要对其进行重新筛查的患者列表或可对其进行筛查的新患者列表。

### 3.4.1 打印预览

打印预览将显示如下图所示的信息。

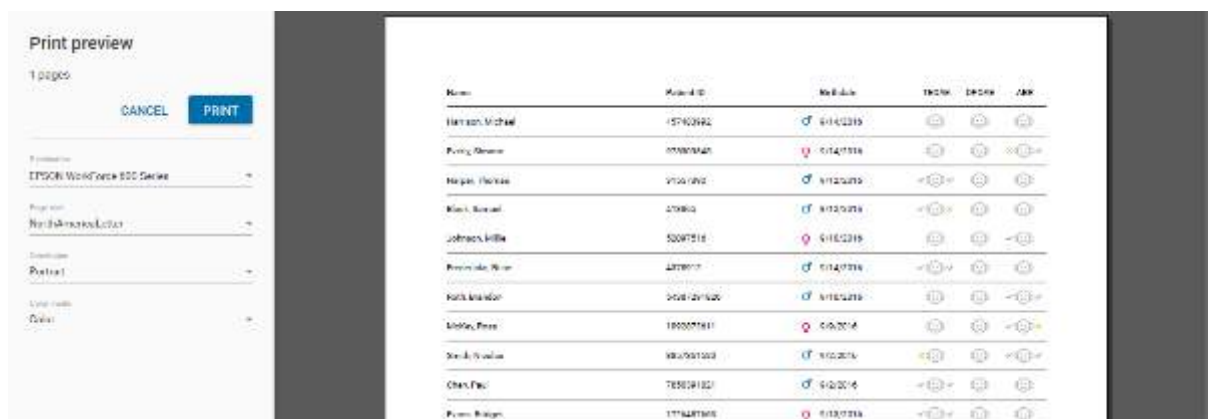


控件使您能够：

- 选择所需的打印机
- 设置页面大小
- 设置方向
- 选择颜色模式
- 打印
- 取消

### 3.5 打印患者测试报告

选择您想要打印测试报告的患者，并选择右上角的 Quick Print Report（快速打印报告）图标

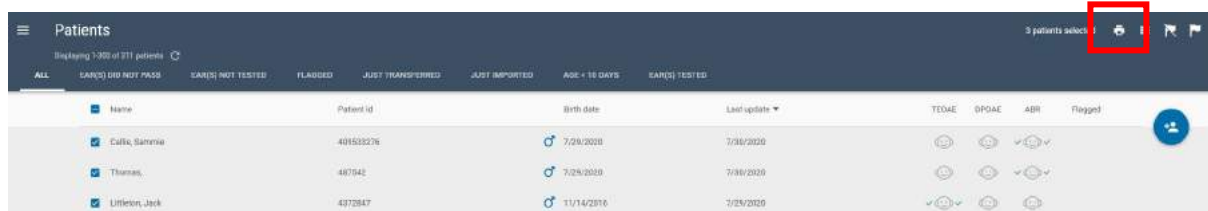

快速打印的测试报告自动包含每只耳朵和每种测试方法的最新测试结果。

它将为您所选的每名患者创建单独的报告并将其显示在打印预览中。

如何选择和打印患者的特定测试，请参阅第 4.14 节。

您可将鼠标悬停在特定患者行，选择最右侧显示的 Quick Print Report（快速打印报告）图标，快速打印单个患者的报告。



### 3.5.1 测试报告打印预览

设置所需的打印机设置。 选择打印以继续打印报告。 须在 HearSIM™ 的管理/打印页面中预先定义报告页眉和徽标文件。




### 3.6 标记患者

列表中的患者可被标记用于提醒您还需要对该患者采取一些行动或用于创建您需要注意的患者列表。在筛选列表之间切换、或关闭和重新启动应用程序，不会改变患者记录的标记状态。

#### 3.6.1 标记单个患者

当您鼠标悬停在患者行上时，**Flag**（标记）控件将出现在患者记录的右侧。

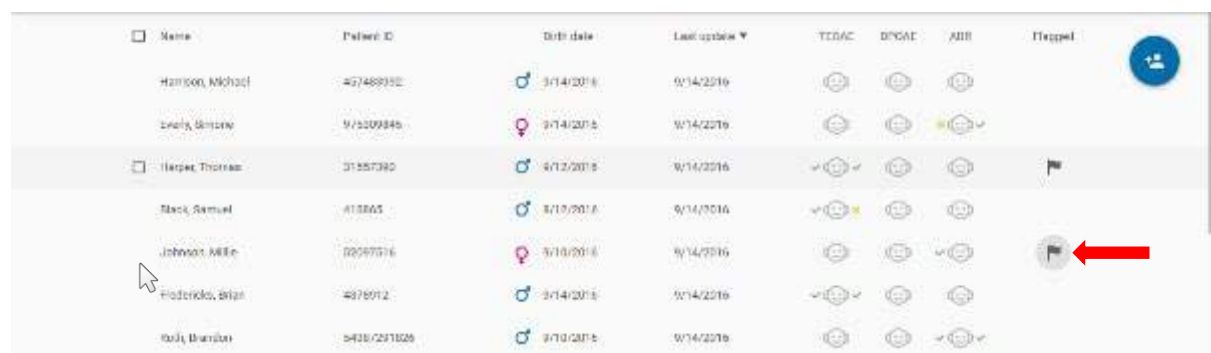


单击 **Flag**（标记）后，当您鼠标再从患者行上移开时，旗标仍然可见。它显示在一个灰色的圆圈中。

可以通过单击每一患者行中的 **Flag**（标记）标记多名患者。


#### 3.6.2 标记列表中的多名或全部所示患者

可以通过以下方式标记列表中的全部所示患者：

- 单击列表标题中的 **Select All**（全选）框，以便选中列表中的全部所示患者
- 选择屏幕右上角的 **Flag**（标记）图标 

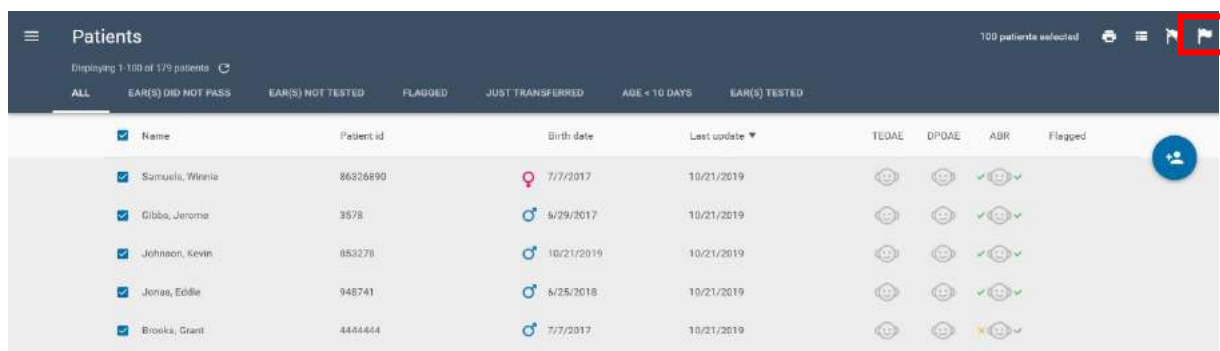

如下图所示，所有选定的患者都将被标记出来。

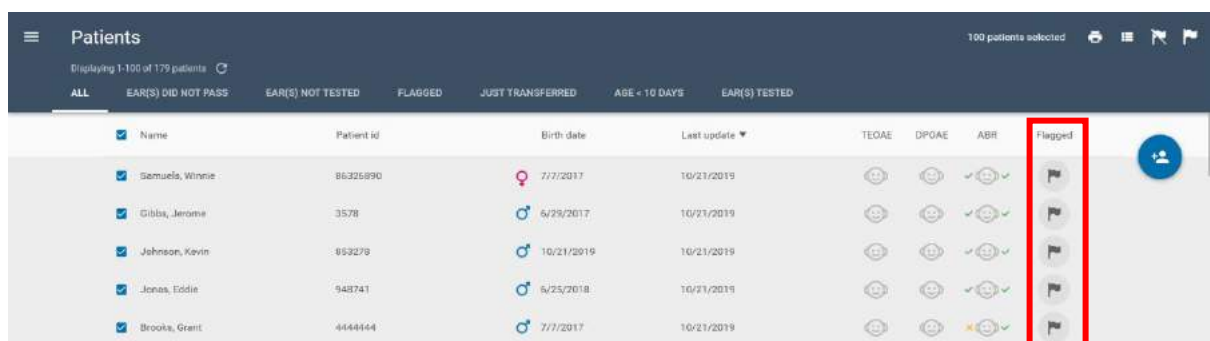

### 3.6.3 取消标记所选定的患者

通过选择列表中已标记的患者，然后再选择 **Unflag**（取消标记）图标  可以取消对他们的标记

### 3.6.4 已标记患者的筛选列表

通过选择 **Flagged**（已标记）的筛选列表，可以查看被标记的患者。

## 3.7 将患者传输到设备

要将患者传输到设备，您需要使用设备附带的 USB 数据线将设备连接到 PC。

当 HearSIM™ 软件检测到设备时，设备图形将出现在 PC 屏幕的左下  角，用以显示设备的状态。

当 HearSIM™ 检测到设备时，设备屏幕将显示 “PC” 或 “Ready（就绪）”。



示 “PC”



Controlled（通过 PC 控制）”



**注意：** 如果设备正显示从患者准备到测试 “Done!（完成！）” 的任何测试阶段，则它不能被软件检测到。如有必要，请返回主屏幕。

**注意：** 显示某些屏幕时，将不会检测到该设备。 如果连接到 HearSIM™ 后未立即出现 “Ready（就绪）” 屏幕，请关闭设备，然后重新打开。



### 3.7.1 设备状态和传输控制

设备图形内所显示的符号提供了有关设备数据库和数据传输就绪状态的信息。 如果将鼠标悬停在图形上，工具提示也会描述状态。



**设备已连接；设备中存有患者和测试数据**

单击设备图形，开始将设备数据导入 HearSIM™ 中。

**注意：** 在执行其他功能（例如将患者传输到设备）之前，必须将设备数据中的测试数据传输到 HearSIM™，与此同时设备中的数据将自动删除。



**设备已连接；未检测到数据**

设备已准备好接收病人，但没有选择任何患者。



**设备已连接；并准备就绪，可将选定的患者传输到设备**

单击设备图形，开始将所选患者传输到设备。



**设备已连接；传输新设备设置已就绪**



**设备已连接；不支持传输设备设置**





设备已连接；无法通信

请参阅故障排除章节。

### 3.7.2 传输患者


在选择图形，并开始将所选患者传输到设备后，将立即弹出一个显示所选患者数量的窗口。




选择 **Transfer**（传输）以继续该过程。屏幕上会显示进度，并在过程结束时通知您。

### 3.8 添加新患者

可以通过选择 **Add New Patient**（添加新患者）图标将新患者添加到数据库中。

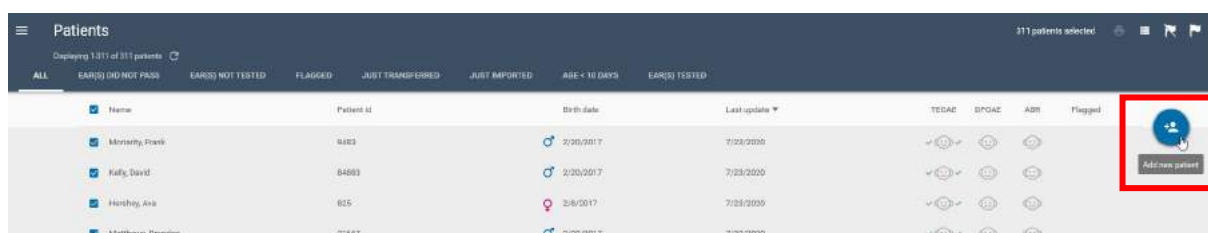

随之将出现新患者窗口，您可以在其中输入患者的基本统计信息。您可以在**管理/患者详细信息**页面中自定义必填字段。不允许在必填字段未填写完整时尝试保存新患者。

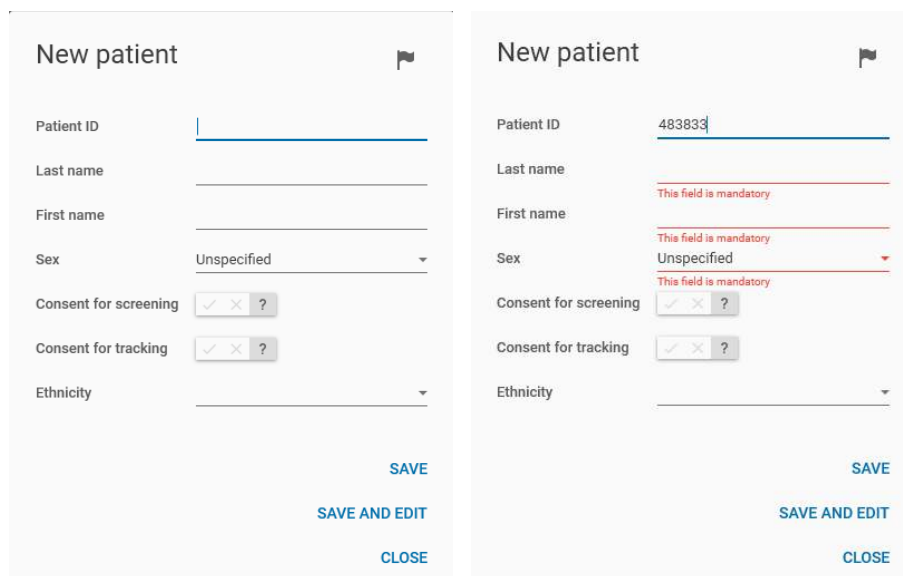


### 3.8.1 患者 ID

必需填写患者 ID 字段才能将新患者保存到数据管理器中。输入到此字段的值在数据库中必须是唯一的。

#### 3.8.1.1 患者 ID 冲突

不允许输入相同的患者 ID。当您的输入值与已保存在数据管理器中的 ID 相匹配时，在 ID 字段下方将显示 ID 冲突通知。这意味着已保存此 ID 患者。您可以通过使用患者列表中的搜索字段来搜索此 ID 患者。

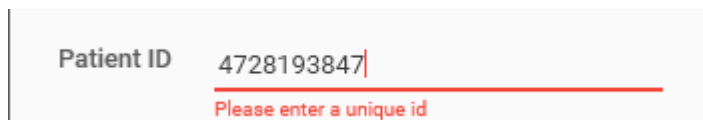

您必须输入一个唯一 ID 才能保存新患者。

### 3.8.2 姓 & 名

姓名字段允许您输入患者的姓和名。这些是可选字段。

### 3.8.3 出生日期

出生日期字段默认显示当天的日期。

可以在该字段或使用 **Calendar**（日历）控件输入患者的出生日期。

### 3.8.4 生理性别

您可以使用下拉控件打开包括男性、女性和未指定（默认）的列表来输入患者的性别。

### 3.8.5 同意筛查

对于需要获取父母同意跟踪，以进行筛查的程序，可以为此检查选择 **Yes**（是），如果未获同意，则选择 **X**。

### 3.8.6 同意跟踪

对于需要获取父母同意跟踪，以将数据发送到跟踪中心，可以为此检查选择 **Yes**（是），如果未获同意，则选择 **X**。

### 3.8.7 民族

对于需要跟踪患者民族的程序，您可以在这里使用根据配置页面中的条目填充的下拉列表输入相关内容。

### 3.8.8 跟踪 ID


对于使用与医院分配的患者 ID 不同的跟踪 ID 的程序，可以在新患者屏幕上启用跟踪 ID 字段。

#### 3.8.8.1 跟踪 ID 和 HiTrack 导出文件


当为患者输入跟踪 ID 并将该患者的测试输出到 **HiTrack** 格式的导出文件时，跟踪 ID 将替换 **HiTrack** 文件中的患者 ID 字段。

### 3.8.9 标记

可以通过选择 **Flag**（标记）控件在新患者窗口中标记患者。

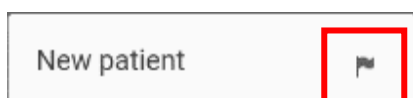

未标记

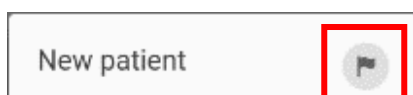

已标记

如果在“新患者”窗口中标记患者，则在患者被保存到数据管理器后，患者列表视图中的标记将立即被开启。

### 3.8.10 保存

输入患者信息后，选择 **Save**（保存）到：

- 将患者保存到数据管理器
- 清除新患者窗口中的内容，用以输入其他患者的信息

### 3.8.11 保存并编辑

输入患者信息后，选择 **Save and Edit**（保存并编辑）为：

- 将患者保存到数据库中
- 打开“编辑患者”窗口，以便为此患者添加更多详细信息和/或风险因素信息

注意：有关编辑患者窗口的详细信息，请参阅第 3.11 节。

### 3.8.12 关闭

选择 **Close**（关闭）以关闭新患者窗口。如果在某一字段中还存在数据，选择 **Close**（关闭）控件，会造成该数据丢失。

## 3.9 患者的详细信息

要查看所有患者信息字段，请单击患者列表视图中患者行中的患者姓名或 ID 号。患者详细信息视图由 3 部分组成：基本信息、详细信息和风险因素。

这些部分中显示的字段可以在**管理/患者详细信息**页面中进行自定义。

The screenshot displays the 'Patients' management interface. On the left, a table lists 13 patients. The patient 'Matthews, Brandon' with ID 21667 is selected. On the right, a detailed view for this patient is shown, including tabs for 'TEST RESULTS', 'PATIENT DETAILS', and 'CONTACT INFO'. The 'PATIENT DETAILS' tab is active, showing 'Basic information' and 'Detailed information' sections.

| Name                     | Patient id   | Birth date       | Last update      |
|--------------------------|--------------|------------------|------------------|
| Monahan, Frank           | 9482         | 3/20/2017        | 7/23/2020        |
| Kelly, David             | 84855        | 2/20/2017        | 7/23/2020        |
| Hensley, Jane            | 825          | 2/8/2017         | 7/23/2020        |
| <b>Matthews, Brandon</b> | <b>21667</b> | <b>2/20/2017</b> | <b>7/23/2020</b> |
| Moon, Johnny             | 483290901    | 2/19/2017        | 7/23/2020        |
| Jackson, Janet           | 773882667    | 2/20/2017        | 7/23/2020        |
| Jackson, Helen           | 5879932229   | 2/12/2017        | 7/23/2020        |
| Johnson, Regina          | 483728718    | 1/17/2017        | 7/23/2020        |
| Lopez, Justin            | 65883322     | 2/20/2017        | 7/23/2020        |
| Evans, Bruno             | 2551667      | 2/20/2017        | 7/23/2020        |
| Smith, George            | 482728       | 2/20/2017        | 7/23/2020        |
| Smith, Tami              | 848291       | 2/20/2017        | 7/23/2020        |
| Smith, Bill              | 2735882      | 2/19/2017        | 7/23/2020        |

| Patient 21667           |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Matthews, Brandon       |                            |
| Male born 2/20/2017     |                            |
| TEST RESULTS            | PATIENT DETAILS            |
| CONTACT INFO            |                            |
| Basic information       |                            |
| Patient id              | 21667                      |
| Last name               | Matthews                   |
| First name              | Brandon                    |
| Birth date              | 2/20/2017                  |
| Sex                     | Male                       |
| Consent for screening   | <input type="checkbox"/> ? |
| Consent for tracking    | <input type="checkbox"/> ? |
| Detailed information    |                            |
| Birth order             | Unspecified                |
| Birth weight            |                            |
| Developmental age (yrs) |                            |
| Time of birth (h:mm)    |                            |
| Expected birth date     |                            |

### 3.9.1 基本信息

基本信息部分支持显示以下信息：

- 患者 ID
- 姓
- 名
- 出生日期
- 性别
- 同意筛查
- 同意跟踪
- 跟踪 ID（如果启用）

### 3.9.2 详细信息

详细信息部分可显示以下字段：

- 出生顺序
- 出生体重 [g]
- 胎龄 [wks]
- 出生时间 [hh: mm]
- 预计出生日期
- 种族
- 民族
- 出生机构
- 托儿所类型
- 保险
- 医生
- 区域唯一 ID
- 跟踪变量 1
- 未筛查原因
- 注意

### 3.9.3 风险因素

本部分将显示有关风险因素的信息。



### 3.10 联系信息

如需查看患者的联系信息，请单击患者列表中的患者姓名，然后选择“联系信息”选项卡。联系信息分为两部分，分别为母亲的信息和备用联系人的信息。

这些部分中显示的字段可以在[管理/患者详细信息](#)页面中进行自定义。

#### 3.10.1 母亲的信息

母亲信息部分支持显示以下字段：

- 母亲的身份证号
- 母亲的姓
- 母亲的名
- 曾用名
- 母亲的出生日期
- 地址栏 1
- 地址栏 2
- 城市
- 州/省/地区
- 邮编
- 国家/地区
- 电话号码

- 电子邮件地址
- 语言
- 教育程度
- WIC 参与情况
- 需要 ADA 交流
- 视觉口语

### 3.10.2 备用联系人信息

备用联系人的信息部分包括以下字段：

- 姓
- 名
- 地址栏 1
- 地址栏 2
- 城市
- 邮编
- 州/省/地区
- 电话号码
- 语言
- 与患者的关系

## 3.11 编辑患者和联系信息

可以通过选择患者详细信息窗口或联系信息界面右上角的 **Edit**（编辑）图标  来编辑或补充患者和联系信息。随后可对这些字段进行编辑。



### 3.11.1 编辑基本信息字段


此部分中的字段和控件与 **Add New Patient**（添加新患者）窗口中的字段和控件完全相同。 请参见第 3.8 节。

### 3.11.2 编辑详细信息字段

本节中的字段和控件如下。

### 3.11.2.1 出生顺序

使用下拉列表控件为婴儿选择出生顺序。默认值为“Unspecified”（未指定）。

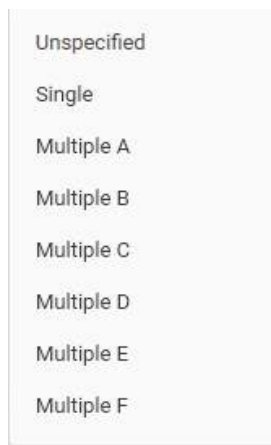

### 3.11.2.2 出生体重 [g]

这是一个文本输入字段，您可以在其中输入婴儿的出生体重（克）。

### 3.11.2.3 胎龄 [wks]

需在胎龄字段输入婴儿出生时的胎龄（单位：周）。

### 3.11.2.4 出生时间 [hh: mm]

出生时间字段的格式设置为仅接受 hh: mm 格式的条目，并且仅接受基于 24 小时制的有效时间。无效的条目将被删除或恢复为最近输入的有效时间。

### 3.11.2.5 预计出生日期

需在该字段直接输入或使用日历控件输入婴儿的预计出生日期。

### 3.11.2.6 种族

需通过从下拉列表控件中选择婴儿的种族来填充此字段。在“配置”页面的“种族”选项卡中对列表中的选项进行配置。

### 3.11.2.7 出生机构

出生机构字段为一个下拉列表，其中显示了 HearSIM 软件™ 机构选项卡的配置区域中所定义的机构列表。

### 3.11.2.8 托儿所类型

托儿所字段是一个下拉列表，显示了在“配置”页面的“托儿所类型”选项卡中定义的列表。

### 3.11.2.9 保险

保险字段是一个下拉列表，显示了在“配置”页面的“保险”选项卡中定义的列表。

### 3.11.2.10 医生

医生字段是一个下拉列表，显示了在“配置”页面的“医生”选项卡中定义的列表。

### 3.11.2.11 区域唯一 ID

这是一个需要输入文本的字段，您可以在其中输入患者的辅助 ID，例如跟踪 ID。

### 3.11.2.12 跟踪变量 1

该字段可根据需要用于筛查程序。

### 3.11.2.13 未筛查原因

未筛查原因字段是一个下拉列表，列出了不对婴儿进行筛查的可能原因。该列表是固定的，不能编辑。

当从列表中选择“未筛查原因”时，将打开其他字段，用于输入“筛查人员”姓名（例如输入原因的人员）和筛查机构名称，以便这些数据字段也出现在记录中。

在 HearSIM™ 中启用“自动导出”功能的 HiTrack 数据库用户选择此字段中的条目时会自动在 HiTrack 导出文件中添加一条记录，以便将该文件合并到 HiTrack 中，以记录患者以及未筛查的原因。

此外，如果手动导出 HiTrack 格式或 XML 格式的文件（包括为具有未筛查原因的患者创建的记录），则患者和原因将包含在导出文件中。

**注意：**自动或手动导出另一种格式（CSV 或 OZ）的跟踪文件时，将忽略任何未筛查原因的记录，因此这些记录将不包含在导出文件中。

### 3.11.2.14 注意

这是一个文本输入字段，您可以在其中输入有关患者的备注信息。

## 3.11.3 编辑风险因素


在 HearSIM™ 中的默认风险因素包括推荐风险因素以及传统风险因素，其中的推荐风险因素被列入在 2007 年婴儿听力联合委员会<sup>1</sup>所发表的立场声明中。可以在 HearSIM™ 软件的配置区域自定义这些风险因素。

---

<sup>1</sup> 婴儿听力联合委员会在 2007 年发表的立场声明：早期听力检测和干预项目的原则与指南，儿科，2007 年：第 120 卷，第 4 期

### 3.11.3.1 风险因素控制

风险因素控制使您能够将值设置为是或否或将其保留为未指定。在编辑模式关闭时，仅在患者详细信息视图中显示“是”风险因素。

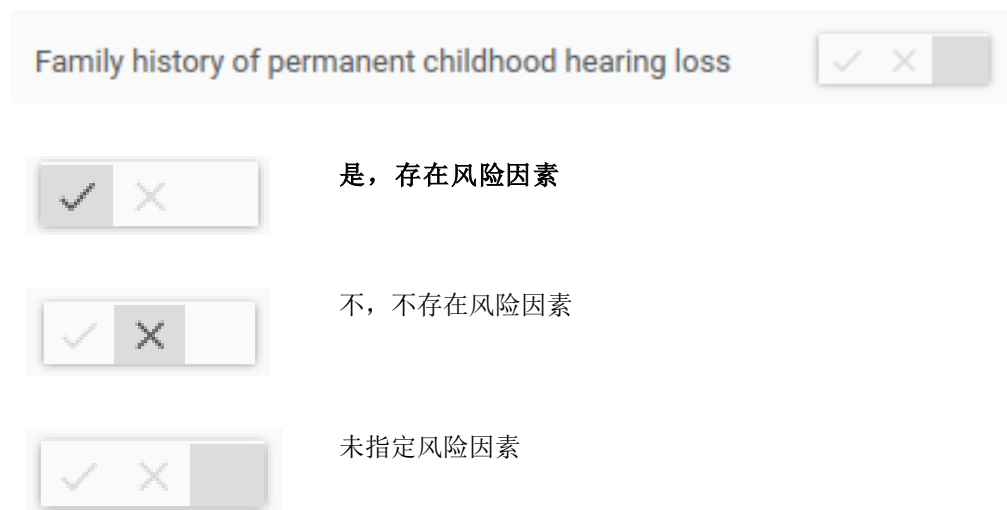

Family history of permanent childhood hearing loss


是，存在风险因素

不，不存在风险因素

未指定风险因素

其他风险因素

允许在 **Other** Risk Factor（其他风险因素）字段输入有关特殊风险因素的文本。

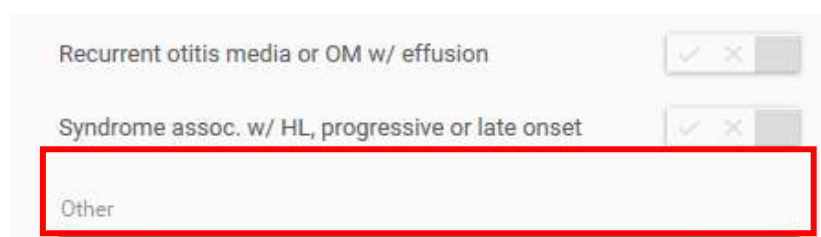

Recurrent otitis media or OM w/ effusion

Syndrome assoc. w/ HL, progressive or late onset

Other

### 3.11.4 编辑母亲的信息

查看患者屏幕的“联系信息”选项卡时，可以添加/编辑母亲的联系信息。可以编辑以下字段。

#### 3.11.4.1 母亲的身份证号

这是一个文本输入字段，可以在其中输入母亲的身份证号。

#### 3.11.4.2 母亲的姓氏、名字和曾用名

这是一个文本输入字段，可以在其中输入母亲的姓名（婚前姓）。

#### 3.11.4.3 母亲的出生日期

该字段用于输入母亲的出生日期，可以手动输入，也可以使用日历控件输入。

#### 3.11.4.4 母亲的住址

可以在这些字段中输入地址行 1、地址行 2、城市、邮政编码/邮递区号和州/省/地区的信息。您还可以在下拉列表中输入居住国/地区。

#### 3.11.4.5 母亲的电话号码

这是一个文本输入字段，可以在其中输入母亲的电话号码。

#### 3.11.4.6 母亲的电子邮件地址

这是一个文本输入字段，可以在其中输入母亲的电子邮件地址。

#### 3.11.4.7 母亲的语言、教育程度

这些字段显示了一个下拉列表，您可以从中选择母亲的语言。这些列表可在配置页面中具有相同名称的指定选项卡中进行配置。

#### 3.11.4.8 母亲的 WIC 参与情况

此字段允许输入是、否或不知道母亲是否参加了妇女、婴儿和儿童的特别补充营养计划（WIC）。

#### 3.11.4.9 需要 ADA 交流

此字段允许输入是、否或不知道是否需要专门的交流。

#### 3.11.4.10 视觉口语

此字段提供了一个固定的下拉列表，您可以从中选择母亲喜欢的视觉/口头交流模式。

### 3.11.5 编辑备用联系人的信息

#### 3.11.5.1 姓氏、名字

这是一个文本输入字段，可以在其中输入备用联系人的姓名。

#### 3.11.5.2 地址

可以在这些字段中输入备用联系人的地址行 1、地址行 2、城市、邮政编码/邮递区号和州/省/地区等信息。

#### 3.11.5.3 电话号码

这是一个文本输入字段，可以在其中输入电话号码。

#### 3.11.5.4 语言

该字段是一个下拉列表，您可以从中选择备用联系人所使用的语言。

### 3.11.5.5 与患者（孩子）的关系

在此字段中，您可以从描述备用联系人与孩子关系的配置列表中进行选择。该列表可以在配置/关系选项卡中自定义。

### 3.11.6 保存或取消更改

在使用视图底部的控件退出 **Edit Patient Information**（编辑患者信息）视图之前，必须保存或取消更改。



#### 3.11.6.1 保存更改

选择 **Save Changes**（保存更改）将保存您所做的修改，并关闭“患者信息”窗口的编辑视图。

#### 3.11.6.2 取消

选择 **Cancel**（取消）将无任何警告提示地直接舍弃您所做的所有修改。同时还原所有字段中的值，并关闭“患者信息”窗口的编辑视图。


## 3.12 删除患者

通过选择患者详细信息视图右上角上的 **Delete**（删除） 图标，可以从 HearSIM™ 中删除患者。



### 3.12.1 删除确认

需要通过选择 **Delete**（删除）控件确认弹出消息。删除患者的同时还会删除所有 HearSIM™ 中的相关测试。

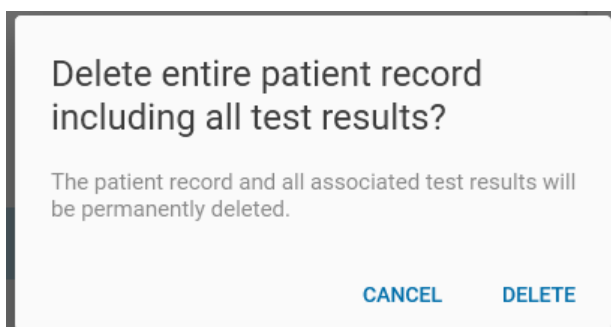


选择 **Cancel**（取消）可取消操作并关闭弹出消息。

### 3.13 测试结果列表

在患者信息窗口中选择 **Test Results**（测试结果）选项卡，查看已从设备传输到 HearSIM™ 的所有测试列表。

测试列表以逆时间顺序进行排列。

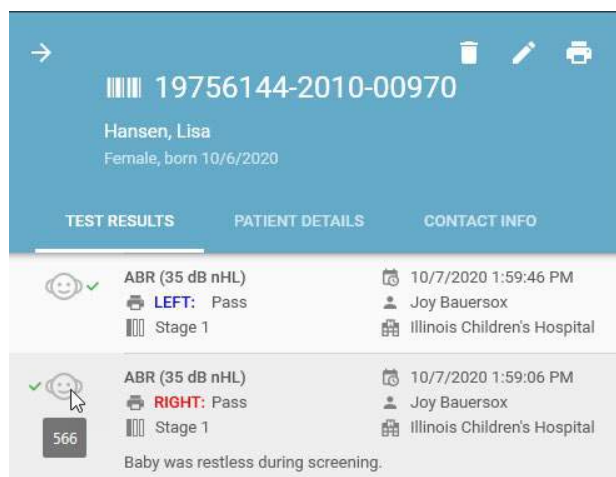


显示的信息包括以下内容（筛查阶段、筛查人员、筛查机构和备注均为可选项）。

- 测试耳别
- 测试类型
- 结果
- 筛查阶段
- 测试日期和时间
- 筛查者
- 筛查机构
- 测试注释
- 测试 ID（将鼠标悬停在婴儿头像上时，会出现工具提示）




在列表中，双耳 ABR 测试显示双耳的测试结果，如下所示。

对不完整测试，请将鼠标悬停在  问号上，以查看停止测试的原因（如已输入）。

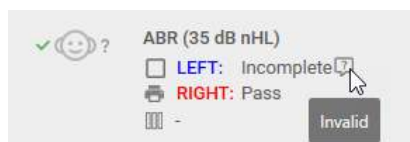

3.14 测试细节显示

在列表选择一个测试，以查看此测试的详细视图。

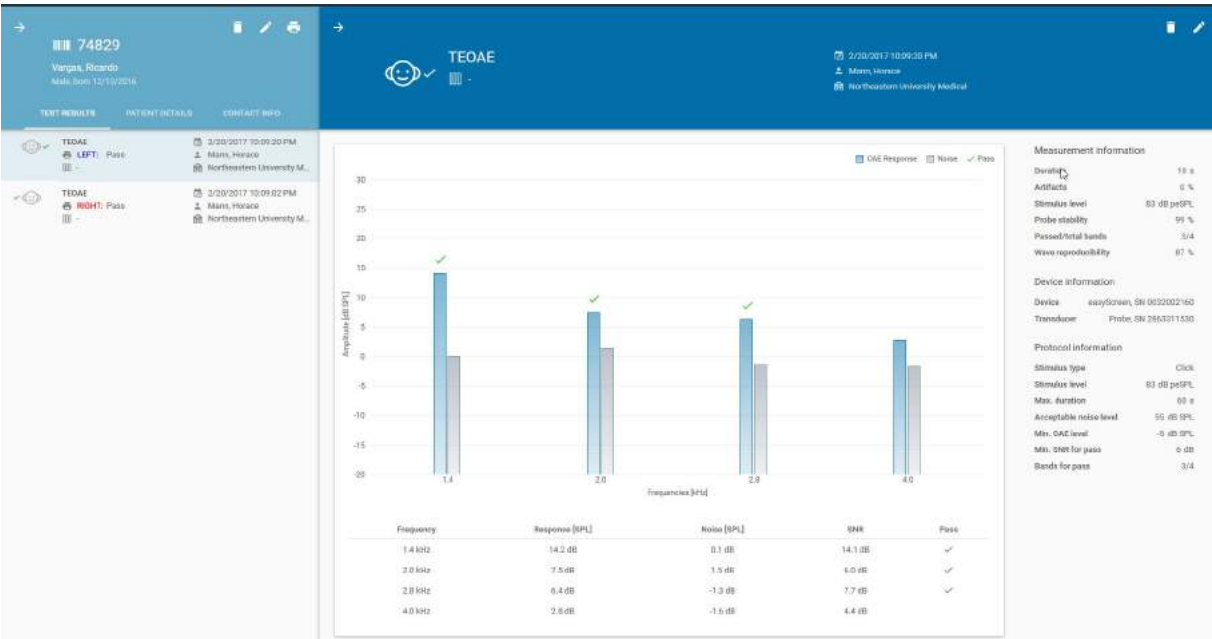

3.14.1 图表显示

以图表方式显示所选测试的测试数据。

对 DPOAE 和 TEOAE 测试，以条形图显示了每个测试频率的 OAE 响应和噪声振幅值。 条形图下方是数值表格。

对 ABR 测试，时间图显示的是测试进展，是所完成的一个合格测试值与对应时间的图形。

3.14.2 测量信息

所测量的测试值在本部分显示，但因测试类型和所使用的测试设备而有所差异。

3.14.3 设备信息

本节显示用于测试的设备和传感器信息。

3.14.4 协议信息

本部分显示了对测试有效的协议参数以及协议名称。

### 3.15 编辑测试字段


测试详细信息视图打开后，选择 **Edit**  图标可编辑或添加与测试相关的某些字段。



#### 3.15.1 编辑测试信息窗口

在 **Edit Test Information**（编辑测试信息）窗口中，只能编辑一些特定字段，用以添加测试时不可用的信息或更正输入错误。

如右图所示，双耳 ABR 测试的编辑屏幕包含两只耳朵的信息。

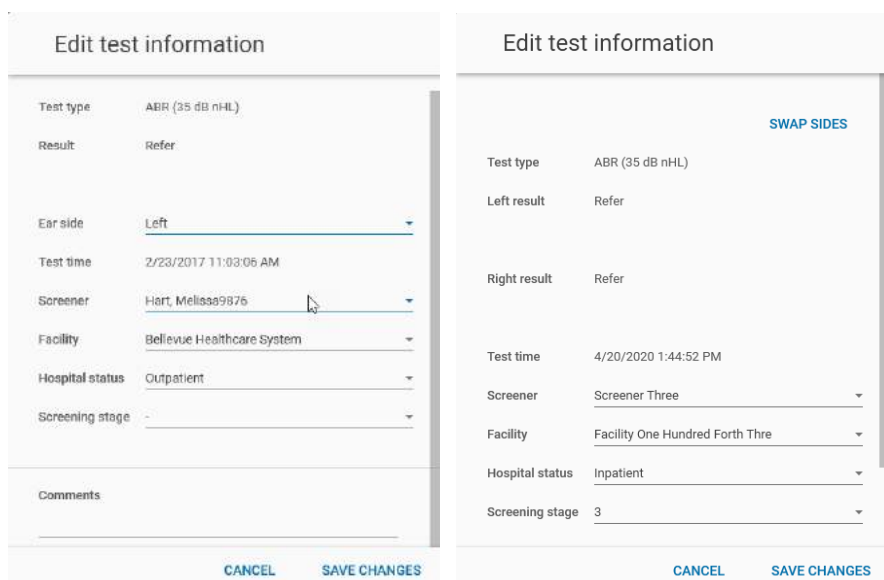

##### 3.15.1.1 不可编辑的字段

不能更改测试类型、结果、测试日期和时间，但会显示它们以供查看。

##### 3.15.1.2 停止原因

对于不完整的测试结果，将出现一个停止原因字段，其中包含以下选项：

- 无法测试
- 无效

##### 3.15.1.3 耳侧

如果发生筛查者在筛查并记录耳朵过程中失误的情况，可以更换耳朵。

对双耳 ABR 测试，可使用 **Swap Sides**（交换双耳）。选择后，双耳的结果和测试进度数据将被交换。如果筛选器未能正确地将插入式耳机放入患者耳朵进行测试，而测试完成后才发现，则可使用该功能。

#### 3.15.1.4 筛查者

如果已在 HearSIM™ 的配置部分定义筛查者姓名，可以使用筛查者的下拉列表添加或更改姓名。

#### 3.15.1.5 设施

如果已在 HearSIM™ 的配置部分中定义筛查机构，可以使用显示设备的下拉列表添加或更改筛查机构。

#### 3.15.1.6 就诊状态

可以使用包含以下选项的下拉列表添加或更改筛查时患者的就诊状态：

- 住院患者
- 门诊患者
- 家访患者

#### 3.15.1.7 筛查阶段

可以从下拉列表中选择筛查阶段。

#### 3.15.1.8 测试注释

可以在此备注字段中添加或编辑关于筛查的注释。

### 3.15.2 保存或取消更改

必须保存或取消更改，才能使用视图底部的控件退出“编辑测试信息”视图。



#### 3.15.2.1 保存更改

选择 **Save Changes**（保存更改）将保存您所做的修改，并关闭“编辑测试信息”窗口。

#### 3.15.2.2 取消


选择 **Cancel**（取消）将无任何警告地直接舍弃您所做的所有修改。同时还原所有字段中的值，并关闭“编辑测试信息”窗口。

### 3.16 打印患者报告

在查看患者的测试结果列表时，您可以打印该患者的测试报告。


#### 3.16.1 打印默认

打开列表后，选择窗口顶部的 **Print patient report**（打印患者报告）图标。这将自动打开报告的打印预览，其中包含采用每种技术对每只耳朵进行的最新测试结果。

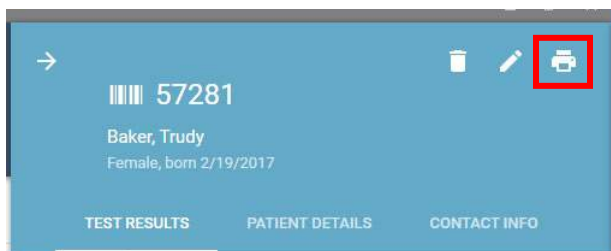

### 3.16.2 选择测试


如要选择要在报告中打印特定测试，而不是默认测试，请将鼠标悬停在要打印的测试所在行的打印机图标上。打印机图标将更改为复选框。请选中该复选框，以便打印测试。对于要包含在报告中的所有测试，请重复此操作。

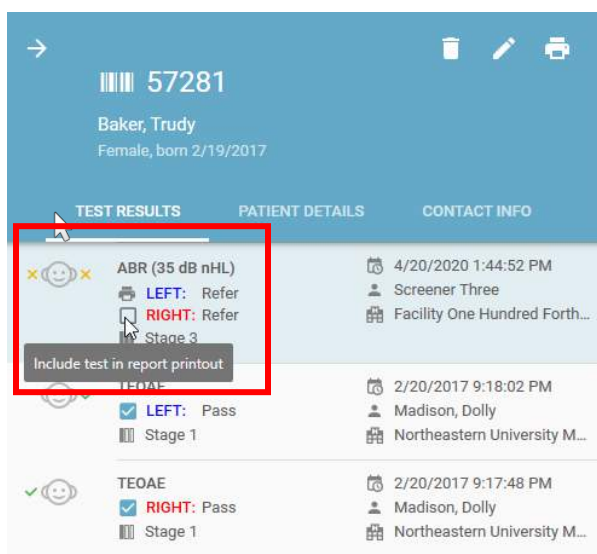

所选测试的复选框将一直显示，在您从一个测试转到另一个测试时仍可见。

### 3.16.3 执行报告打印

选择所需的测试后，选择屏幕右上角的 **Print**（打印）图标可显示打印预览。

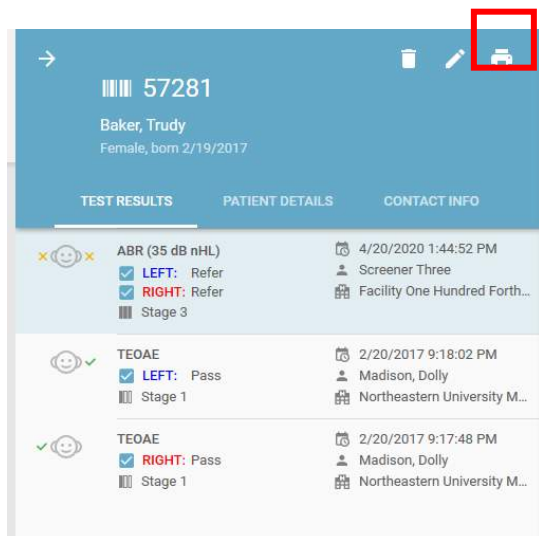

### 3.16.4 打印预览

测试报告的打印预览如下图所示：



控件使您能够：

- 选择所需的打印机
- 设置页面大小
- 设置边距
- 设置方向
- 选择颜色模式
- 打印
- 取消

### 3.16.5 报告格式

测试报告是一个固定格式的報告，將顯示以下信息。

- 机构名称和徽标（如果已在“管理/打印”界面中配置）
- 标题
- 患者信息
- 筛查结果

### 3.17 将数据从设备传输到 HearSIM™

如需将患者和筛查测试信息从设备传输到 HearSIM™，请用设备附带的 USB 数据线将设备连接到 PC。

当 HearSIM™ 软件检测到设备时，设备图形将出现在 PC 屏幕的左下角，用以显示设备的状态。当 HearSIM™ 检测到设备时，设备屏幕将显示“PC Controlled（PC 受控）”或“Ready（就绪）”。

**注意：**如果设备正显示从患者准备到测试“Done!（完成！）”的任何测试阶段，则它不能被软件检测到。如果需要进行连接，请返回到主屏幕。

#### 3.17.1 设备数据导入

当 HearSIM™ 检测到设备连接时，所有可能出现的设备图形可在第 3.7.1 节中找到。

如果在设备上有患者和/或测试数据，您将看到以下图形：



设备已连接；设备中存有患者和测试数据

单击设备图形，开始将设备数据导入 HearSIM™ 中。

单击图形以开始导入后，将打开一个窗口，您需在其中选择 **Import**（导入）以执行传输操作。



传输完成后，数据将自动从设备中清除。

然后，设备可用于传输在 HearSIM™ 中选定的患者姓名或用于直接输入和测试新患者。

选择 **Cancel**（取消）按钮可取消操作。

### 3.17.1.1 筛查与诊断设备型号



HearSIM™支持的某些 OAE 设备的筛查型号使用以下名称的测试协议：

- DP 4s
- DP 2s
- TE 32s
- TE 64s

HearSIM™支持使用这些协议进行测试，并可将这些测试传输到 HearSIM™/OtoAccess®中。

这些设备的某些型号还允许使用除上文所列名称之外的筛查或诊断协议进行测试。在将数据传输到 HearSIM™的过程中遇到此类数据时，这些测试**将不会被导入 HearSIM™，而是从设备中删除。**



**重要提示：** 使用不受支持的协议进行测试**不能传输**到数据库中，即使传输后也会从设备中立即被删除。在将数据传输到 HearSIM™之前，请确保打印或保存使用不受支持的协议所获得的测试结果。

### 3.17.2 合并冲突解决

在将设备中的数据传输到 HearSIM™ 时，如果来自于设备的患者 ID 与 HearSIM™ 数据库中已存在的 ID 相匹配，那么数据将被合并。

如果患者 ID 匹配，但其他基本患者字段有冲突条目，则会出现一个窗口，让您可以在传输完成之前查看冲突并解决冲突。

**Resolve conflict for patient ID 694783jsjd**

An existing patient record for patient id 694783jsjd was found in the database.  
Please resolve any conflicts by selecting which data to keep.  
Alternatively, enter a new patient ID to create a new record.

☒ Merge with existing record

| Last name             | May       | May       | May   |
|-----------------------|-----------|-----------|-------|
| First name            | Carl      | Karl      | ?     |
| Gender                | Male      | Male      | Male  |
| Birthdate             | 7/17/2019 | 7/18/2019 | ?     |
| Time of birth [hh:mm] | 08:14     | 08:14     | 08:14 |

☐ Create new record with different patient ID

694783jsjd

SKIP RESOLVE

该表以行显示基本的患者字段。设备 与 HearSIM™ 的字段条目显示在列中。最后一列反映了将保存在 HearSIM 中的条目，在您选择了正确的条目后，该条目可用于解决存在的任何冲突。

要解决冲突，请注意最后一列中有问号符号 的行。然后通过单击设备值或 HearSIM™ 值为该字段选择正确的字段条目。

**Resolve conflict for patient ID 694783jsjd**

An existing patient record for patient id 694783jsjd was found in the database. Please resolve any conflicts by selecting which data to keep. Alternatively, enter a new patient ID to create a new record.

☒ Merge with existing record

|                       |  |  |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Last name             | May                                                                               | May                                                                               | May                                                                               |
| First name            | Carl                                                                              | Karl                                                                              | Carl                                                                              |
| Gender                | Male                                                                              | Male                                                                              | Male                                                                              |
| Birthdate             | 7/17/2019                                                                         | 7/18/2019                                                                         | 7/18/2019                                                                         |
| Time of birth [hh:mm] | 08:14                                                                             | 08:14                                                                             | 08:14                                                                             |

☐ Create new record with different patient ID

694783jsjd

[SKIP](#) [RESOLVE](#)

在您选择了准确的字段条目后，便可以选择 **RESOLVE**（解决）按钮将此患者及相关测试保存到 HearSIM 中。最后一列中的数据将保存到该患者的 HearSIM 数据库中。

如果选择 **SKIP**（跳过）此患者，那么此患者不会被传输到 HearSIM 中，也不会从设备中删除此患者。

### 3.17.2.1 更改患者 ID

在您查看冲突数据时，您可能会发现设备和 HearSIM™ 软件具有相同的患者 ID（由于某些错误输入造成），但他们实际上却是两名不同的患者。在这种情况下，您不能将测试结果合并在一起。

要解决这种情况，可以选择 **Create new record with different patient ID**（使用其他患者 ID 创建新记录）选项，并为从设备转移的患者输入新的 ID。

**Resolve conflict for patient ID 49dkjfdkjasd**

An existing patient record for patient id 49dkjfdkjasd was found in the database. Please resolve any conflicts by selecting which data to keep. Alternatively, enter a new patient ID to create a new record.

☐ Merge with existing record

|                       |  |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Last name             | Schultz                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |
| First name            | Sam                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
| Gender                | Male                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
| Birthdate             | 12/9/2019                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |
| Time of birth [hh:mm] | 18:55                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |

☒ Create new record with different patient ID

49dkjfdkjasd

Patient id is not unique

[SKIP](#) [RESOLVE](#)

在字段中编辑患者 ID 时，如果输入的 ID 仍与在 HearSIM™ 中保存的患者匹配，则会显示该患者的信息。如果不匹配，在您**解决**冲突时，将为 HearSIM™ 中的新患者创建一个新 ID。设备中的患者字段及其所有相关测试将被保存在此新患者 ID 号下。

**Resolve conflict for patient ID 49dkjfdkjasd**

An existing patient record for patient id 49dkjfdkjasd was found in the database.  
Please resolve any conflicts by selecting which data to keep.  
Alternatively, enter a new patient ID to create a new record.

☐ Merge with existing record

☒ Create new record with different patient ID

49dkj432

SKIP RESOLVE

### 3.17.3 导入未分配的测试




受支持的设备类型允许在与特定患者无关的设备上执行测试。 当此设备连接到 HearSIM™且存在未分配的测试时，这些测试将被临时存储在 HearSIM™的“未分配测试”页面中。

## 4 未分配的测试




HearSIM™支持的一种设备以“测试 ID”作为唯一标识符保存筛查测试。 可以将这些测试传输到 HearSIM™中，并保存在临时位置，等待分配给数据库中已有的患者或新患者。

将测试传输到 HearSIM™之后，在主菜单中选择“分配测试菜单”项。

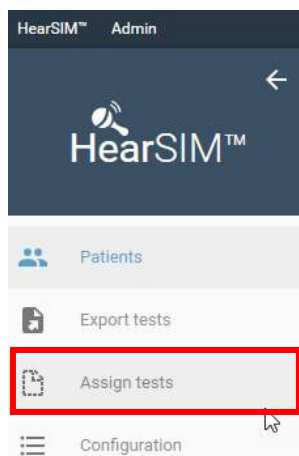

未分配的测试列表显示在左侧，并显示设备分配的测试编号以及其他测试信息。

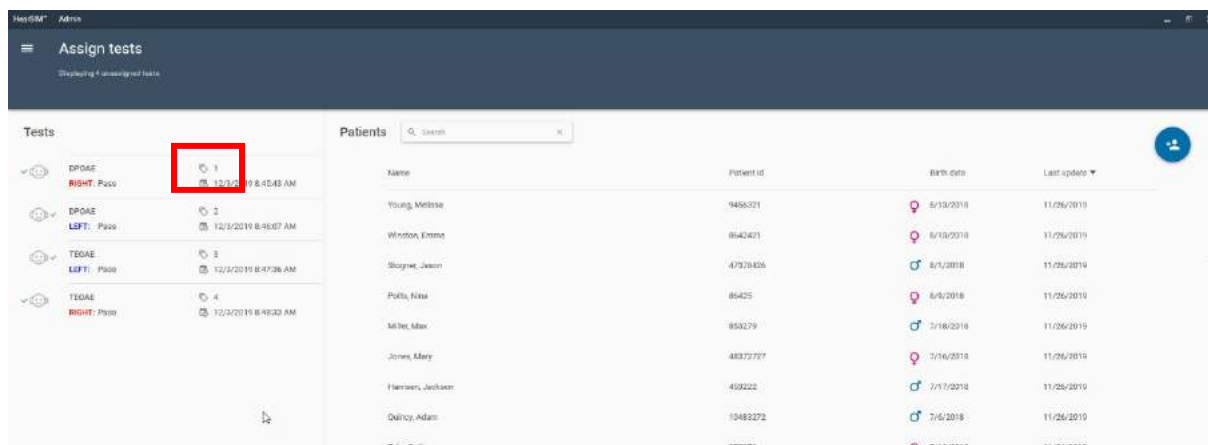

## 4.1 为新患者分配测试





当将鼠标指针悬停在列表中的测试上时，在出现的复选框中打钩，然后选择要分配给患者的测试。




选择您想分配给患者的所有测试。 然后选择 **Add new patient**（添加新患者）图标，以打开新患者输入屏幕。 输入患者的信息。 您必须至少输入患者 ID 才能将测试分配给患者。

将数据填写完整后，选择 **Save and Select**（保存并选择）。

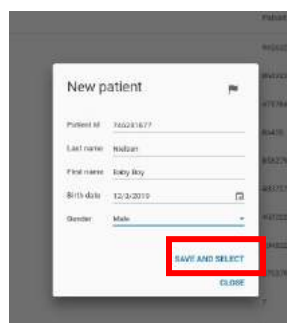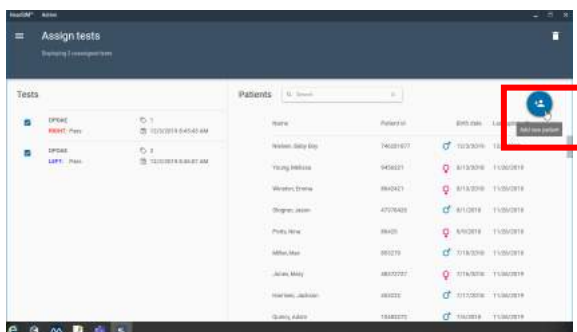

在下一个屏幕中查看您的选择，以验证所有信息正确无误。 选择 **ASSIGN**（分配）即可完成该过程。 分配测试后，这些测试将从列表中消失。

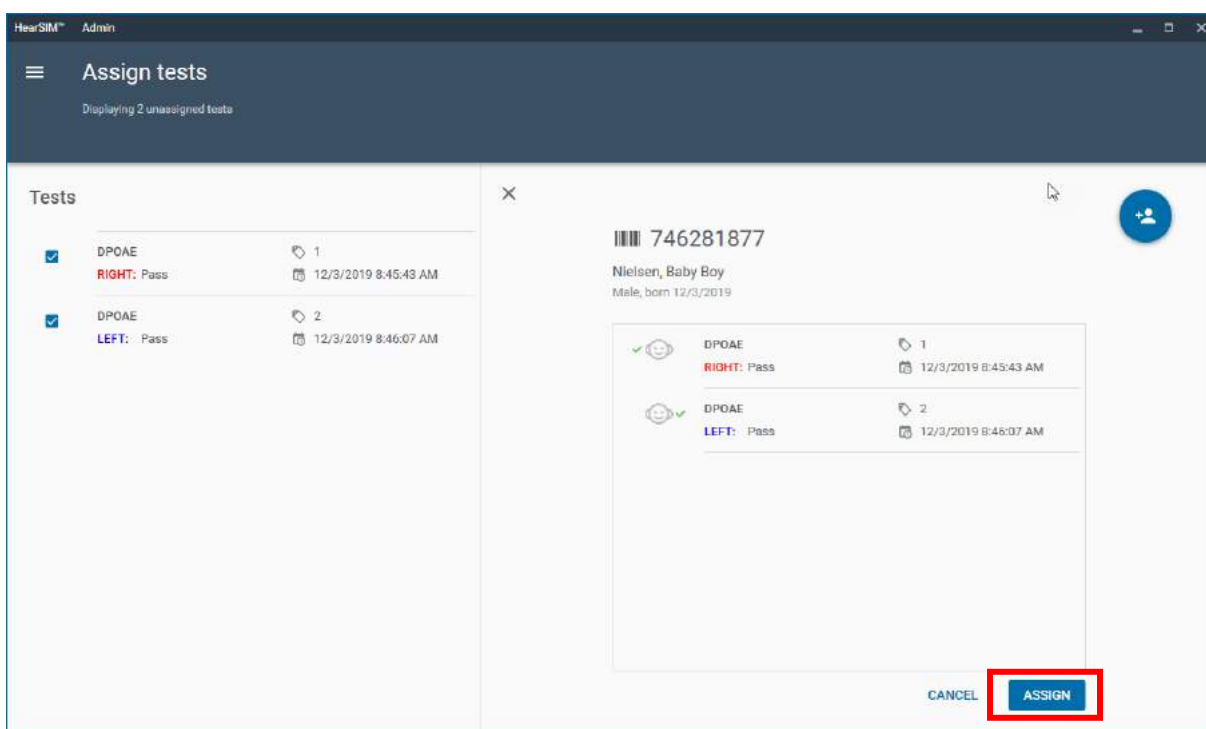


## 4.2 将测试分配给当前患者




当将鼠标指针悬停在列表中的测试上时，在出现的复选框中打钩，然后选择要分配给患者的测试。

从屏幕右侧的患者列表中选择一名患者。输入患者 ID 或姓氏，使用搜索功能查找所需的患者，将列表缩短为匹配的条目。

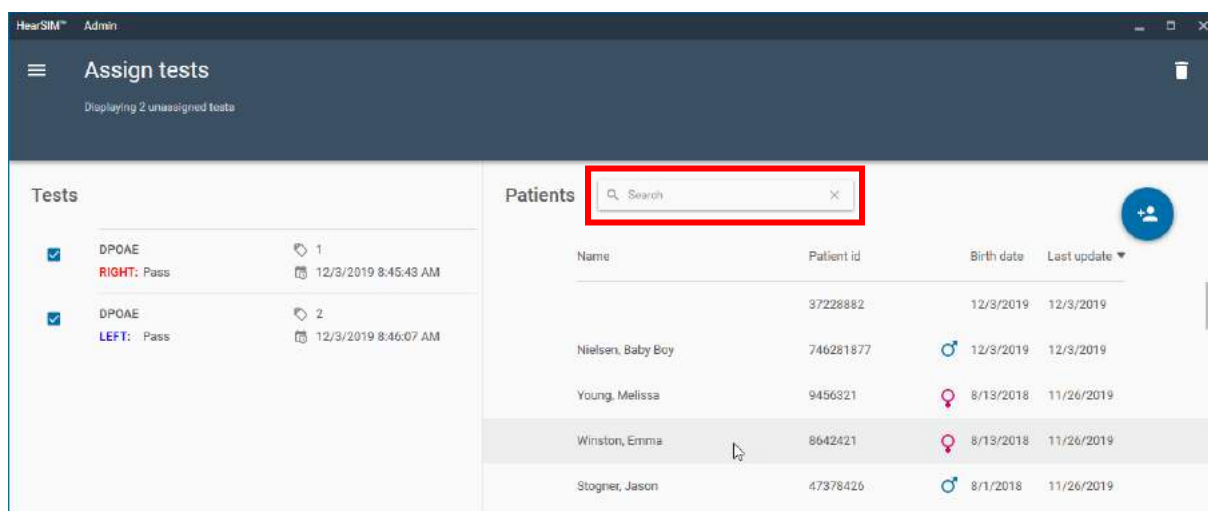


选择患者时，将显示“确认”屏幕。验证信息的准确性，然后选择 **ASSIGN**（分配）。将从列表中删除测试。

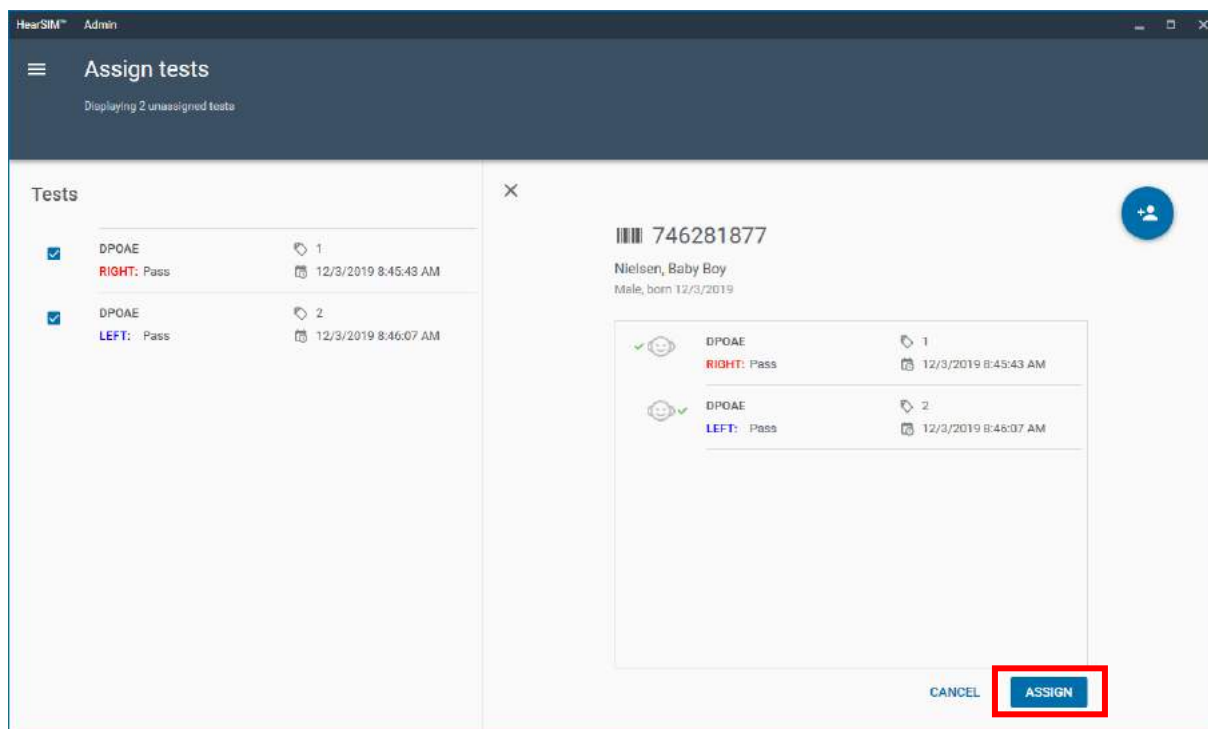


4.3 删除未分配的测试



单击复选框选择要删除的测试。 选择垃圾箱图标，将测试从列表中删除。

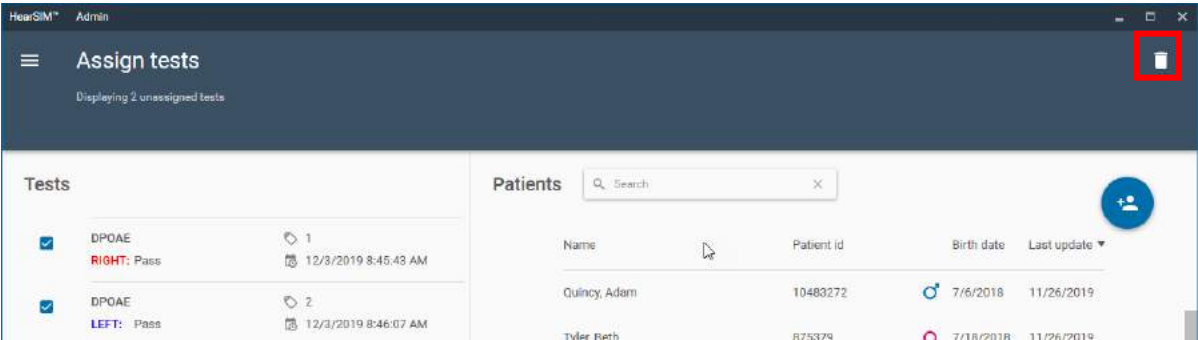

选择 **DELETE**（删除）可确认您真的想从列表中永久删除测试。 或者，**CANCEL**（取消）操作也可删除测试。

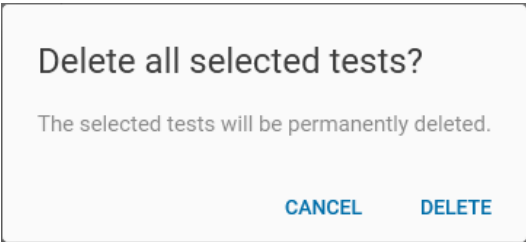

## 5 导入患者

导入患者功能使您可将其他数据库导出的文件中的患者列表导入到 HearSIM 中。例如，您可以从医院信息系统或其他第三方数据库（例如 HiTrack）导出患者信息，然后将这些患者数据再导入到 HearSIM 中。这避免了手动输入数据时可能产生的错误。

### 5.1 导入字段

导入需与包含以下数据字段的导出文件兼容：

- 患者 ID
- 姓
- 名
- 性别
- 出生日期
- 出生时间

### 5.2 导入文件的格式

支持以下文件格式。

#### 5.2.1 HiTrack 文件格式

“HiTrack”导入文件的格式示例：

```
"123456","Mueller","Anna","F",20190821,"03:00"  
"123455","Meyer","Bernd","M",20190821,"02:00"  
"a67123iojq","Cooper","Chad","M",20190821,"01:00"  
"973441123","PAULSON","Paul","M",20190821,"04:16"
```

#### 5.2.2 HearSIM XML


HearSIM XML 文件的示例：

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<HearSimXml xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-  
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
Version="0.3" ExportTime="2020-07-28T14:43:00.3559418+02:00">  
  <Patients>  
    <Patient>  
      <Guid>2e392835-af98-4e44-8fab-a9777cacba0</Guid>  
      <PatientId>948727</PatientId>  
      <FirstName>Anna</FirstName>  
      <LastName>Mueller</LastName>  
      <Birthdate>2020-07-27T00:00:00</Birthdate>  
      <TimeOfBirth>03:00</TimeOfBirth>  
      <Gender>Unspecified</Gender>  
    </Patient>  
  </Patients>  
</HearSimXml>
```


### 5.3 设置

要将患者导入到 HearSIM™ 中，请选择要导入文件的文件格式。

单击文档图标浏览至包含导入文件的路径。 找到保存文件的路径。 选择并将其 **Open**（打开）。

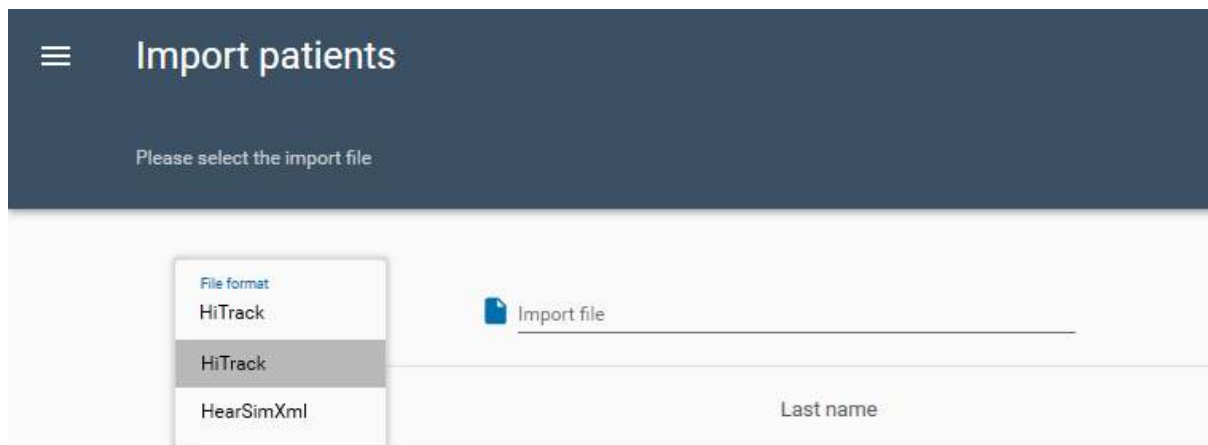


### 5.4 执行导入

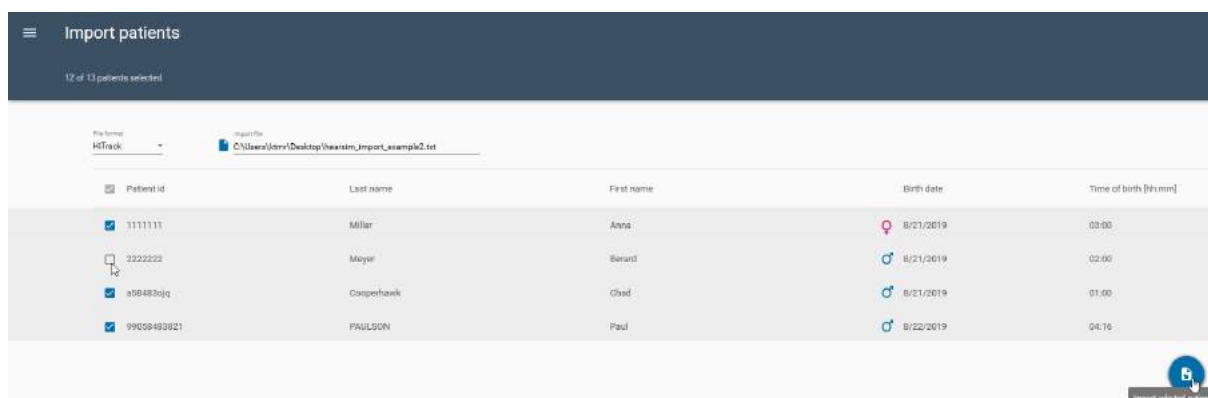

将显示文件中的患者列表。默认情况下，将选择导入全部患者。 但是，如果您想排除某些患者，可以取消选择姓名旁边的复选框。

如需完成导入，请选择屏幕右下角的 **Import selected patients**（导入所选患者）按钮。

确认消息将向您显示添加到 HearSIM™ 数据库中的患者人数。

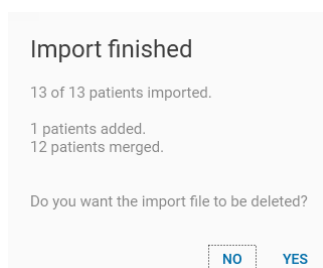

选择 **No**（否）可关闭消息，并将导入文件保留在其路径中。 选择 **Yes**（是）可关闭消息并删除文件。

## 6 导出测试

HiTrack 和 OZ eSP™是专为处理新生儿听力筛查数据而设计的第三方数据管理器。HearSIM™允许将筛查数据导出为与 HiTrack 或 OZ eSP™兼容的格式。

有两种方法可以将 HearSIM™数据导出为 HiTrack 或 OZ eSP™文件格式。

### 6.1 自动导出

可以配置 HearSIM™，使其在数据传输期间自动将筛查数据导出到 HiTrack 兼容文件或 OZ eSP™兼容文件中。

启用此功能后，每当数据被传输到 HearSIM™时，测试数据将被附加到指定文件。

有关设置自动导出功能的更多信息，请参阅第 8.1 节。

### 6.2 手动导出

您可以随时手动将筛查数据导出到 HiTrack 兼容的(hearsim.txt)文件、OZ eSP™兼容的文件(hearsim.oz)、逗号分隔值(hearsim.csv)文件格式或 XML(hearsim.xml)文件格式。

#### 6.2.1 导出测试对话框

选择 HearSIM™菜单中的导出测试项目。通过几项设置您可定义导出的条件。

| Test ID   | Ear       | Status | Patient Name      | Date      | Time     | Location            |
|-----------|-----------|--------|-------------------|-----------|----------|---------------------|
| 19812853  | Left ear  | TEOAE  | Prescott, Abigail | 5/30/2016 | 13:30:44 | O'Hara, MaryC127462 |
| 19812853  | Right ear | TEOAE  | Prescott, Abigail | 5/30/2016 | 13:30:14 | O'Hara, MaryC127462 |
| 392847563 | Right ear | TEOAE  | Menikov, Olga     | 5/30/2016 | 12:07:44 | Francis, Corinne765 |
| 392847563 | Left ear  | TEOAE  | Menikov, Olga     | 5/30/2016 | 12:03:35 | Francis, Corinne765 |

##### 6.2.1.1 日期范围

这两个字段允许您设置您想要导出测试的开始和结束测试日期。键入所需的日期，或使用日历控件选择日期。

### 6.2.1.2 排除不完整的结果

如果您希望仅导出包括通过或参考结果的筛查结果，但不包括未完成的测试，请启用此设置。

### 6.2.1.3 排除已导出的结果

启用此设置可在导出时排除先前已导出到导出文件的所有测试。

**注意：** 使用此功能时，未筛查原因的记录将不会被排除。

### 6.2.1.4 搜索

设置导出条件后，选择 **Search**（搜索）按钮，以便对符合条件的测试执行数据库搜索。

### 6.2.1.5 导出测试列表


执行搜索的同时将更新列表，以显示将要导出的测试列表。 这使您能够查看列表并根据需要修改导出条件。

### 6.2.1.6 导出测试列表的排序方法

测试列表可以按测试日期、患者 ID 或患者姓名进行排序。

## 6.2.2 导出

选择 **Export** 按钮  执行数据导出。 **Save As** 对话框将出现，您可以设置目标地址、文件名和文件类型（HiTrack、逗号分隔值、HearSIM™ XML 或 OZ eSP™双耳）。 建议使用默认名称“hearsim.xxx”，但可以由用户自行决定更改。

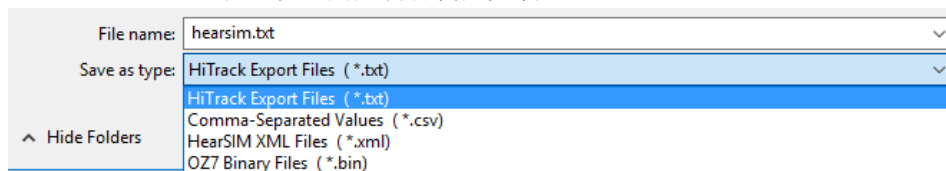

这些设置完成后，选择 **Save** 以执行导出并将其保存到目标路径。

## 7 配置

可在 HearSIM 的“配置”部分™设置各种列表，包括：

- 筛查人员 (\*)
- 机构 (\*)
- 医生
- 风险因素 (\*)
- 民族 (\*)
- 语言
- 托儿所类型
- 种族
- 保险
- 教育程度
- 关系（与子女）

这些列表用于 HearSIM 中，也可被传输到设备中。



只有触摸屏设备才支持将部分配置好的列表传输到设备中。

在列表中添加和删除值的方法与其他所有列表相同。 本使用说明书仅对筛查人员、机构和风险因素列表进行了详细说明。 请按照这些说明来配置其他列表。

### 7.1 筛查者

在此处管理将传输到设备的筛查者姓名和密码。

#### 7.1.1 添加筛查者


选择 **ADD**（添加）图标  以打开新筛查者姓名和密码的字段。 输入信息后，可选择 **ADD** 控制项保存，或选 **CANCEL** 取消操作，不保存。



The screenshot shows the 'Configuration' screen with the 'SCREENERS' tab selected. It features two input fields: 'Screener ID' (with a dropdown arrow) and 'Device password'. Below the 'Screener ID' field, it says 'Max. 32 characters allowed'. Below the 'Device password' field, it says 'Max. 24 characters allowed'. At the bottom right, there are two buttons: 'CANCEL' and 'ADD'.

### 7.1.2 删除筛查者

点击选择一个姓名，然后选择 **More** （更多）图标以打开一个带有 **Remove**（删除）控件的弹出菜单。选择它可从列表中删除筛查者姓名。

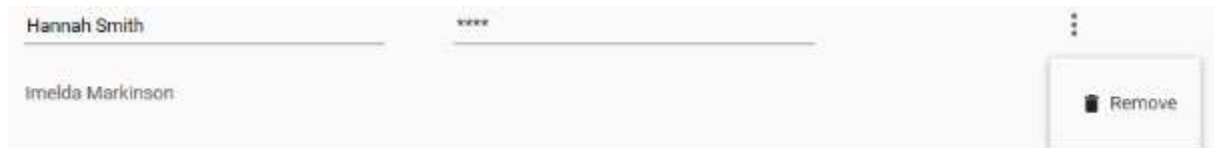

### 7.1.3 编辑密码

输入筛查者后，列表中的密码将显示为\*\*\*\*\*。 同时，还可通过选择筛查者姓名和点击密码字段来查看和编辑密码。



## 7.2 机构

在此管理机构名称。 此列表用于作为出生机构和筛查机构字段中的下拉列表。

### 7.2.1 添加机构

选择“添加”图标  以打开输入新机构名称的字段。 输入信息后，可选择 **ADD** 控制项保存，或选 **CANCEL** 取消操作，不保存。

### 7.2.2 删除机构

点击选择一个机构，然后选择“更多”  图标以打开一个带有“删除”控件的弹出菜单。选择它可从列表中删除机构名称。




## 7.3 风险因素

在此管理风险因素列表。

### 7.3.1 添加风险因素

风险因素列表默认由婴儿听力联合委员会推荐的风险因素以及一些传统风险因素组成。

选择**添加**图标以打开输入新风险因素的字段。输入信息后，可选择 **ADD** 控制项保存，或选 **CANCEL** 取消操作，不保存。

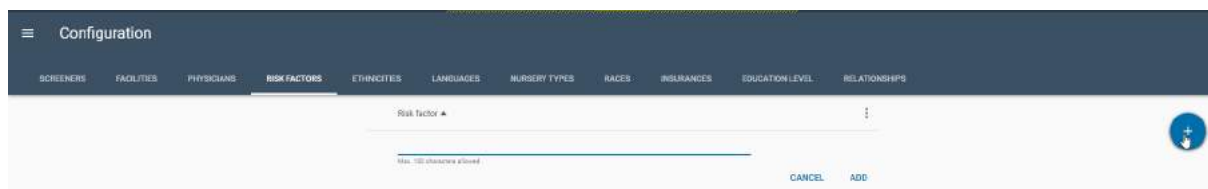

### 7.3.2 删除风险因素

通过点击选择一个风险因素，然后选择其旁边的 **More**（更多）图标以打开一个带有 **Remove**（删除）控件的弹出菜单。选择它可从列表中删除风险因素。

### 7.3.3 恢复制造商默认设置

以下列表已预先配置了值。有些基于 **HiTrack**，即第三方新生儿听力筛查数据库。

- 风险因素 (\*)
- 民族 (\*)
- 语言
- 托儿所类型
- 种族
- 保险
- 教育程度
- 关系

您可以选择编辑预配置列表，输入自己的值。但是，如果您是 **HiTrack** 用户，这可能会使条目无效，从而无法将其导出到 **HiTrack**。仅当您不将其用于 **HiTrack** 导出目的时，方可对其进行编辑。

如需将列表中的值恢复为制造商默认值，请选择列表标题行旁边的 **More Options**（更多选项）图标，使用 **Restore defaults**（恢复默认值）命令打开弹出菜单。选择此选项可返回到制造商默认值。




## 8 设备

您可以在 HearSIM™ 的设备页面中配置可在触摸屏设备上设置的选项。  
的设备类型。



这是唯一支持本节所述功能的

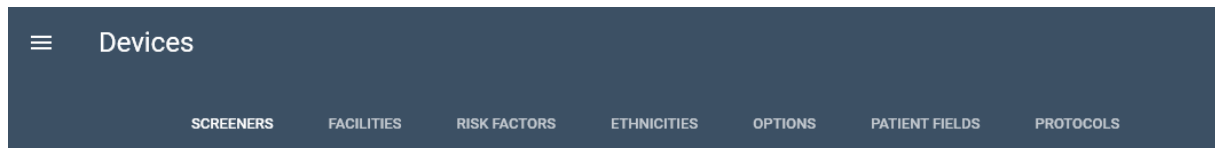

您可以在此页面选择要传输到设备的筛查者姓名。您还可以查看可供使用的各种筛查协议，并选择要传输到您的设备的筛查协议。

此外，您可以查看在“配置”部分中设置的列表，并选择将这些设置和其他设置（包括将某些字段设为必填项）传输到设备。

### 8.1 筛查者



在“配置”部分中添加的筛查者姓名会自动显示在此处。

#### 8.1.1 启用或禁用设备传输

可以设置 **Active**（启用）（或 **Inactive**（禁用） 控件。只有列表中被启用的筛查者才会被传输到设备中。



#### 8.1.2 顺序

在将列表传输到设备之前，可在此处修改列表的顺序。例如，您可能希望将执行过最多筛查测试的筛查者姓名放在列表顶部，以便能够在设备上轻松找到他们的姓名。

选择 **Screener ID**（筛查者 ID）列标题，列表将按 **A-Z** 字母顺序进行排序。此外，当您将鼠标悬停在筛查者行上时，**Drag**（拖动）控件 会出现在其姓名前面。您可以单击并按住“拖动”控件，将筛查者姓名拖动到列表中的其他位置。

## 8.2 机构



在配置部分添加的机构名称将自动显示在此处。在您选择传输后，将发送列表中的所有机构名称到设备。

在设备中，您可以设置执行测试的筛查机构。但在这之前，您必须启用 **Options/Test**（选项/测试）字段的设置。参见第 7.4 节。

| Devices                          |            |
|----------------------------------|------------|
| SCREENERS                        | FACILITIES |
| Facility name                    |            |
| Facility code                    |            |
| Homewood Regional Medical Center |            |
| Hope Memorial Hospital           |            |
| Illinois Children's Hospital     |            |

## 8.3 风险因素



在配置部分中设置的风险因素将自动显示在此处。在您选择传输后，列表中的所有风险因素都将被发送到设备中。

| Devices                                              |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| SCREENERS                                            | FACILITIES  |
| RISK FACTORS                                         | ETHNICITIES |
| Risk factor                                          |             |
| Family history of childhood HL                       |             |
| Birth weight < 1500 grams                            |             |
| Postnatal infection assoc. w/ SNHL (e.g. meningitis) |             |
| Ototoxic medications                                 |             |

## 8.4 民族




在配置部分中设置的民族将自动显示在此处。在您选择传输后，列表中的所有民族都将被发送到设备中。

## 8.5 选项



在传输到设备之前，需在此处设置设备选项。每个选项都可被设置为启用或禁用。

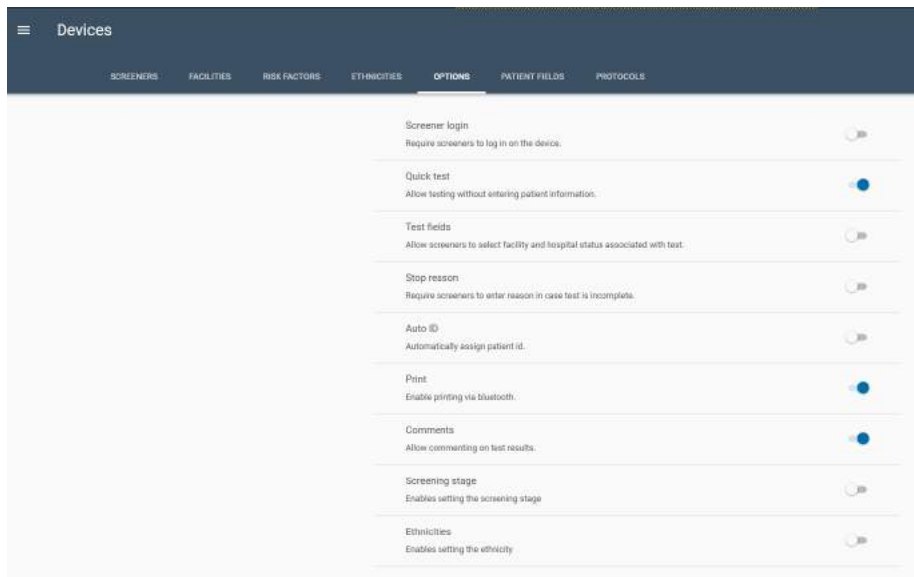

### 8.5.1 筛查员登录

如果您希望筛查员在使用设备之前选择他/她的姓名并输入相关密码，请启用此控件。这样筛查员的姓名将自动与所有已执行的筛查测试关联在一起。

如果您在设备上启用此设置并且筛选器名称被激活以发送至设备，则请确保在 HearSIM™ 的配置部分设置了筛选器名称。如果您在设备上启用此功能，但不配置或传输筛选器名称，则您将无法登录，您必须解决这个问题才能使用该仪器。

### 8.5.2 快速测试

如果您希望在执行筛查测试之前不输入患者 ID，请启用此控件。

### 8.5.3 测试字段

如果您想要保存有关筛查机构和就诊状态（住院、门诊或家访）的信息及筛查数据，请启用此控件。如果筛查者登录被禁用，此设置将允许您从列表中选择筛查者姓名，并将其与筛查测试一起保存。

如果您在设备上启用此设置，则请确保在 HearSIM™ 的配置部分设置了机构名称。如果您在设备上启用此功能，但不配置或传输机构名称，则您将无法执行测试，此问题必须得到解决。

### 8.5.4 停止原因

如果您希望筛查者为未完成的测试选择一个原因（“could not test（无法测试）”或“invalid（无效）”），请启用此控件。

### 8.5.5 自动 ID

需要输入患者 ID 以便在设备上保存测试，并将其传输到 HearSIM™。通常，该 ID 是由医院分配给患者的 ID。如果您希望设备在患者无 ID 时自动分配一个 ID 给患者，请启用此控件。

### 8.5.6 打印



如果您购买了与设备配套的无线标签打印机，请启用此控件。

### 8.5.7 注释

如果您想要在设备上输入与筛查测试相关的注释，请启用此控件。

### 8.5.8 筛查阶段

如果您想要在设备上输入针对筛查阶段（与筛查测试相关）的某个值（1、2 或 3），请启用此控件。

### 8.5.9 民族

如果在设备中输入患者信息时想从“民族”列表选择一个值，请启用此控件。

## 8.6 患者字段



启用或禁用以下字段，将它们设置为在将患者保存到设备上之前以及在 HearSIM™ 中添加新患者时必须填写的必填字段。

- 患者 ID（默认为必填字段）
- 姓
- 名
- 性别
- 同意筛查
- 同意跟踪
- 民族

## 8.7 协议



对于您随设备（ABR、TEOAE、DPOAE）一起购买的每种测试方法，每台设备在交付时都已准备好执行一个制造商默认的筛查协议。如果您希望查看其他可选协议的参数，或将每个测试方法的多个协议传输到您的设备上，您可以在此页面中添加更多协议，然后查看并选择要传输到设备的特定协议。

### 8.7.1 将协议添加到列表中

协议页面默认为空。要访问在安装 HearSIM 期间保存到电脑硬盘上的可用协议列表，请选择添加协议按钮。



一个 Windows 浏览器窗口将直接打开之前保存在电脑上的可用协议文件的位置。文件名指示了该文件是 ABR（ABRIS）、DPOAE 还是 TEOAE 协议。此外，文件名还给出了一些关于协议参数的信息，有助于您选择要添加到页面中的协议。

| Name                                    | Date modified      | Type        | Size |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------|------|
| IEC                                     | 11/3/2020 12:05 PM | File folder |      |
| ABRIS A00 CE-Chirp 35 dB nHL.hpd        | 9/8/2020 3:34 PM   | HPD File    | 1 KB |
| ABRIS A01 CE-Chirp 30 dB nHL.hpd        | 9/8/2020 3:34 PM   | HPD File    | 1 KB |
| ABRIS A02 CE-Chirp 40 dB nHL.hpd        | 9/8/2020 3:34 PM   | HPD File    | 1 KB |
| ABRIS A03 CE-Chirp 45 dB nHL.hpd        | 9/8/2020 3:34 PM   | HPD File    | 1 KB |
| ABRIS A04 Click 35 dB nHL.hpd           | 9/8/2020 3:34 PM   | HPD File    | 1 KB |
| ABRIS A05 Click 30 dB nHL.hpd           | 9/8/2020 3:34 PM   | HPD File    | 1 KB |
| ABRIS A06 Click 40dB nHL.hpd            | 9/8/2020 3:34 PM   | HPD File    | 1 KB |
| ABRIS A07 Click 45dB nHL.hpd            | 9/8/2020 3:34 PM   | HPD File    | 1 KB |
| ABRIS A08 CE-Chirp 25 dB nHL.hpd        | 10/20/2020 3:50 PM | HPD File    | 1 KB |
| ABRIS A09 Click 25dB nHL.hpd            | 10/20/2020 3:50 PM | HPD File    | 1 KB |
| DPOAE D00 2-5 kHz, 3-4, SNR 6 dB.hpd    | 9/8/2020 3:34 PM   | HPD File    | 1 KB |
| DPOAE D01 1.5-4 kHz, 3-4, SNR 6 dB.hpd  | 9/8/2020 3:34 PM   | HPD File    | 1 KB |
| DPOAE D02 1.5-6 kHz, 3-5, SNR 6 dB.hpd  | 9/8/2020 3:34 PM   | HPD File    | 1 KB |
| DPOAE D05 1.5-6 kHz, 3-6, SNR 7 dB.hpd  | 9/8/2020 3:34 PM   | HPD File    | 1 KB |
| TEOAE T00 1.5-4 kHz, 3_4, SNR 4 dB.hpd  | 9/8/2020 3:34 PM   | HPD File    | 1 KB |
| TEOAE T01 1.5-4 kHz, 2_4, SNR 6 dB.hpd  | 9/8/2020 3:34 PM   | HPD File    | 1 KB |
| TEOAE T02 1.5-4 kHz, 3_4, 80 dB SPL.hpd | 9/8/2020 3:34 PM   | HPD File    | 1 KB |

例如，ABR 协议名称将包括有关刺激的信息，即刺激是 CE-Chirp（默认）还是短声，还包括刺激强度的信息。

对于 DPOAE 或 TEOAE 协议，文件名将包括测试的频率范围、与测试的总频率数相比通过所需的频率数以及通过结果所需的信噪比等信息。

IEC 文件夹中的协议旨在用于类型测试。不建议将其用于一般筛查目的。

选择您要添加到页面的每个协议，并选择浏览器窗口底部的**打开**按钮。

## 8.7.2 测试类型和名称

一旦添加到协议页面，协议就会显示在列表中，该列表的列标题分别为协议的测试类型（ABR、DPOAE 或 TEOAE）、包含唯一标识符（例如 A00 或 D01）的名称以及重要参数的描述。这是将出现在设备上的名称。

| Devices                                                                        |                               |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| SCREENERS FACILITIES RISK FACTORS ETHNICITIES OPTIONS PATIENT FIELDS PROTOCOLS |                               |                                     |
| Test type                                                                      | Name                          | Transfer to device                  |
| TEOAE                                                                          | T02 1.5-4 kHz, 60 dB SPL, IEC | <input type="checkbox"/>            |
| TEOAE                                                                          | T00 1.5-4 kHz, 3/4, SNR 4 dB  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TEOAE                                                                          | T01 1.5-4 kHz, 2/4, SNR 6 dB  | <input type="checkbox"/>            |
| TEOAE                                                                          | T02 1.5-4 kHz, 3/4, 80 dB SPL | <input type="checkbox"/>            |
| Drag to reorder list                                                           |                               |                                     |
| DPOAE                                                                          | D00 2-5 kHz, 3/4, SNR 6 dB    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DPOAE                                                                          | D01 1.5-4 kHz, 3/4, SNR 6 dB  | <input type="checkbox"/>            |
| DPOAE                                                                          | D02 1.5-6 kHz, 3/5, SNR 6 dB  | <input type="checkbox"/>            |
| DPOAE                                                                          | D05 1.5-6 kHz, 3/6, SNR 7 dB  | <input type="checkbox"/>            |

标识为 A00、T00 和 D00 的协议分别是 ABR、TEOAE 和 DPOAE 的制造商默认协议。  
 点击它选择一个协议，以打开本协议中所定义参数的更详细描述。HearSIM™随附协议的更多信息请详见与您设备相关的单独文档。如有疑问，请联系您的代表或设备制造商。

The screenshot shows the 'PROTOCOLS' section of the software. On the left, a table lists various protocols with their test types, names, and transfer status to the device. The 'TEOAE' protocol (T01 1.5-4 kHz, 2\_4, SNR 6 dB) is selected. On the right, the 'TEOAE Protocol' details are shown, including stimulus type, level, duration, noise level, and a table of frequency bands.

| Test type | Name                         | Transfer to device                  |
|-----------|------------------------------|-------------------------------------|
| ABR       | A00 CE-Chirp 35 dB nHL       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ABR       | A03 CE-Chirp 45 dB nHL       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DPOAE     | D00 2-5 kHz, 3_4, SNR 6 dB   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ABR       | A01 CE-Chirp 30 dB nHL       | <input type="checkbox"/>            |
| TEOAE     | T01 1.5-4 kHz, 2_4, SNR 6 dB | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ABR       | A02 CE-Chirp 40 dB nHL       | <input type="checkbox"/>            |
| ABR       | A04 Click 35dB nHL           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ABR       | A05 Click 30 dB nHL          | <input type="checkbox"/>            |
| ABR       | A06 Click 40dB nHL           | <input checked="" type="checkbox"/> |

**TEOAE Protocol**

T01 1.5-4 kHz, 2\_4, SNR 6 dB

Stimulus type: Click

Stimulus level: 83 dB peSPL

Max. duration: 60 s

Acceptable noise level: 55 dB SPL

Min. OAE level: -5 dB SPL

Bands for pass: 2/4

| Frequency | Min. SNR | Mandatory |
|-----------|----------|-----------|
| 1.4 kHz   | 6.0 dB   | No        |
| 2.0 kHz   | 6.0 dB   | No        |
| 2.8 kHz   | 6.0 dB   | No        |
| 4.0 kHz   | 6.0 dB   | No        |

### 8.7.3 启用或禁用设备传输

可为每个协议设置一个 **Active**（启用）（或 **Inactive**（禁用） 控件。只有列表中被启用的协议才会被传输到设备中。发送到与系统一起购买的许可证不支持的设备上的协议不会显示在设备上。

### 8.7.4 顺序

在将列表传输到设备之前，可在此处修改列表的顺序。例如，您可能希望将最常执行的协议名称放在列表顶部。

当您鼠标悬停在协议行上时，**Drag**（拖动）控件会出现在测试类型/名称前面。您可以单击并按住“拖动”控件，将协议拖动到列表中的其他位置。

The screenshot shows the 'PROTOCOLS' section with a 'Drag to reorder list' button at the bottom left. The table lists protocols, and the 'A02 CE-Chirp 40 dB nHL' row is highlighted with a drag handle icon.

| Test type                                                                               | Name                         | Transfer to device                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| ABR                                                                                     | A00 CE-Chirp 35 dB nHL       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ABR                                                                                     | A03 CE-Chirp 45 dB nHL       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DPOAE                                                                                   | D00 2-5 kHz, 3_4, SNR 6 dB   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ABR                                                                                     | A01 CE-Chirp 30 dB nHL       | <input type="checkbox"/>            |
| TEOAE                                                                                   | T01 1.5-4 kHz, 2_4, SNR 6 dB | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  ABR | A02 CE-Chirp 40 dB nHL       | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                         | A04 Click 35dB nHL           | <input checked="" type="checkbox"/> |

Drag to reorder list


### 8.7.5 从列表中删除协议

如果您希望从 HearSIM™ 列表中删除协议，请通过单击来选择它，然后选择**更多选项**  图标以打开带有 **Remove**（删除）控件的弹出菜单。选择它可从列表中删除协议。

### 8.7.6 自定义协议

在安装过程中保存在电脑上的协议是每个测试类型的常用/必要的协议。新生儿听力筛查计划有可能要求提供自定义协议，设备制造商将通过提供可添加到此列表的自定义协议文件来尝试符合您的请求。

要添加根据请求提供的自定义协议，请选择 **ADD**（添加）图标  打开浏览器屏幕，您可以在其中定义保存自定义文件的路径。找到文件（扩展名为.hpd）并选择后，选择打开按钮将其添加到列表中。

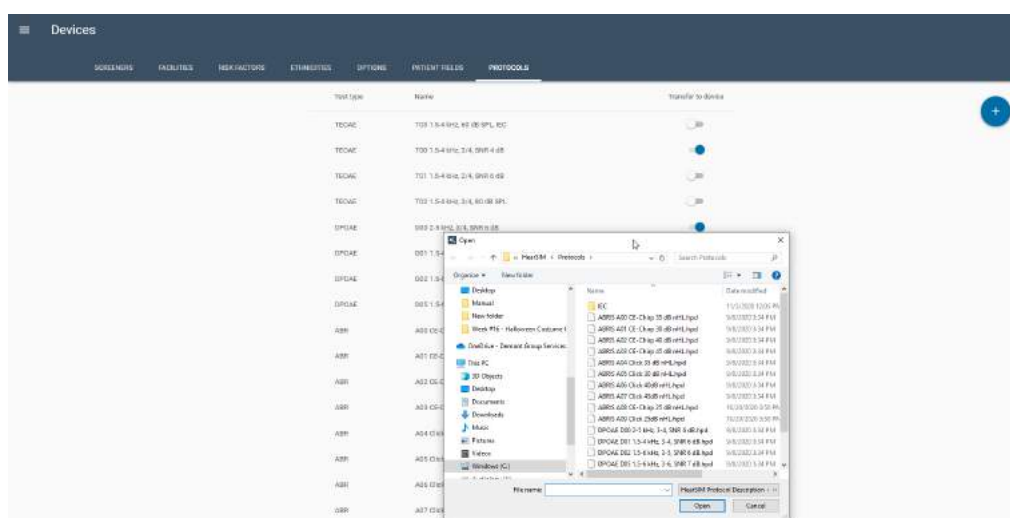

## 8.8 将自定义设置传送到设备




在自定义设备设置（包括所需的协议）后，您可以将它们传输到受支持的设备上。通过附带的 USB 数据线将设备连接到 HearSIM™ PC。在 HearSIM™ 中输入设备设置菜单。

如果患者数据出现在设备上，您必须先将数据传输到 HearSIM™，然后才能传输新的设置。

当出现中间有齿轮符号的设备图形时，表明设备准备好接收新设置。  点击图标打开“更新设备配置”窗口。

在带有齿轮符号的设备图形中，如果齿轮上画有一个条形  则表示所连接的设备不支持这些设置。

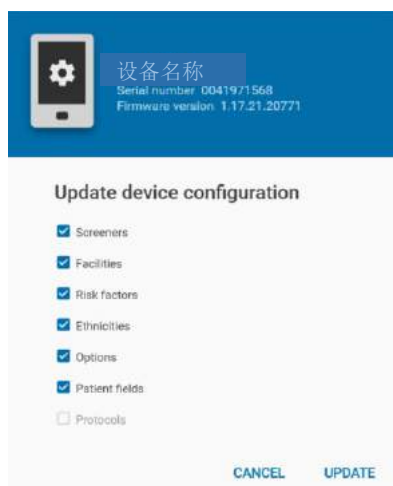

选择您想要传输的设置旁边的复选框。 选择 **Update**（更新）控件以继续传输。 传输后重新启动设备以使新设置生效。

设备上之前的所有设置都将被新设置覆盖。

### 8.8.1 不兼容的设备设置

在将设置传输到设备时，将需要执行检查，以确保相关设置正确无误，以便设备可以平稳运行。

例如，“筛查人员登录”选项需要选择一个筛查人员列表，并且需至少在“筛查人员”页面中启用一个筛查人员。

“测试字段”选项要求启用筛查人员，同时需至少在配置列表选择一个机构。

在将设置传输到设备时，如果发现不一致，则某些选项将被自动禁用，因此不会传输到设备中。 将会弹出一则消息，通知您该选项被禁用。

## 9 管理


管理部分的选项卡允许设置与以下各项相关的首选项：

- 导出测试数据或 HearSIM 设置
- 报告打印详细信息
- 导入 HearSIM 设置
- 导入 HiTrack 选取列表
- 显示和必填的患者字段

该部分还有一个选项卡，可用于查看有关对患者或测试数据所做更改的审核记录信息。


关于选项卡显示了有关软件版本的信息。

### 9.1 导出

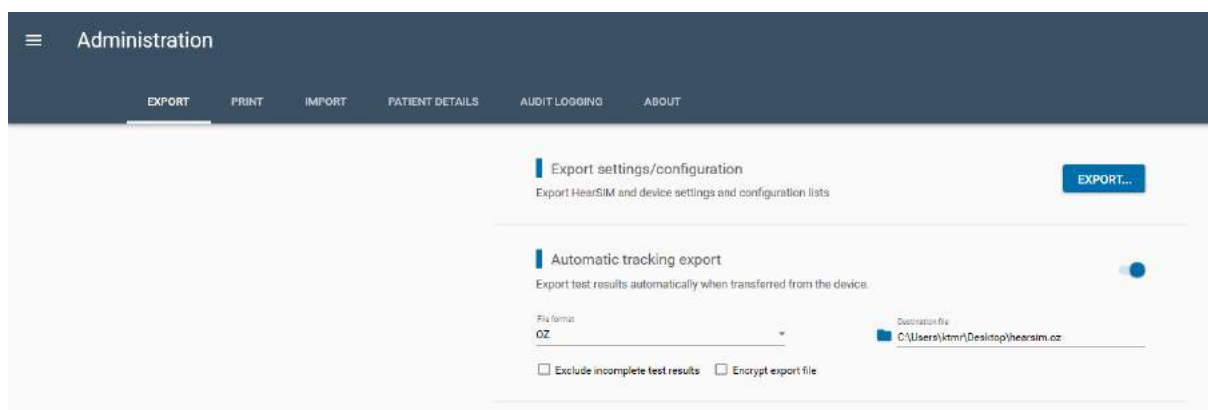

#### 9.1.1 导出设置/配置

如果您要将配置和设备设置共享到另一台计算机，请选择导出设置/配置区域中的导出按钮。然后选择您要共享的设置和配置列表。

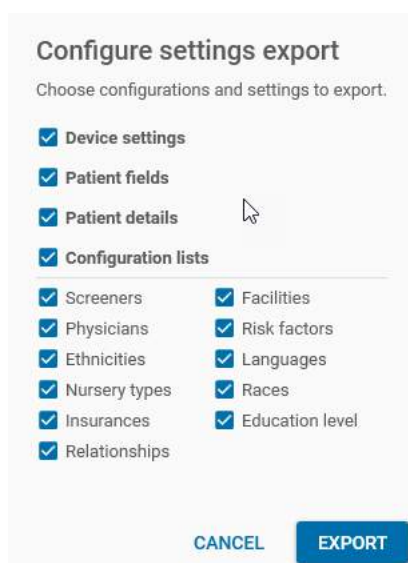

选择后，选择导出控件，这将打开一个 Windows “另存为” 窗口，您可以从中选择保存文件的目标路径。文件名被系统自动分配为“Configuration.hsim”。您可以将此文件在另一台计算机上导入，以免手动输入列表和设置。

### 9.1.2 自动跟踪导出

如果您想将从设备传输的数据自动保存在跟踪文件中，可以启用此功能。



#### 9.1.2.1 自动跟踪导出 - 开/关设置

如果您想要在传输后立即自动将刚刚传输的筛查数据导出到跟踪文件中，请启用此设置。启用该设置后，其他几个设置将随之变得可用。在关闭并重新启动程序时，这些设置将被调用，因此只需要进行一次设置。

#### 9.1.2.2 文件格式

使用下拉菜单为创建的文件选择格式。可选择的格式有：

- HiTrack
- Oz
- HearSIM XML
- CSV

#### 9.1.2.3 目标文件

选择字段前面的文件夹图标  以打开浏览器工具。设置文件的目标路径。所有格式都将显示默认文件名。

该字段不仅必须包含目标路径，还必须包含文件名。默认文件名由系统自动输入。您可以修改路径和文件名，但要确保输入完整的信息。如果此字段中没有完整的路径声明和文件名，则无法成功将数据传输到跟踪文件中。


#### 9.1.2.4 排除不完整的结果

如果您不想将含有不完整结果的测试导出到跟踪文件中，请选中此复选框。这意味着只有通过或参考结果的筛查测试才会被导出。

#### 9.1.2.5 加密（解密）导出文件

如果您希望跟踪文件被加密，以便个人健康信息不会以可读形式保存在文件中，请选中此复选框。

在安装 HearSIM 期间，一个解密工具（DecryptionTool.exe）被安装在以下路径中：C:\Program Files (x86)\HearSIM。该工具用于解密加密的跟踪文件，解密之后文件才能在其预期的应用程序中打开和读取。

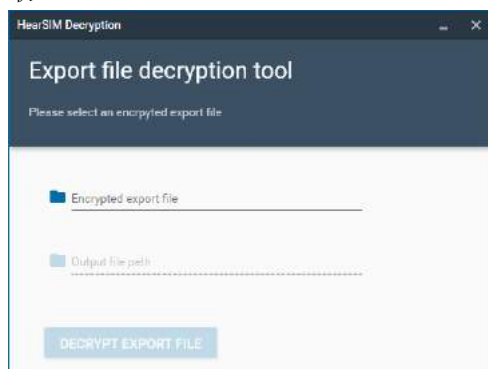


在解密时，需要选择加密文件并为解密后的文件设置路径。

如果您经常在安装有 HearSIM™ 的电脑上使用 HiTrack Merge Companion 或 OZ Telepathy 在成功登录后自动将 Hitrack 或 OZ 跟踪文件合并到这些第三方数据库中，则不应启用跟踪文件的加密。如果启用了加密，则必须在运行 HiTrack Merge Companion 或 OZ Telepathy 之前首先使用工具解密文件。


### 9.1.3 同意跟踪

启用此设置，可在患者不同意跟踪听力筛查的情况下，自动对跟踪导出文件中的患者数据进行匿名处理。

### 9.1.4 跟踪导出上传

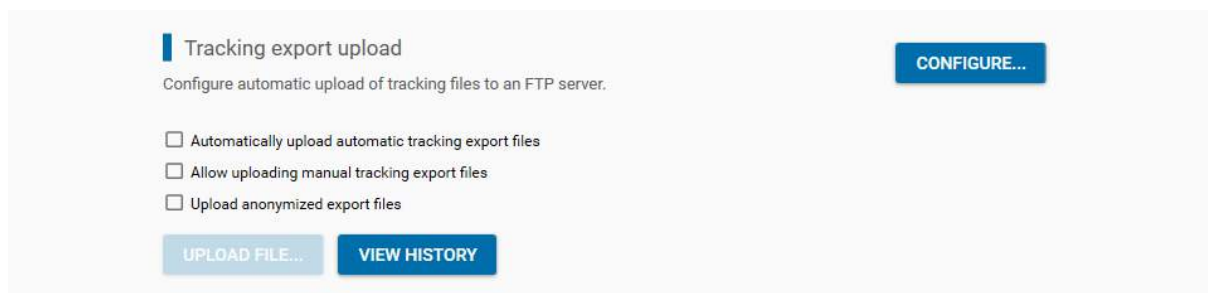

有了这个功能，您就可以直接在 HearSIM™ 应用程序中建立一个 FTP 服务器连接，将跟踪导出文件传输到专门的 FTP 服务器。

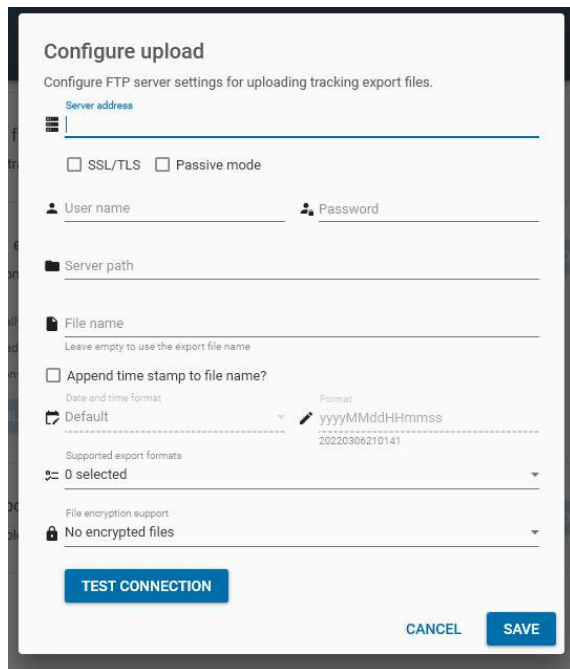

您可以配置服务器地址并输入连接到 FTP 服务器的凭证。输入跟踪文件应被写入服务器上的哪个路径。指定您的上传文件在 FTP 服务器上应该有什么样的名称。您可以选择是否在指定文件名的后面附加一个时间戳，然后对该时间戳进行更详细的配置。

选择要支持哪些跟踪文件格式，以及是否使用加密文件。

您可以测试与 FTP 服务器的连接。

#### 9.1.4.1 自动上传自动跟踪导出文件

如果您想让自动跟踪导出文件在创建后立即上传到 FTP 服务器，请选择该选项。

#### 9.1.4.2 允许上传手动跟踪导出文件


如果您想允许上传手动创建的跟踪导出文件，请选择该选项。

#### 9.1.4.3 上传匿名的导出文件

如果您想上传匿名的导出文件，请选择该选项。

## 9.2 打印设置

选择“打印”选项卡，定义报告页眉并加载将打印在患者列表和测试报告中的徽标文件，以及选择您喜欢的报告格式。

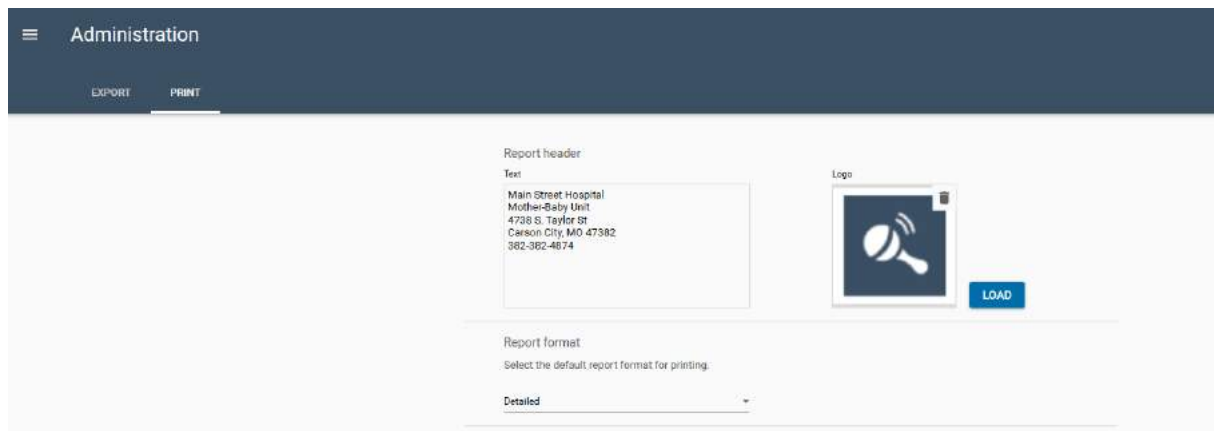

Administration

EXPORT PRINT

Report header

Text

Main Street Hospital  
Mother-Baby Unit  
4728 S. Taylor St  
Carson City, MO 47382  
362-362-4674

Logo

LOAD

Report format

Select the default report format for printing:

Detailed

### 9.2.1 文本

文本区域允许输入多行文本，每行最多 50 个字符。它固定位于报告的左上方位置。

### 9.2.2 商标


可以通过选择 **Load**（加载）按钮在打开的浏览器中选择徽标文件。徽标将显示在打印输出的右上角。

#### 9.2.2.1 删除徽标

如果要从报告中删除徽标，请选择徽标显示区域右上角的 **Delete**（删除）图标。此外，您还可以选择 **Load**（加载）按钮选择其他徽标文件。

### 9.2.3 报告格式

报告格式控件允许您选择患者报告打印的模板。 您可选择 **Basic** 或 **Detailed**。

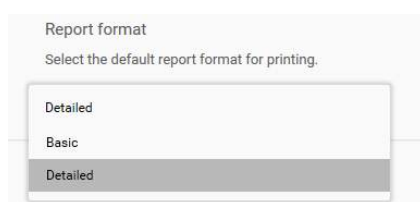

Report format

Select the default report format for printing.

Detailed

Basic

Detailed

基本报告会打印一些患者信息以及每项选定测试的以下信息：

- 测试耳别
- 结果
- 测试日期和时间
- 测试类型
- 筛选器名称
- 设施

详细报告包括这些字段，但还会打印出可能包含以下某些字段的其他信息：


- 测试时长
- 伪差 %
- 附加测量值或测试条件（根据测试类型而不同）
- 设备名称和序列号
- 传感器类型和序列号
- 测试协议名称
- 对 OAE 测试，以条形图显示 OAE 和噪声幅度值
- 对 ABR 测试，图表将显示测试的时间进度

## 9.2.4 OtoAccess® 预览/报告创建

如果您想在 OtoAccess® 数据库界面中查看预览和报告，请启用此设置。默认情况下，这个设置是被禁用的，以节省数据库的内存。


## 9.3 导入

请参阅关于选项卡，查看有关软件制造商和版本的信息。

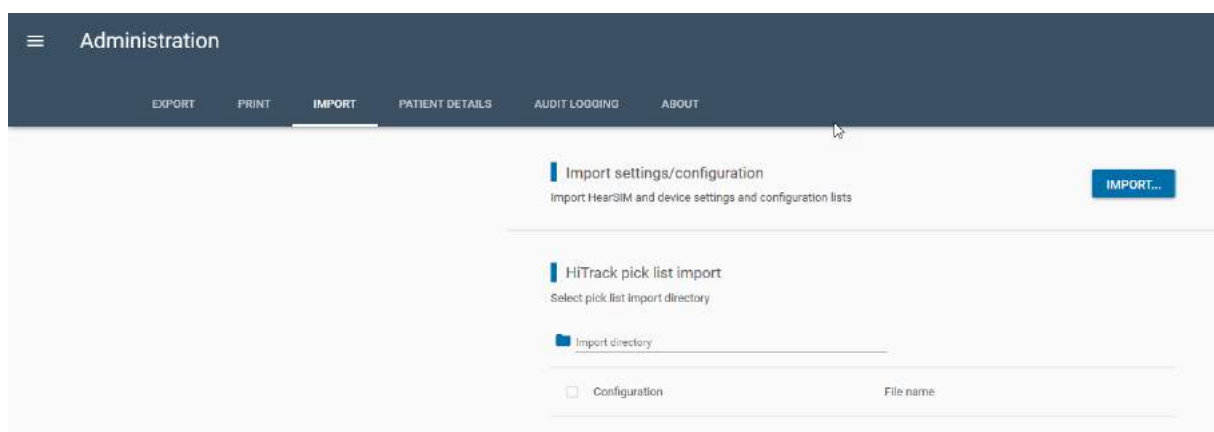

### 9.3.1 导入设置/配置


如果您要从另一台电脑上复制已导出（请参见第 9.1.1 节）的配置和设备设置，请在导入设置/配置区域中选择导入按钮。然后选择从原始电脑创建的文件。文件名的扩展名为 \*.hsim。

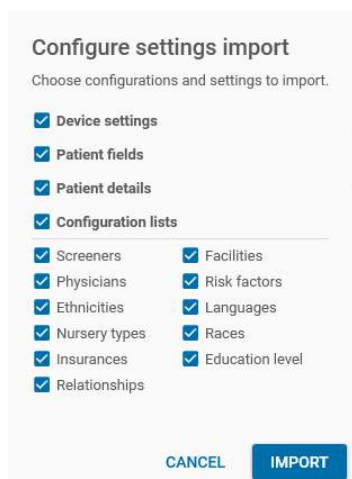

使用复选框选择要导入的类别，并在设置好首选项后选择**导入**。

### 9.3.2 导入 HiTrack 选取列表

打开 **HiTrack** 选取列表平面文件所在的导入目录。 程序将检测路径中存在哪些选取列表，并显示可用列表。

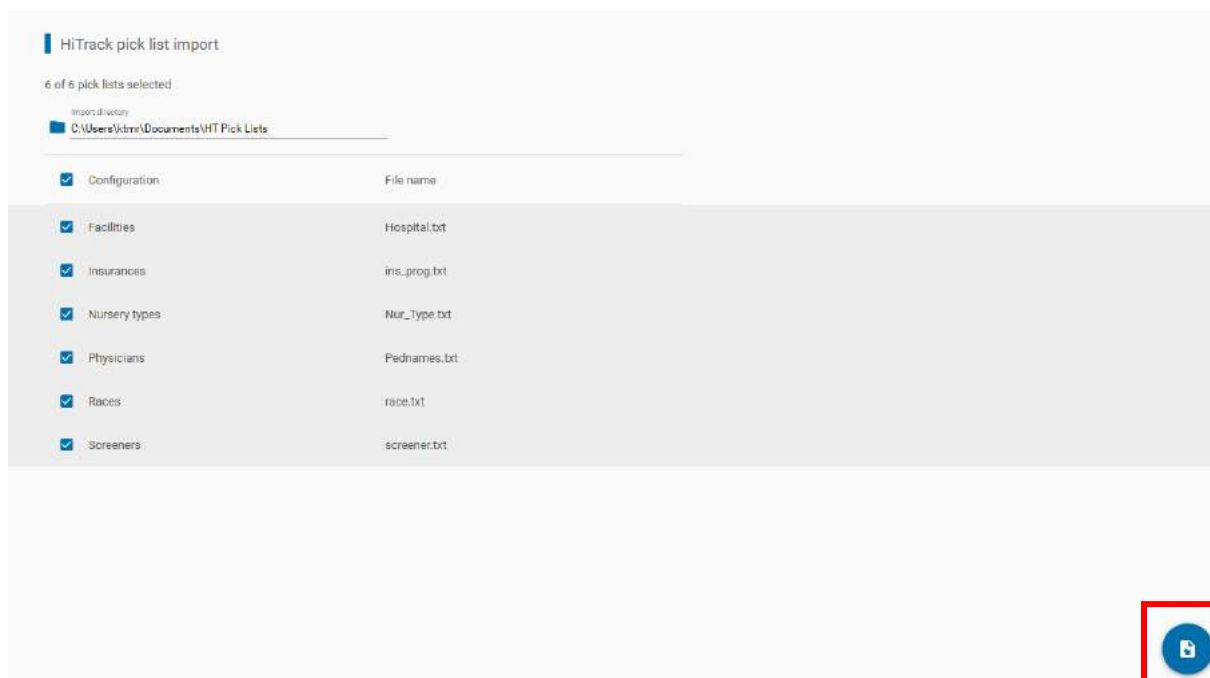


使用复选框选择要导入的选取列表。 单击右下角的导入控件来执行导入。

## 9.4 患者的详细信息

管理/患者详细信息选项卡允许自定义患者字段，这些字段将显示在患者列表的详细信息部分和联系信息部分。这些设置也适用于您设备上显示的患者字段。

此外，可将这些字段设置为在保存患者之前必须填写的字段。

此页面中的一些设置也会影响设备/患者字段选项卡中的设置。

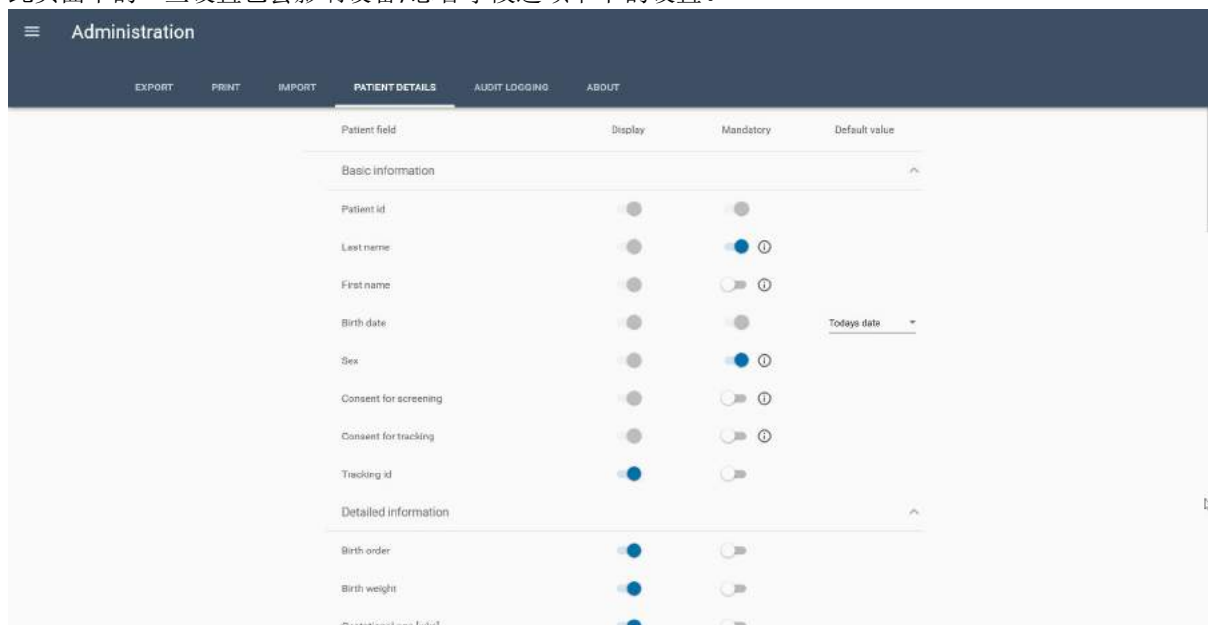

基本信息字段默认处于启用状态，不能禁用显示，但可以根据您的偏好设置为必填字段。

详细患者信息以及母亲信息和备用联系人信息可以完全根据您的偏好进行自定义。

### 9.4.1 默认值字段

出生日期字段有一个额外的设置，它可以根据您的偏好进行自定义。默认值可以设置为“今天的日期”，这样在创建新患者时，当前日期的值将默认出现在字段中。您可以通过日历控件选择不同的日期来更改日期。

默认值为“空”表示不会有日期预先输入到字段中，用户必须选择出生日期。

## 9.5 审核记录

选择此页面可审核数据库的变化，包括审核以下信息的变化：

- 时间和日期
- 实体（患者或测试）
- 患者 ID
- 测试 ID
- 用户
- 受试者
- 旧值（编辑时）
- 新值（编辑时）

≡

Administration

EXPORT

PRINT

IMPORT

PATIENT DETAILS

AUDIT LOGGING

ABOUT

Search parameters

Patient id

Test id

Set date range

From

To

☒ Include patient changes

☒ Include test changes

CLEAR

SEARCH

| Create date ▼       | Entity  | Patient id           | Test id | User | Subject               | Old value        | New value |
|---------------------|---------|----------------------|---------|------|-----------------------|------------------|-----------|
| 11/03/2020 13:35:25 | Patient | 3875379              |         | KSM  | First name            |                  | Milo      |
| 11/03/2020 13:35:03 | Patient | 60962929-2019-000... |         | KSM  | Sex                   | Unspecified      | Female    |
| 11/03/2020 13:34:52 | Patient | 22812                |         | KSM  | Ethnicity             |                  | TG        |
| 11/03/2020 13:34:52 | Patient | 22812                |         | KSM  | Consent for tracking  | Unspecified      | Yes       |
| 11/03/2020 13:34:52 | Patient | 22812                |         | KSM  | Consent for screening | Unspecified      | Yes       |
| 11/03/2020 13:34:52 | Patient | 22812                |         | KSM  | Last name             | Francis, Felicia | Francis   |
| 11/03/2020 13:31:47 | Patient | 23423423             |         | KSM  | Ethnicity             |                  | Hispanic  |
| 11/03/2020 13:31:47 | Patient | 23423423             |         | KSM  | Sex                   | Unspecified      | Female    |
| 11/03/2020 13:31:47 | Patient | 23423423             |         | KSM  | Last name             |                  | Murphy    |
| 11/03/2020 13:31:47 | Patient | 23423423             |         | KSM  | First name            |                  | Ernie     |

### 9.5.1 搜索参数

您可以定义搜索参数，为审核目的查找特定的信息。 定义搜索参数后，请选择**搜索**按钮来执行搜索。


使用**清除**按钮可删除搜索参数。

#### 9.5.1.1 患者 ID

输入患者 ID 可查找特定患者的信息。

#### 9.5.1.2 测试 ID

输入测试 ID 可查找特定测试的信息。 测试 ID 可以在测试结果选项卡中通过将鼠标悬停在相关测试的婴儿头像上找到。

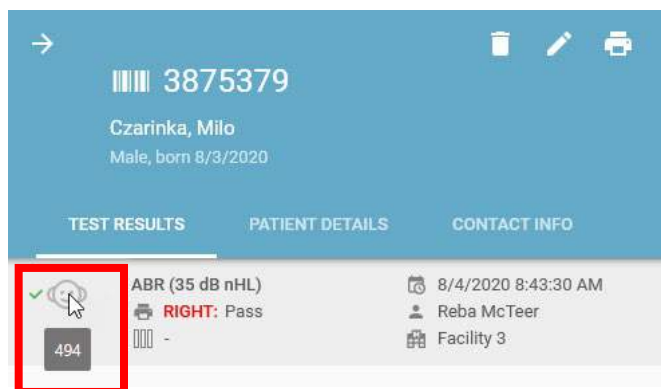

#### 9.5.1.3 日期范围

输入“从”和“到”日期范围可查找特定时间段的信息。

#### 9.5.1.4 包括患者更改

根据您的偏好选择或取消选择该复选框，决定是否查找对患者信息的更改。

### 9.5.1.5 包括测试更改

根据您的偏好选择或取消选择该复选框，决定是否查找对测试信息的更改。

### 9.5.1.6 导出审核日志

导出审核日志，以便存档和以后查看。


## 9.6 关于

请参阅关于选项卡，查看有关软件制造商和版本的信息。

### 9.6.1 允许统计使用情况

当启用此功能且电脑连接到互联网时，匿名使用情况统计数据将被发送给 HearSIM 制造商，以协助他们未来的开发计划。

如果您不希望使用情况统计数据被发送给制造商，请禁用此功能。

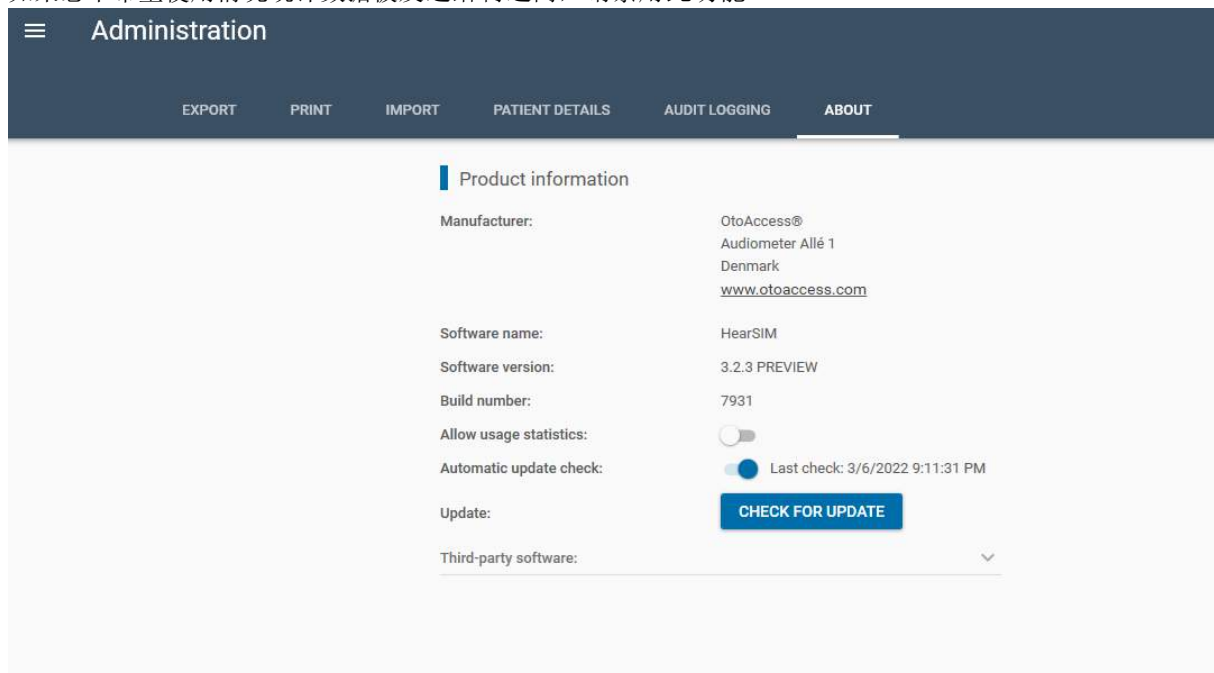

### 9.6.2 上传

当 HearSIM™ 应用程序或您的设备固件有可用的新更新时，它将显示在这里。如果您在安装设置中禁用了更新功能，您就不会在这里看到这个功能。


## 10 OtoAccess®功能

安装 OtoAccess®后，PC 桌面上将出现两个快捷图标。 一个是 OtoAccess®Database 数据库，另一个是 OtoAccess®Database 数据库管理工具。

HearSIM™手册的此部分仅简要介绍了 OtoAccess®中的某些功能，这些功能可能是 HearSIM™用户最感兴趣的功能。用户手册详细介绍了 OtoAccess®的功能，用户可以参考该手册，了解更多详细信息。

### 10.1 OtoAccess®Database 数据库

可以在 OtoAccess®中简要查看 HearSIM™患者和测试。 通常，只有将 OtoAccess®Database 数据库用于其他产品和测试类型的客户才使用此功能，以便所有设备中的全部数据都存储在一个数据库中。

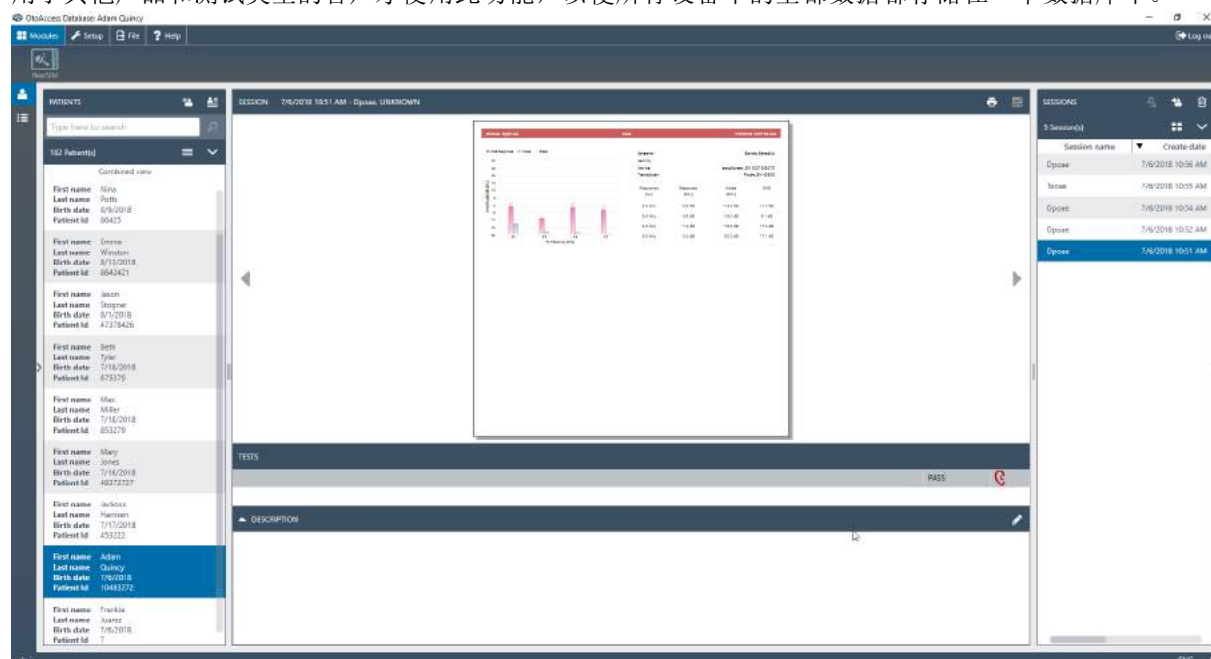

仅 HearSIM™的用户不能在 OtoAccess®中查看其新生儿听力筛查数据。 显示的信息仅限于最基本的数据。 HearSIM™模块提供了更多详细信息。

### 10.2 OtoAccess®Database 数据库管理工具

PC 上安装的 OtoAccess®Database 数据库管理工具实用程序具有 HearSIM™用户可能需要的功能。 可用的功能包括：

- 设置用户帐户和身份验证规则
- 设置数据库自动备份规则
- 恢复数据库的先前版本
- 查看安全日志
- 设置安全日志保留规则

有关这些功能的更多信息，请参阅《OtoAccess®使用说明》。

### 10.2.1 用户帐户

安装 HearSim™ 和 OtoAccess® 后，“用户帐户”配置文件选择列表中将具有特定于 HearSim™ 的用户配置文件。

HearSim™ 特定的帐户配置文件是：Administrator、Supervisor、Editor 和 Viewer。

HearSim™ Administrator 可执行 HearSim 中的所有功能。至少需要一个 Administrator 用户。

有关 Supervisor、Editor 和 Viewer 配置文件的限制，请参见下表。

|             | Supervisor | Editor | Screener | Viewer |
|-------------|------------|--------|----------|--------|
| 编辑测试信息      |            |        | 否        | 否      |
| 删除测试        | 否          | 否      | 否        | 否      |
| 编辑现有患者的患者信息 |            |        |          | 否      |
| 解决患者信息的转移冲突 |            |        |          | 否      |
| 删除患者        | 否          | 否      | 否        | 否      |
| 查看/编辑设备设置   | 2          | 否      | 否        | 否      |
| 查看/编辑配置设置   |            | 否      | 否        | 否      |
| 完成手工导出      |            |        |          | 否      |
| 查看/编辑管理员设置  | 否          | 否      | 否        | 否      |

---

<sup>2</sup>管理者可以访问、编辑和传输所有设备设置，但有一个例外。

## 11 故障排除和反馈分享

| 现象                                                                                                             | 原因                                                                                                                                                                                                    | 建议                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>检测到设备，但无法进行通信</p>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>设备数据库与 HearSIM™应用程序不兼容</li> </ul>                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>请联系设备制造商客户支持咨询“ERIS 维修工具”事宜</li> </ul>                                                                    |
| <p>设备已连接到 PC，但未被 HearSIM™检测到</p>                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>设备显示屏正显示其中一个测试窗口</li> <li>设备可能已在使用中，因此未被检测到</li> </ul>                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>按设备上的主屏幕键以退出测试窗口</li> <li>关闭并重启设备</li> <li>用 USB 数据线重新连接设备</li> </ul>                                     |
| <p>某些数据未被传输到 HearSIM™中</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>HearSIM 仅支持传输使用以下协议从该设备类型传输的数据：             <ul style="list-style-type: none"> <li>DP 4s</li> <li>DP 2s</li> <li>TE 32S</li> <li>TE 64S</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>这些协议仅用于将数据传输到 HearSIM</li> <li>请在将数据传输到 HearSIM 之前，打印或以其他方式保存使用其他名称的协议所获取的数据，因为传输后将从设备中删除所有数据。</li> </ul> |

如果这些故障排除建议未能解决您的问题，请您当地的制造商代表联系。

### 11.1 系统崩溃

如果发生系统崩溃，屏幕上会出现“出错了”的提示。保存包含崩溃信息的文件可以帮助我们在未来改进软件。

SOMETHING WENT WRONG.

GENERAL EXCEPTIONS

! This is a test exception for demonstrating the crash report

Application HearSIM 3.1.0 PREVIEW

Email email@email.com

Please tell us how the application crashed so we can fix it.

Type your comments here...

I was transferring data to HearSIM from my device when the system crashed.

☒ I agree to the [exclusion of Liability](#)

NB: Submitted crash reports will be investigated internally. You will only be contacted with the email address provided in the event that more information is required.


SEND REPORT SAVE CANCEL

在保存崩溃信息并同意免责后，请单击**发送报告**或**保存**崩溃文件，并联系技术支持部门，以向他们发送保存的文件。

本崩溃报告中保存和传输的信息仅包含崩溃发生前后的进程信息。任何个人健康信息都不会被保存或传输。

## 11.2 分享反馈

要提供有关 HearSim™ 应用程序的反馈，请在连接到互联网时选择主菜单底部的**分享反馈**控件。选择**发送**将您的反馈发送给 HearSim™ 制造商。

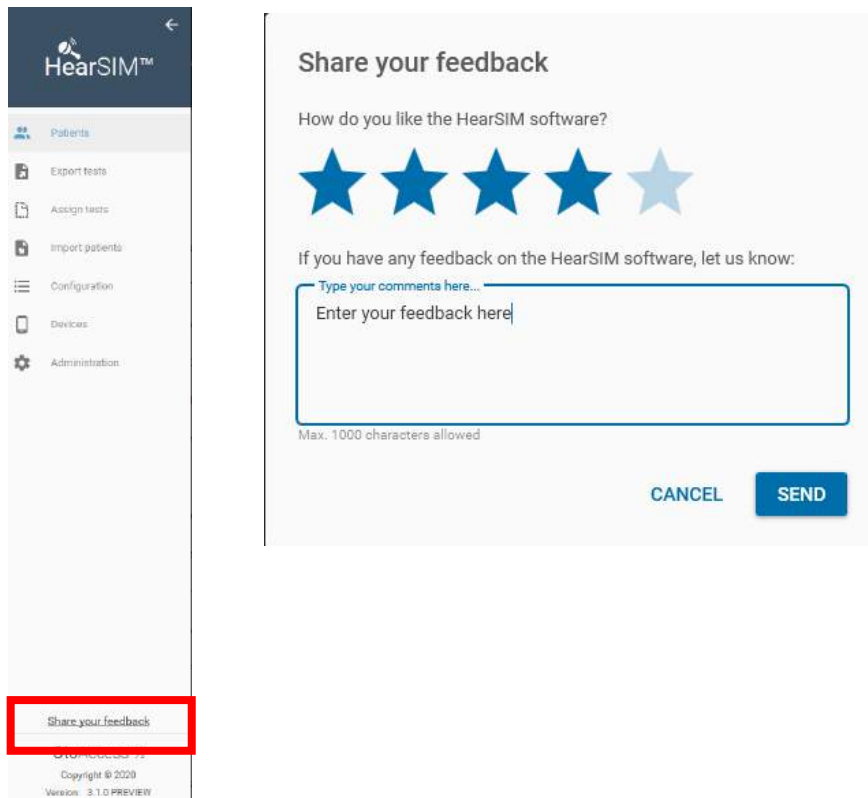

The image shows a screenshot of the HearSim software interface. On the left is a vertical sidebar with a dark blue header containing the 'HearSIM™' logo and a back arrow. Below the header, the sidebar lists several menu items: 'Patients', 'Export tests', 'Assign tests', 'Import patients', 'Configuration', 'Devices', and 'Administration'. At the bottom of the sidebar, the 'Share your feedback' option is highlighted with a red rectangular box. The main content area on the right displays a 'Share your feedback' dialog box. This dialog box has a title 'Share your feedback' and a question 'How do you like the HearSIM software?'. Below the question are five blue stars, with the fifth star being lighter than the others. Underneath the stars, it says 'If you have any feedback on the HearSIM software, let us know:'. There is a text input field with a placeholder 'Type your comments here...' and the text 'Enter your feedback here' inside it. Below the input field, it says 'Max. 1000 characters allowed'. At the bottom right of the dialog box are two buttons: 'CANCEL' and 'SEND'.

Share your feedback

How do you like the HearSIM software?

★★★★★

If you have any feedback on the HearSIM software, let us know:

Type your comments here...

Enter your feedback here

Max. 1000 characters allowed

CANCEL SEND

Share your feedback

Copyright © 2020  
Version: 3.1.0 PREVIEW

## 12 所有权、担保和免责声明

### 12.1 所有权

HearSIM™（以下简称“软件”）仅归 OtoAccess 所有。通过购买软件，买方有权使用软件，但并不拥有软件的所有权。买方须按照 OtoAccess®提供的商定使用条款使用软件。

### 12.2 版权

OtoAccess 在全球范围内拥有本软件的所有权。因此，在未经授权的情况下，严禁以任何方式复制本软件。严禁非法使用本软件。

### 12.3 限制

您不能：

- 以任何方式进行逆向工程或试图找出本软件的源代码
- 试图破坏软件中的任何机制，其中包括负责数据密码保护和限制并发用户数量的机制
- 以任何方式租赁、出租、再授权、复制或传输（上文允许的除外）本软件
- 隐藏或删除任何显示在软件、文档、屏幕显示屏或其他与软件相关物品上的 OtoAccess 版权或商标声明
- OtoAccess 特别提醒您注意，我们对任何违反或侵犯上述限制的行为将追究法律责任
- 该软件可以由多名用户、在多台计算机上、以及在所提供的任何地方使用、但它不能同时在超过一个显示屏上使用

### 12.4 保修期限

OtoAccess 保证由提供的物理介质和物理文档无材料和工艺缺陷。此有限保修自原购买日期起九十（90）天内有效。

如果 OtoAccess 在保修期内收到材料或工艺缺陷的通知并确认此类通知属实，OtoAccess 将更换有缺陷的介质或文档。

在您从供应商那里获得退还产品的批准之前，请不要退还任何产品。即使 OtoAccess 已被明确告知以下损害的可能性，违反本有限保修的全部和专属责任和补救措施应仅限于更换由提供的缺陷介质或文档，并不应包括或延伸到赔偿任何其他损害的任何要求或权利，包括但不限于利润、数据或使用本软件的损失、或特殊、偶然或间接损害、或其他类似的索赔。无论索赔的形式如何，在任何情况下，OtoAccess 对您或其他任何人支付的任何损害赔偿不会超过最低标价或购买本软件许可证所支付的实际价格。

## 12.5 免责声明

OtoAccess 4s 涵盖包括但不限于：明示或暗示的保证、声明和条款和条件；根据规定的使用条款和为特定目的应用软件。所有其他条款及条件将不适用。

此外，OtoAccess 4s 不保证软件或文档无误，或者满足用户的相关标准、要求或需求。在这种情况下，所有 OtoAccess 4s 提供的物理磁盘和文档的所有保证、担保和条款和条件应限制在 90 天的保修期内。

OtoAccess 4s 不对与 OtoAccess 4s 软件或程序一起使用的、但未由 OtoAccess 4s 直接制造或提供的任何第三方产品、磁盘、软件或文档负责。

## 12.6 一般条款和条件

OtoAccess 4s 对本协议所作的任何更改应以书面形式通知双方，即软件的购买方和的代表，并经双方同意和签字。

如果未能实现上述补救措施（有限保修）的主要目的，所有其他有限责任，包括赔偿责任限额和损害索赔的除外责任将继续适用

该软件受版权法和国际版权条约的保护。除为了备份而保留软件副本以防数据丢失外，严禁复制本软件。