

HearSIM™

Istruzioni per l'uso - IT



Diritti d'autore © OtoAccess ^{AS} Tutti i diritti sono riservati. Non è consentita la riproduzione o la trasmissione in alcun modo o tramite alcun mezzo di alcuna parte di questa pubblicazione senza aver prima ottenuto il consenso scritto di OtoAccess ^{AS}. Le informazioni contenute in questa pubblicazione appartengono a OtoAccess ^{AS}.

INDICE

1	Introduzione	1
1.1	Informazioni su questo manuale	1
1.1.1	Modelli supportati	1
1.2	Generale	2
1.3	Uso previsto	2
2	Installazione di HearSIM™	3
2.1	Note sulla pre-installazione	3
2.1.1	Requisiti del PC	3
2.2	Installazione di HearSIM™	3
2.3	Avvio di HearSIM™ e accesso	4
2.4	Migrazione dei dati dopo il primo avvio	4
2.5	Installazione del driver del dispositivo	6
3	Gestione dei test e dei pazienti	7
3.1	Elenco dei pazienti	7
3.1.1	Pazienti visualizzati	7
3.1.2	Formato dell'elenco	7
3.1.2.1	Simboli del genere	7
3.1.2.2	Data dell'ultimo aggiornamento	8
3.1.2.3	Riepilogo test	8
3.1.3	Ordinamento delle liste	8
3.1.4	Ricerca di un paziente	9
3.2	Elenchi filtrati	9
3.2.1	Tutti	10
3.2.2	Test orecchio non superato	10
3.2.3	Orecchie non sottoposte a test	10
3.2.4	Contrassegnato	10
3.2.5	Appena trasferiti	10
3.2.6	Appena importato	11
3.2.7	Età < 10 giorni	11
3.2.8	Orecchie testate	11
3.2.9	Filtro dell'intervallo date	11
3.3	Selezione dei pazienti	12
3.3.1	Selezione dei singoli	12
3.3.2	Selezione di tutti (i pazienti visualizzati)	13
3.3.3	Deselezione di tutti (i pazienti visualizzati)	14
3.4	Stampa di un elenco di pazienti	14
3.4.1	Anteprima di stampa	14
3.5	Stampa dei rapporti dei test dei pazienti	15
3.5.1	Anteprima di stampa del rapporto del test	15

3.6	Pazienti contrassegnati	15
3.6.1	Contrassegnare pazienti singoli.....	16
3.6.2	Contrassegnare più pazienti o tutti i pazienti in un elenco	16
3.6.3	Annullamento del contrassegno sui pazienti selezionati	17
3.6.4	Elenco filtrato dei pazienti contrassegnati	17
3.7	Trasferimento dei pazienti a un dispositivo.....	17
3.7.1	Stato del dispositivo e comandi per il trasferimento	17
3.7.2	Trasferimento di pazienti.....	19
3.8	Aggiunta di nuovi pazienti.....	19
3.8.1	ID paziente	20
3.8.1.1	Conflitto fra ID pazienti	20
3.8.2	Cognome e Nome	20
3.8.3	Data di nascita.....	20
3.8.4	Genere biologico.....	21
3.8.5	Consenso per lo screening.....	21
3.8.6	Consenso per il tracciamento	21
3.8.7	Appartenenza etnica	21
3.8.8	ID di tracciamento	21
3.8.8.1	ID di tracciamento e file di esportazione HiTrack.....	21
3.8.9	Contrassegno	21
3.8.10	Salva	22
3.8.11	Salva e modifica	22
3.8.12	Chiudi.....	22
3.9	Dettagli del paziente	22
3.9.1	Informazioni di base.....	23
3.9.2	Informazioni dettagliate	23
3.9.3	Fattori di rischio	23
3.10	Informazioni di contatto	23
3.10.1	Informazioni della madre.....	24
3.10.2	Informazioni di contatto alternative.....	24
3.11	Modifica delle informazioni del paziente e di contatto.....	24
3.11.1	Modifica dei campi delle informazioni di base	25
3.11.2	Modifica dei campi relativi alle informazioni dettagliate	25
3.11.2.1	Ordine di nascita	25
3.11.2.2	Peso alla nascita [g].....	25
3.11.2.3	Età gestazionale [wks}	25
3.11.2.4	Ora di nascita [hh:mm]	25
3.11.2.5	Data di nascita prevista	25
3.11.2.6	Razza	26
3.11.2.7	Struttura di nascita.....	26

3.11.2.8	Tipo di nido	26
3.11.2.9	Assicurazione	26
3.11.2.10	Medico.....	26
3.11.2.11	ID univoco regionale	26
3.11.2.12	Variabile di tracciamento 1	26
3.11.2.13	Ragione del mancato screening.....	26
3.11.2.14	Note.....	27
3.11.3	Modifica dei fattori di rischio	27
3.11.3.1	Comandi relativi ai fattori di rischio.....	27
3.11.4	Modifica delle informazioni della madre	28
3.11.4.1	ID della madre	28
3.11.4.2	Il cognome, il nome e il cognome da nubile	28
3.11.4.3	Data di nascita della madre.....	28
3.11.4.4	Indirizzo della madre	28
3.11.4.5	Numero di telefono della madre	28
3.11.4.6	Indirizzo e-mail della madre	28
3.11.4.7	Lingua e livello di istruzione della madre.....	28
3.11.4.8	Partecipazione della madre al WIC.....	28
3.11.4.9	Comunicazione ADA richiesta.....	28
3.11.4.10	Linguaggio orale visivo	28
3.11.5	Modifica delle informazioni di contatto alternative	29
3.11.5.1	Cognome, nomi	29
3.11.5.2	Indirizzo.....	29
3.11.5.3	Numero di telefono	29
3.11.5.4	Lingua	29
3.11.5.5	Relazione con il paziente (bambino)	29
3.11.6	Salvataggio o eliminazione delle modifiche.....	29
3.11.6.1	Salva modifiche.....	29
3.11.6.2	Annulla	29
3.12	Cancellazione di un paziente	30
3.12.1	Conferma della cancellazione.....	30
3.13	Elenco dei risultati dei test.....	30
3.14	Visualizzazione dei dettagli dei test	32
3.14.1	Visualizzazione grafica	32
3.14.2	Informazioni sulle misurazioni.....	32
3.14.3	Informazioni sul dispositivo.....	32
3.14.4	Informazioni sul protocollo	32

3.15	Modifica dei campi del test	33
3.15.1	Finestra Modifica delle informazioni del test	33
3.15.1.1	Campi non editabili	33
3.15.1.2	Motivo della sospensione	33
3.15.1.3	Lato orecchio	34
3.15.1.4	Analizzatore	34
3.15.1.5	Struttura	34
3.15.1.6	Stato ospedaliero	34
3.15.1.7	Fase dello screening	34
3.15.1.8	Commenti sul test	34
3.15.2	Salvataggio o eliminazione delle modifiche	34
3.15.2.1	Salva modifiche	34
3.15.2.2	Annulla	35
3.16	Stampa del rapporto di un paziente	35
3.16.1	Stampa predefinita	35
3.16.2	Selezione dei test	35
3.16.3	Esecuzione della stampa del rapporto	36
3.16.4	Anteprima di stampa	36
3.16.5	Formato rapporto	37
3.17	Trasferimento dei dati da un dispositivo a HearSIM™	37
3.17.1	Importazione dei dati del dispositivo	37
3.17.1.1	Modelli di screening rispetto ai modelli di dispositivi diagnostici	38
3.17.2	Risoluzione dei conflitti di unione	38
3.17.2.1	Modifica dell'ID del paziente	40
3.17.3	Importazione di test non assegnati	40
4	Test non assegnati	41
4.1	Assegnazione di un test ad un nuovo paziente	42
4.2	Assegnazione di un test ad un paziente esistente	43
4.3	Eliminazione di test non assegnati	44
5	Importazione di pazienti	46
5.1	Importazione di campi	46
5.2	Importazione del formato di file	46
5.2.1	Formato del file HiTrack	46
5.2.2	XML di HearSIM	46
5.3	Impostazioni	47
5.4	Eseguire l'importazione	47
6	Esportazione dei test	48
6.1	Esportazione automatica	48
6.2	Esportazione manuale	48
6.2.1	Finestra di dialogo Esporta test	48

6.2.1.1	Intervallo di tempo.....	48
6.2.1.2	Escludi i risultati incompleti	49
6.2.1.3	Escludi i risultati esportati	49
6.2.1.4	Cerca.....	49
6.2.1.5	Elenco dei test da esportare	49
6.2.1.6	Metodo di ordinamento dell'elenco dei test da esportare	49
6.2.2	Esporta.....	49
7	Configurazione	50
7.1	Analizzatori	50
7.1.1	Aggiunta di operatori.....	50
7.1.2	Cancellazione di analizzatori.....	51
7.1.3	Modifica delle password.....	51
7.2	Strutture	51
7.2.1	Aggiunta di strutture.....	51
7.2.2	Cancellazione di strutture.....	51
7.3	Fattori di rischio.....	52
7.3.1	Aggiunta dei fattori di rischio	52
7.3.2	Cancellazione dei fattori di rischio	52
7.3.3	Ripristino dei predefiniti del produttore	52
8	Dispositivi	54
8.1	Analizzatori	54
8.1.1	Stato attivo/inattivo per il trasferimento al dispositivo.....	54
8.1.2	Ordine	54
8.2	Strutture	55
8.3	Fattori di rischio.....	55
8.4	Appartenenza etnica	55
8.5	Opzioni.....	56
8.5.1	Login analizzatore.....	56
8.5.2	Test rapido.....	56
8.5.3	Campi del test	56
8.5.4	Motivo della sospensione.....	57
8.5.5	ID automatico	57
8.5.6	Stampa.....	57
8.5.7	Osservazioni.....	57
8.5.8	Fase dello screening	57
8.5.9	Appartenenza etnica	57
8.6	Campi del paziente	57
8.7	Protocolli.....	58
8.7.1	Aggiunta di protocolli all'elenco	58
8.7.2	Tipo di test e nome	59
8.7.3	Stato attivo/inattivo per il trasferimento al dispositivo	60

8.7.4	Ordine	60
8.7.5	Eliminazione dei protocolli dall'elenco	60
8.7.6	Protocolli personalizzati	60
8.8	Trasferimento di impostazioni personalizzate sul dispositivo.....	61
8.8.1	Impostazioni del dispositivo incompatibile	62
9	Amministrazione	63
9.1	Esporta	63
9.1.1	Esporta impostazioni/configurazioni	63
9.1.2	Esportazione del tracciamento automatico	64
9.1.2.1	Esportazione del tracciamento automatico: on / off.....	64
9.1.2.2	Formato file	64
9.1.2.3	File di destinazione	64
9.1.2.4	Escludi i risultati incompleti	65
9.1.2.5	Crittografa (decrittografa) file di esportazione.....	65
9.1.3	Consenso per il tracciamento	65
9.1.4	Caricamento dell'esportazione del tracciamento.....	66
9.1.4.1	Carica automaticamente i file di esportazione del tracciamento automatici.....	66
9.1.4.2	Consenti il caricamento dei file di esportazione del tracciamento manuali	67
9.1.4.3	Carica file di esportazione anonimizzati	67
9.2	Impostazioni di stampa	67
9.2.1	Testo.....	67
9.2.2	Logo	67
9.2.2.1	Cancellazione del logo	67
9.2.3	Formato rapporto	67
9.2.4	Creazione di rapporti/anteprima OtoAccess®.....	68
9.3	Importa	68
9.3.1	Importa impostazioni/configurazioni.....	69
9.3.2	Importazione dell'elenco di selezione HiTrack.....	69
9.4	Dettagli del paziente	70
9.4.1	Campi del valore predefinito.....	70
9.5	Registrazione dell'audit.....	71
9.5.1	Parametri di ricerca	71
9.5.1.1	ID paziente	71
9.5.1.2	ID del test	71
9.5.1.3	Intervallo di tempo.....	72
9.5.1.4	Includere i cambiamenti del paziente	72
9.5.1.5	Includere i cambiamenti del test	72
9.5.1.6	Esporta registro di audit.....	72
9.6	A proposito.....	72

9.6.1	Consentire le statistiche sull'utilizzo	72
9.6.2	Aggiornamento	72
10	Funzioni di OtoAccess®	73
10.1	Database OtoAccess®	73
10.2	OtoAccess® Database administration	73
10.2.1	Account degli utenti.....	74
11	Risoluzione dei problemi e condivisione del feedback	75
11.1	Arresto anomalo del sistema.....	75
11.2	Condivisione del feedback.....	76
12	Proprietà, garanzia e dichiarazione di non responsabilità.....	78
12.1	Proprietà.....	78
12.2	Copyright.....	78
12.3	Limitazioni	78
12.4	Garanzia limitata	78
12.5	Dichiarazione di non responsabilità.....	79
12.6	Condizioni generali	79

1 Introduzione

1.1 Informazioni su questo manuale

Questo manuale è valido per HearSIM™ revisione 3.3. Questo prodotto è stato fabbricato da:

OtoAccess A/S
Audiometer Allé 1
5500 Middelfart
Danimarca

Questo manuale illustra le funzioni di HearSIM™. Si consiglia agli utenti del programma di leggere attentamente il manuale prima dell'utilizzo.

HearSIM™ 3.0 e superiore richiede la pre-installazione del programma OtoAccess® Database (versione 2.0 o superiore) che supporta HearSIM™. Senza l'installazione di OtoAccess® Database, l'applicazione HearSIM™ non può funzionare. Il contenuto di questo manuale riguarda generalmente il programma HearSIM™ ma il lettore deve comprendere che OtoAccess® database è un'applicazione di supporto necessaria affinché HearSIM™ funzioni.

OtoAccess® Database ha un suo manuale. Questo manuale di HearSIM™ ha dei riferimenti al manuale di OtoAccess® per le descrizioni di alcune funzioni e impostazioni disponibili solo all'interno dell'applicazione OtoAccess® Database. Questo manuale di HearSIM™ tratterà soltanto le funzioni disponibili in HearSIM™.

I menu, le icone e le funzioni selezionabili sono rappresentati in **grassetto**.

1.1.1 Modelli supportati

HearSIM™ versione 3.0 e superiore supporta due tipi di dispositivi della linea di prodotti. In gran parte dei casi le funzioni di HearSIM™ descritte nel manuale riguardano entrambi i dispositivi. Tuttavia, ci sono alcune funzioni che sono specifiche per uno di questi tipi di dispositivi e non sono supportate dall'altro dispositivo. In questo caso il manuale mostrerà un grafico che rappresenta il tipo di dispositivo supportato come visualizzato in basso:

	questo grafico sarà usato per indicare che una funzione di HearSIM™ è disponibile solo per questo modello che è un dispositivo con schermo tattile con un pulsante Home che supporta la tecnologia AABR e OAE.
	Questo grafico sarà usato per indicare che una funzione di HearSIM™ è disponibile soltanto per questo tipo di dispositivo che è uno strumento solo OAE (modello per analizzatore) con un piccolo schermo LCD e diversi pulsanti funzione usati per la navigazione dei menu.

1.2 Generale

Grazie per aver acquistato un sistema supportato dal programma di gestione delle informazioni di screening HearSIM™. Il dispositivo acquistato funziona correttamente per eseguire lo screening dell'udito anche senza l'uso di HearSIM™.

HearSIM™ con OtoAccess® Database è uno strumento software accessorio che consente di eseguire le seguenti attività:

- Archiviare, visualizzare e gestire le informazioni del paziente
- Archiviare, visualizzare e gestire i dati dei test trasferiti da un dispositivo supportato
- Trasferire i nomi dei pazienti che necessitano di un test su un dispositivo supportato
- Stampare i risultati dei test su una stampante standard compatibile con PC
- Esportare i dati dei pazienti e dei test (i formati supportati HiTrack, OZ eSP™, XML e CSV)
- Personalizzare le impostazioni del dispositivo in base alle proprie preferenze
- Gestire gli utenti del dispositivo
- Gestire gli elenchi personalizzati del dispositivo (come i nomi delle strutture per lo screening o i fattori di rischio, ecc).
- Gestire gli account utenti
- Effettuare il backup e il ripristino del database dei pazienti e degli elenchi personalizzati
- Importare l'elenco di pazienti provenienti da altri database di terze parti
- Esportare e importare le impostazioni di HearSIM per condividerle tra diversi PC
- Impostare le preferenze dell'utente per la visualizzazione dei campi del paziente e lo stato dei campi obbligatori
- Revisione delle modifiche apportate ai dati demografici dei pazienti e ai dettagli dei test

1.3 Uso previsto

Il programma è concepito per essere utilizzato come accessorio dei dispositivi per lo screening dell'udito compatibili al fine di personalizzare le impostazioni del dispositivo e gestire i dati dello screening. Contattare il proprio rappresentante locale per l'elenco di tutti i dispositivi compatibili con HearSIM.

2 Installazione di HearSIM™

2.1 Note sulla pre-installazione

2.1.1 Requisiti del PC

- OtoAccess® versione 2.0 o superiore installata
- .NET framework 4.6.2

Consultare le istruzioni d'uso di OtoAccess® Database per le informazioni dettagliate sull'installazione di quel programma sui requisiti hardware del PC.

2.2 Installazione di HearSIM™

NOTA: verificare che il dispositivo non sia connesso al computer durante l'installazione del programma.

Chiudere tutti i programmi aperti o in esecuzione.


HearSIM™ è fornito su un'unità USB per l'installazione. Il programma deve essere installato da un amministratore di Windows.

Inserire l'unità USB nel PC. Individuare ed eseguire il file "HearSIM Setup.exe".


Accettare i termini della licenza e **Installa**



Installazione in corso

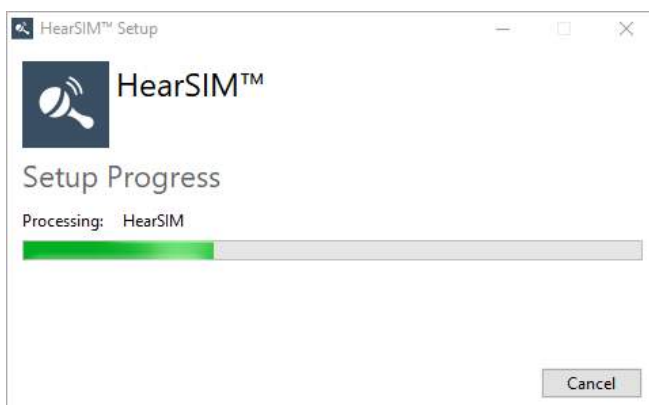

L'installazione è terminata. **Chiudi.**

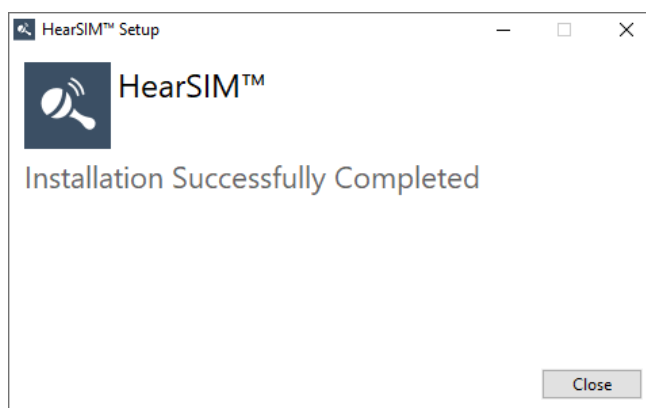

2.3 Avvio di HearSIM™ e accesso

Ogni volta che si avvia HearSIM™ l'utente deve accedere con il proprio account presente nello strumento OtoAccess® Database Administration. Consultare le istruzioni d'uso di OtoAccess® per configurare e gestire gli account utente.

A screenshot of a login window titled 'LOGIN'. The window has a dark blue header bar with the title. Below the header, there is a white background with a dark blue user icon. Below the icon, there are two input fields: 'Username' and 'Password'. Below the 'Password' field, there is a checkbox labeled 'Remember credentials'. At the bottom of the window, there are two buttons: 'Ok' and 'Cancel'.

Quelli predefiniti sono i seguenti: Username = admin, Password = password.

Si consiglia di cambiare il prima possibile il nome utente e la password dell'utente predefinito all'interno del programma OtoAccess® Database Administration. Mentre questo utente non può essere eliminato, il nome utente e la password possono essere modificati. Consultare le istruzioni d'uso di OtoAccess per la configurazione degli utenti.

2.4 Migrazione dei dati dopo il primo avvio

Se sul PC in uso è installata una versione precedente di HearSIM™ (versione 2.1 o superiore), al primo avvio di HearSIM 3.2 verrà chiesto se eseguire la migrazione del database esistente di HearSIM™ in modo da renderlo compatibile con OtoAccess®.

Richiesta di migrazione disponibile

Scegliere **ESEGUI MIGRAZIONE** se si desidera convertire il database esistente di HearSIM™ in un formato compatibile con OtoAccess®.




Scegliere **NO** se non si desidera convertire il database esistente.

Scegliere le preferenze sui dati di HearSIM™ da convertire e trasferire in OtoAccess® spuntando o rimuovendo la selezione dalle rispettive caselle di controllo.

Scegliere le preferenze riguardanti l'eliminazione dei file di origine dalla cartella originale di HearSIM™ dopo la migrazione, selezionando o deselectando la casella di controllo "Elimina i file di origine al termine dell'installazione".


Selezionare **Trasferisci** dopo aver scelto le caselle di controllo da spuntare.

Migrazione in corso

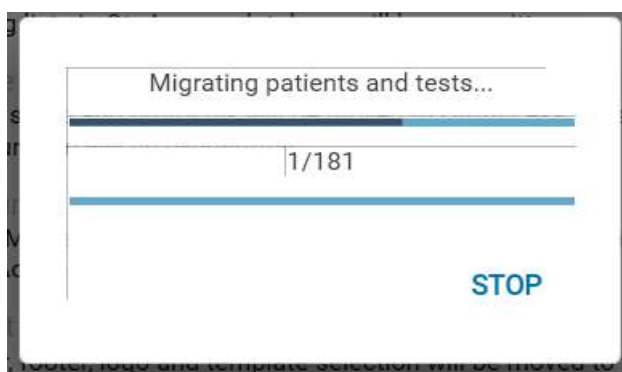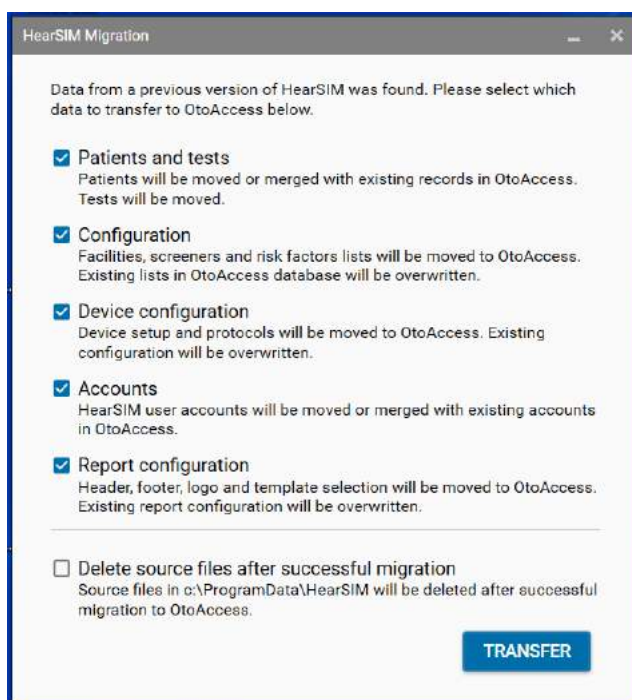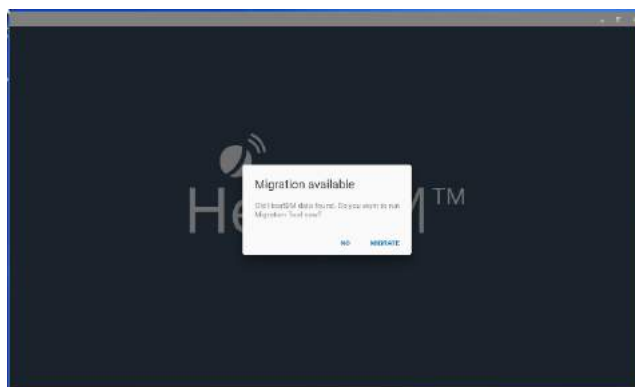

Migrazione riuscita

Scegliere **ESCI**

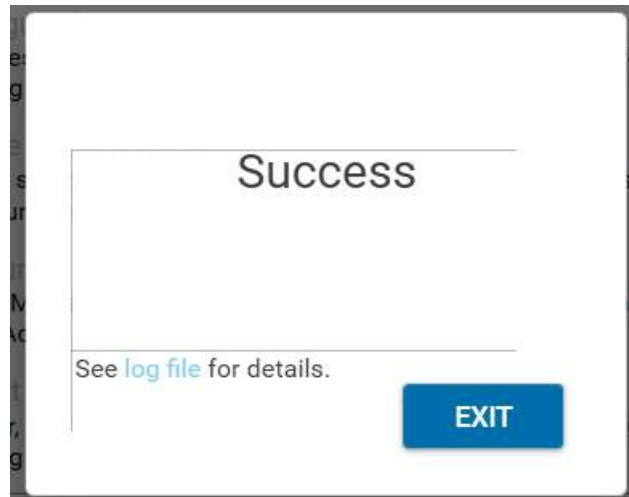

2.5 Installazione del driver del dispositivo

Il driver del dispositivo sarà installato automaticamente la prima volta che il dispositivo compatibile sarà collegato dopo l'installazione di Otoaccess® e HearSIM™ e dopo l'avvio di HearSIM™.

3 Gestione dei test e dei pazienti

3.1 Elenco dei pazienti

Dopo aver lanciato il programma HearSIM™, verrà visualizzato l'elenco dei pazienti.

Name	Patient ID	Birth date	Last update	TEOAE	DPOAE	ABR	Flagged
Baker, Ann	80052028201000392	10/23/2020	11/3/2020	✓	✓	✓	1 (10/27)
Ceslone, Carla	80942928201000398	10/23/2020	11/3/2020	✓	✓	✓	1 (10/27)
Francis, Felicia	22812	3/1/2017	11/3/2020	✓	✓	✓	1 (10/27)
Jones, Felicity	8734	8/10/2020	10/23/2020	✓	✓	✓	1 (10/27)
Manan, Lisa	19756144201000070	10/6/2020	10/16/2020	✓	✓	✓	1 (10/27)
Murphy, Emma	23423423	7/16/2020	11/3/2020	✓	✓	✓	1 (10/27)
Meyers, David	996716	8/21/2019	10/7/2020	✓	✓	✓	1 (10/27)
Carpenter, ...	3g7h9g	7/27/2020	10/7/2020	✓	✓	✓	1 (10/27)
Grech, Kenneth	41971506200900282	3/1/2020	10/7/2020	✓	✓	✓	1 (10/27)
Cornelia, Milo	3875279	8/9/2020	11/3/2020	✓	✓	✓	1 (10/27)

3.1.1 Pazienti visualizzati

Per risparmiare tempo per l'inserimento dei dati sullo schermo, per impostazione predefinita saranno visualizzati i 100 pazienti più recenti. Ciò è indicato attraverso le informazioni presenti nell'angolo in alto a sinistra dell'elenco dei pazienti come indicato in basso.

Name	Patient ID	Birth date	Last update	TEOAE	DPOAE	ABR	Flagged
Cornelia, Milo	3875279	8/9/2020	11/3/2020	✓	✓	✓	1 (10/27)

Scorrendo in basso l'elenco, saranno aggiunti più pazienti allo schermo e saranno aggiornate automaticamente le informazioni sul numero di pazienti.

3.1.2 Formato dell'elenco

Ogni riga dell'elenco rappresenta un paziente. Le intestazioni delle colonne descrivono i dati presenti nelle colonne stesse.

- Nome: cognome, nome
- ID paziente
- Genere (simbolo)
- Data di nascita
- Ultimo aggiornamento
- Riepilogo test: TEOAE / DPOAE / ABR
- Stato contrassegnato

3.1.2.1 Simboli del genere



L'assenza del simbolo indica un genere non specificato.

3.1.2.2 Data dell'ultimo aggiornamento

La colonna Ultimo Aggiornamento nell'elenco dei pazienti indica la data più recente in cui i dati del paziente sono stati modificati. Per un paziente appena aggiunto in HearSIM™, la data dell'ultimo aggiornamento corrisponderà alla data di creazione. Altrimenti, la data dell'ultimo aggiornamento indicherà l'evento verificatosi più di recente:

- La data di modifica in cui uno qualsiasi dei campi del paziente è stato aggiunto o cambiato oppure
- La data del trasferimento dei dati in cui i dati (le informazioni sul paziente o sul test) sono stati trasferiti dal dispositivo ad HearSIM™

3.1.2.3 Riepilogo test

Le tre colonne nell'elenco pazienti forniscono un riepilogo in merito all'ultimo test eseguito sul paziente per ciascun tipo di test. I simboli e la posizione rappresentano:

TEOAE	DPOAE	ABR
 		  

 Superato
 Non superato
 Incompleto



Risultato per l'orecchio destro


Risultato per l'orecchio sinistro

3.1.3 Ordinamento delle liste

Gli elenchi dei pazienti possono essere ordinati per nome, ID del paziente, data di nascita o data dell'ultimo aggiornamento selezionando le diverse intestazioni delle colonne. L'ordinamento predefinito si basa sulla data dell'ultimo aggiornamento.




Accanto alla colonna che determina l'ordinamento è presente una freccia.

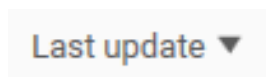


Facendo clic una volta sull'intestazione della colonna, si attiva l'ordinamento dell'elenco in base al criterio specificato. Facendo clic di nuovo si modifica l'ordine dal primo all'ultimo e viceversa.

3.1.4 Ricerca di un paziente

L'icona **Cerca**  nell'angolo superiore destro apre un riquadro di ricerca.

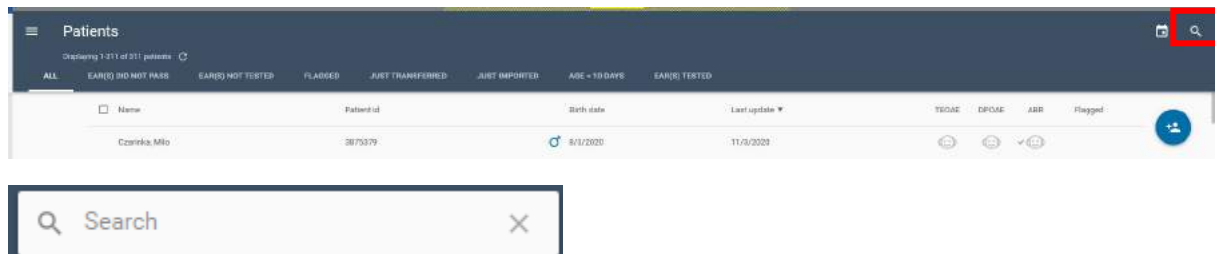


È possibile eseguire la ricerca in base all'ID del paziente, al nome o al cognome. Durante la digitazione dei caratteri nel campo di ricerca, l'elenco dei pazienti verrà abbreviato in modo da rispecchiare solo i pazienti che corrispondono ai caratteri di ricerca. Come indicato nell'immagine sottostante, i caratteri relativi ai dati del paziente che corrispondono ai criteri di ricerca vengono visualizzati in rosso.

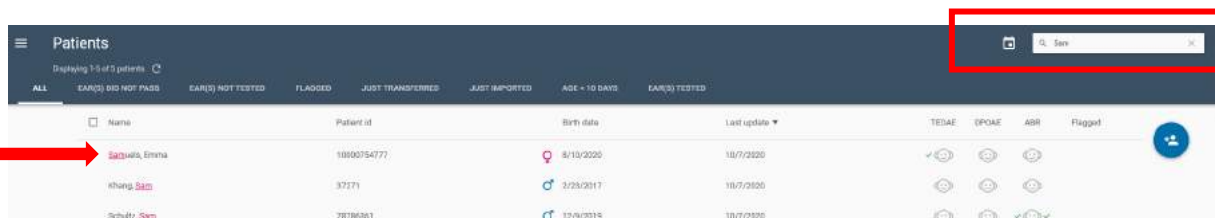

Per tornare all'elenco completo dei pazienti e svuotare il riquadro di ricerca, fare clic sulla **X** sul lato destro del riquadro stesso.

3.2 Elenchi filtrati

L'elenco predefinito dei pazienti HearSIM™ mostra i 100 pazienti aggiornati più recentemente in tutto il **(TUTTI)** database.

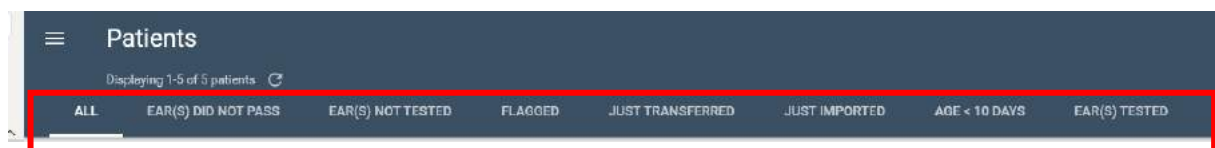

Sono disponibili opzioni predefinite che filtrano il database per visualizzare solo un sottogruppo di pazienti che corrispondano ai criteri del filtro. Di seguito sono riportati gli elenchi filtrati che è possibile selezionare:

- Tutti (opzione predefinita)
- Test orecchio non superato
- Orecchio/e non sottoposto/e a test
- Contrassegnato
- Appena trasferiti
- Appena importato
- Età < 10 giorni
- Orecchie testate

3.2.1 Tutti

Selezionare questa opzione per tornare alla visualizzazione dell'elenco completo dei pazienti da uno degli elenchi filtrati.

L'elenco dei pazienti è influenzato dall'impiego della funzione di **Ricerca**  così come dal filtro relativo all'intervallo di tempo delle modifiche . Quando una di tali funzioni è in uso, l'elenco completo dei pazienti viene limitato in modo da corrispondere ai criteri di ricerca o ai filtri impostati.

Per tornare all'elenco completo di tutti i pazienti, è necessario chiudere questi strumenti.

3.2.2 Test orecchio non superato

I pazienti visualizzati in questo elenco corrispondono ai seguenti criteri:

- Presentano i risultati di almeno un test
- L'ultimo test eseguito su una o entrambe le orecchie non è stato superato per qualsiasi tipo di test

Si tratta di pazienti che con molta probabilità dovranno essere sottoposti ancora allo screening o avranno bisogno di essere controllati.

NOTA: questo elenco non vuole essere una lista completa di tutti i pazienti che potrebbero richiedere un ulteriore controllo in base al protocollo del proprio programma di screening. Si tratta semplicemente di uno strumento che è possibile utilizzare per identificare i pazienti che non hanno superato il test per ciascun orecchio per almeno un tipo di test l'ultima volta che sono stati sottoposti a screening.

3.2.3 Orecchie non sottoposte a test

I pazienti visualizzati in questo elenco corrispondono al seguente criterio:

- Non hanno alcun risultato per uno o entrambe le orecchie per almeno un tipo di misurazione (TE, DP, ABR)

Questi sono i pazienti, all'interno del gestore dati, che necessitano di essere sottoposti a screening per la prima volta per almeno un orecchio.

3.2.4 Contrassegnato

I pazienti visualizzati in questo elenco corrispondono al seguente criterio:

- Sono stati contrassegnati dall'utente.

3.2.5 Appena trasferiti

I pazienti visualizzati in questo elenco corrispondono al seguente criterio:

- Sono stati trasferiti dal dispositivo all'ultima connessione dello stesso ed è stata eseguita un'importazione di dati.

I nomi dell'elenco Appena trasferiti verranno sovrascritti alla successiva importazione di dati da un dispositivo.

I nomi dell'elenco Appena trasferiti verranno cancellati alla chiusura dell'applicazione.

3.2.6 Appena importato

Selezionare questa opzione per visualizzare solo un elenco dei pazienti importati attraverso la funzione "Importa pazienti" di HearSIM™, che acquisisce il file esportato da un database di terze parti e colloca le informazioni dei pazienti nel database di HearSIM™ e OtoAccess®. Questo elenco resterà valido fino a quando viene importato un nuovo file e l'elenco verrà sovrascritto con i nuovi pazienti, o alla chiusura dell'applicazione HearSIM al momento dell'eliminazione dell'elenco.

3.2.7 Età < 10 giorni

I pazienti visualizzati in questo elenco corrispondono al seguente criterio:

- Secondo i dati di nascita inseriti, il bambino ha meno di 10 giorni

L'elenco filtrato consente di visualizzare un sottoinsieme di bambini che più probabilmente sono stati controllati recentemente.


3.2.8 Orecchie testate

I pazienti visualizzati in questo elenco corrispondono al seguente criterio:

- Hanno almeno un test salvato nel database che è stato trasferito tramite l'applicazione HearSIM.

3.2.9 Filtro dell'intervallo date


L'icona **Calendario**  nell'angolo superiore destro apre i comandi che consentono di impostare un filtro di intervallo date relativo all'ultimo aggiornamento. Non appena si inseriscono le date nei campi **Da** e **A**, l'elenco dei pazienti si ridurrà per includere solo i pazienti per i quali la data di creazione o dell'ultima modifica del record rientri nell'intervallo specificato.

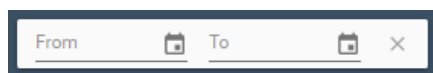

Impostare le date **Da** e **A** digitando una data in ogni campo o selezionando una data dai calendari che sono visualizzati facendo clic sui comandi del calendario all'interno del campo. Per maggiore praticità, la data odierna è evidenziata con un cerchio.


I comandi (<< e >) all'interno della pagina del calendario consentono di cambiare il mese.

Facendo clic sull'area superiore della pagina del calendario è possibile cambiare la visualizzazione della pagina per selezionare il mese. Facendo ancora clic, si passa alla visualizzazione degli anni.

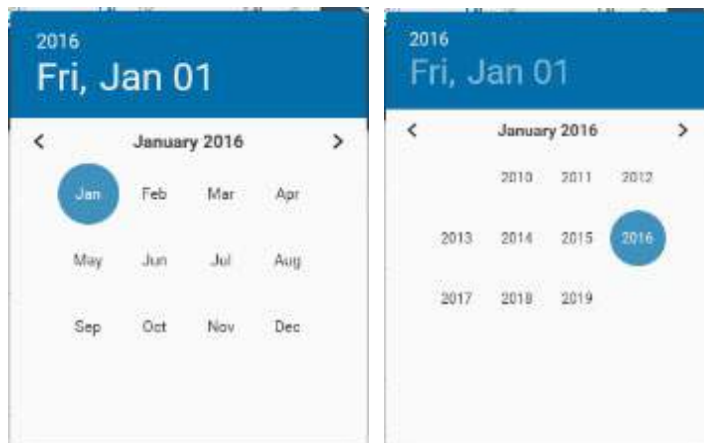

Chiudere il calendario selezionando una data o facendo clic al di fuori del calendario.

Facendo clic sulla **X** sul lato destro del campo si chiude il campo e si annullano i filtri, tornando all'elenco completo dei pazienti.

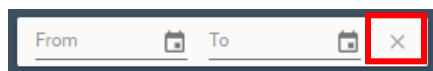

3.3 Selezione dei pazienti

I pazienti nell'elenco possono essere selezionati al fine di includere il record di un particolare paziente mentre si eseguono attività quali:

- Stampa di un elenco di pazienti
- Stampa dei rapporti dei test per i pazienti selezionati
- Contrassegnare un gruppo di pazienti
- Trasferimento delle informazioni del paziente al dispositivo di screening uditivo


3.3.1 Selezione dei singoli

La casella **Seleziona** viene visualizzata nel lato sinistro del record del paziente quando si passa il mouse sopra la riga di un paziente.



Facendo clic con il mouse nella casella si **seleziona** il paziente facendo in modo che la relativa casella rimanga visibile quando si sposta il mouse dalla riga del paziente.


È possibile selezionare più pazienti facendo clic sulla casella **Seleziona** in ogni riga del paziente.

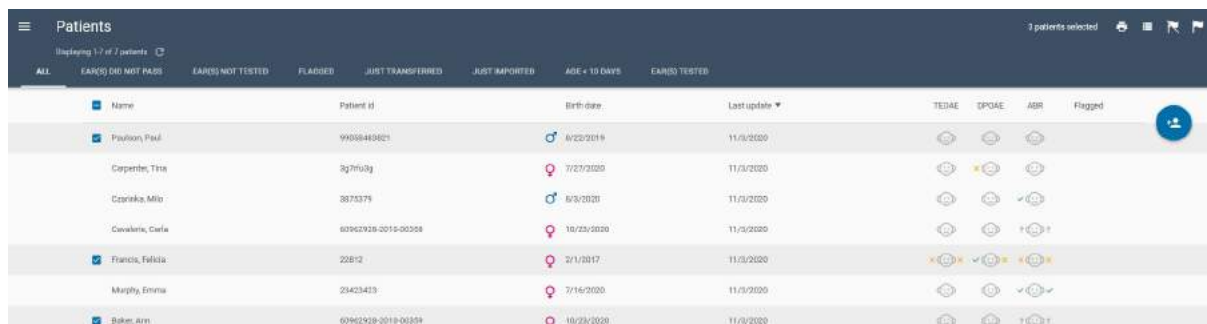

Name	Patient ID	Birth date	Last update	TEDAE	DPOAE	ABR	Flagged
☒ Paulson, Paul	99068483821	♂ 8/22/2019	11/3/2020	👁️	👁️	👁️	
☐ Carpenter, Tina	3g7n03g	♀ 7/27/2020	11/3/2020	👁️	👁️	👁️	
☐ Corriola, Milo	3873379	♂ 6/3/2020	11/3/2020	👁️	👁️	👁️	
☐ Cavallaro, Carla	60962928-2019-00358	♀ 10/23/2020	11/3/2020	👁️	👁️	👁️	
☒ Francis, Felicia	22812	♀ 2/1/2017	11/3/2020	👁️	👁️	👁️	
☐ Murphy, Emma	23423423	♀ 7/16/2020	11/3/2020	👁️	👁️	👁️	
☒ Baker, Ann	60962928-2019-00359	♀ 10/23/2020	11/3/2020	👁️	👁️	👁️	

3.3.2 Selezione di tutti (i pazienti visualizzati)

È possibile selezionare tutti i pazienti dell'elenco cliccando con il mouse sulla casella **Seleziona tutto** nell'intestazione della colonna.

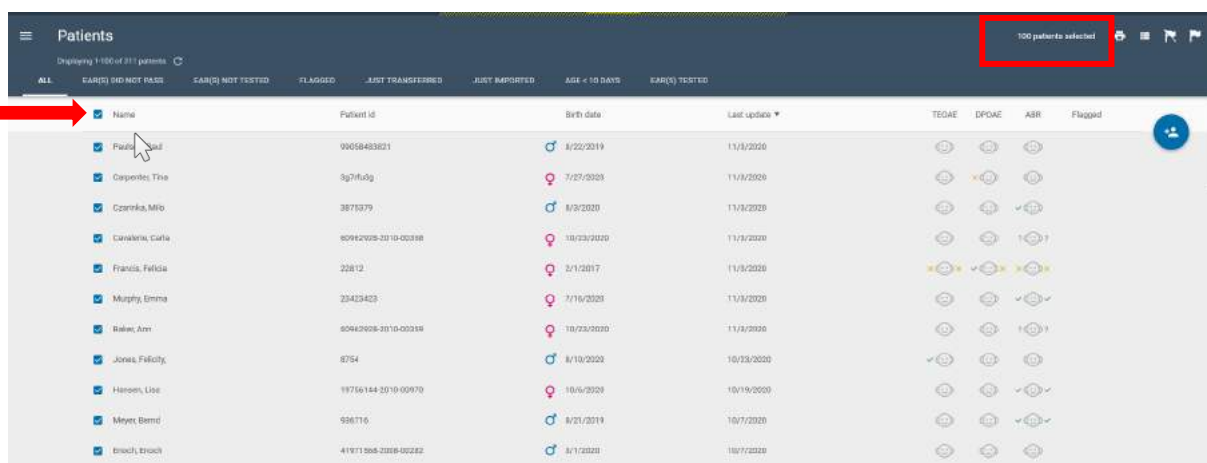

Name	Patient ID	Birth date	Last update	TEDAE	DPOAE	ABR	Flagged
☒ Paulson, Paul	99068483821	♂ 8/22/2019	11/3/2020	👁️	👁️	👁️	
☒ Carpenter, Tina	3g7n03g	♀ 7/27/2020	11/3/2020	👁️	👁️	👁️	
☒ Corriola, Milo	3873379	♂ 6/3/2020	11/3/2020	👁️	👁️	👁️	
☒ Cavallaro, Carla	60962928-2019-00358	♀ 10/23/2020	11/3/2020	👁️	👁️	👁️	
☒ Francis, Felicia	22812	♀ 2/1/2017	11/3/2020	👁️	👁️	👁️	
☒ Murphy, Emma	23423423	♀ 7/16/2020	11/3/2020	👁️	👁️	👁️	
☒ Baker, Ann	60962928-2019-00359	♀ 10/23/2020	11/3/2020	👁️	👁️	👁️	
☒ Jones, Felicity	8754	♂ 8/19/2020	10/23/2020	👁️	👁️	👁️	
☒ Hansen, Lisa	19736144-2019-00970	♀ 10/6/2020	10/19/2020	👁️	👁️	👁️	
☒ Meyer, Bernd	936716	♂ 8/21/2019	10/7/2020	👁️	👁️	👁️	
☒ Broch, Brock	41911366-2009-00282	♂ 8/1/2020	10/7/2020	👁️	👁️	👁️	

Per impostazione predefinita, nell'elenco sono visualizzati solo 100 pazienti alla volta, tranne se l'utente specifica di visualizzare più pazienti scorrendo verso il basso l'elenco dei pazienti e ripetendo questa azione finché tutti i pazienti vengono visualizzati. Pertanto, si potrà notare che con la selezione di tutti i pazienti visualizzati, nella parte alta dello schermo saranno visualizzate le informazioni indicanti il numero di pazienti selezionati per l'azione da eseguire.

3.3.3 Deselezione di tutti (i pazienti visualizzati)

Tutti i pazienti selezionati presenti nell'elenco possono essere deselezionati cliccando di nuovo sulla casella **Seleziona tutto** nell'intestazione della colonna.

I pazienti selezionati restano selezionati fino a quando:

- Viene deselezionato un singolo paziente tramite il comando **Deseleziona** nella riga del paziente

Oppure

- Tramite il comando **Deseleziona tutto** è possibile deselezionare i pazienti
- Modificare la visualizzazione di un diverso elenco filtrato
- **Esci** dall'applicazione

Eseguendo una di queste tre funzioni si deselezionano le caselle di tutti i pazienti visualizzati ripristinando l'elenco predefinito di 100 pazienti visualizzati.


3.4 Stampa di un elenco di pazienti

Dopo aver selezionato i pazienti che si desidera includere in un elenco da stampare, selezionare

l'icona Elenco di stampa  nell'angolo superiore destro. Ad esempio, potrebbe trattarsi di un elenco di pazienti che è necessario sottoporre di nuovo al test o di nuovi pazienti che sono pronti per lo screening.

3.4.1 Anteprima di stampa

L'anteprima di stampa visualizza le informazioni illustrate nell'immagine seguente.

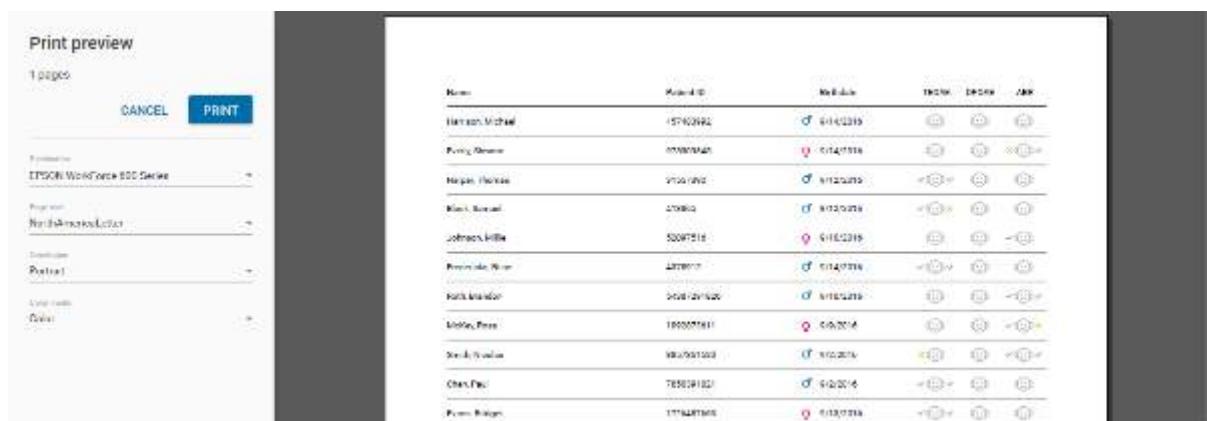


I comandi consentono di eseguire le seguenti attività:

- Selezionare la stampante desiderata
- Impostare la dimensione della pagina
- Impostare l'orientamento
- Selezionare la modalità colore
- Stampa
- Annulla

3.6.1 Contrassegnare pazienti singoli

Il comando **Contrassegna** (Flag) viene visualizzato nel lato sinistro del record del paziente quando si passa il mouse sopra la riga di un paziente.

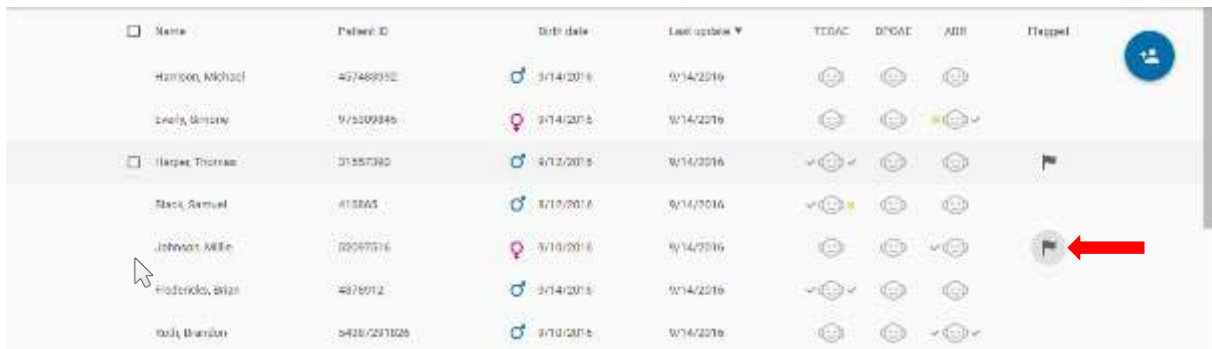

Name	Patient ID	Birth date	Last update	TEOAE	DPOAE	ABR	Flagged
Harrison, Michael	427488932	3/14/2018	9/14/2019	😊	😊	😊	
Evans, Emily	9/5109845	3/14/2018	9/14/2019	😊	😊	😊	
Harper, Thomas	31557382	4/12/2018	9/14/2019	😊	😊	😊	🚩
Black, Samuel	413885	8/19/2018	9/14/2019	😊	😊	😊	
Johnson, Mike	22597516	9/10/2018	9/14/2019	😊	😊	😊	🚩
Friedrich, Brian	4978912	3/14/2018	9/14/2019	😊	😊	😊	
Ruby, Brandon	5428/221828	9/10/2018	9/14/2019	😊	😊	😊	


Facendo clic con il mouse su **Contrassegna**, tale simbolo rimane visibile quando si sposta il mouse lontano dalla riga del paziente. Il contrassegno è visualizzato all'interno di un cerchio grigio.

I pazienti multipli (si possono contrassegnare cliccando sulla casella **Contrassegna** in ogni riga del paziente.

3.6.2 Contrassegnare più pazienti o tutti i pazienti in un elenco


Possono essere contrassegnati tutti i pazienti dell'elenco nei seguenti modi:

- Cliccando con il mouse sulla casella **Seleziona tutto** nell'intestazione della colonna, in modo che tutti i pazienti visualizzati nell'elenco vengano selezionati
- Selezionando l'icona **Contrassegna** nell'angolo superiore destro dello schermo

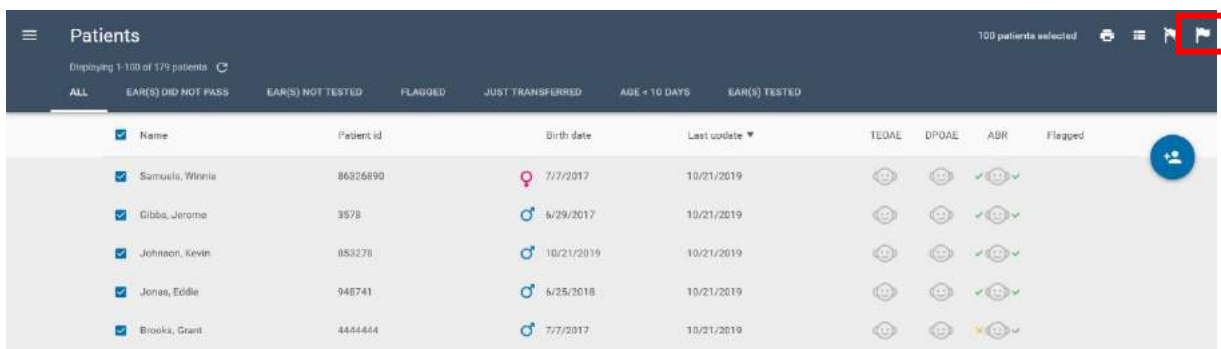

Name	Patient id	Birth date	Last update	TEOAE	DPOAE	ABR	Flagged
Samuels, Winnie	86326890	7/7/2017	10/21/2019	😊	😊	😊	
Gibbs, Jerome	3578	6/29/2017	10/21/2019	😊	😊	😊	
Johnson, Kevin	853278	10/21/2019	10/21/2019	😊	😊	😊	
Jones, Eddie	948741	6/25/2018	10/21/2019	😊	😊	😊	
Brooks, Grant	4444444	7/7/2017	10/21/2019	😊	😊	😊	

Tutti i pazienti selezionati sono quindi contrassegnati come illustrato di seguito.

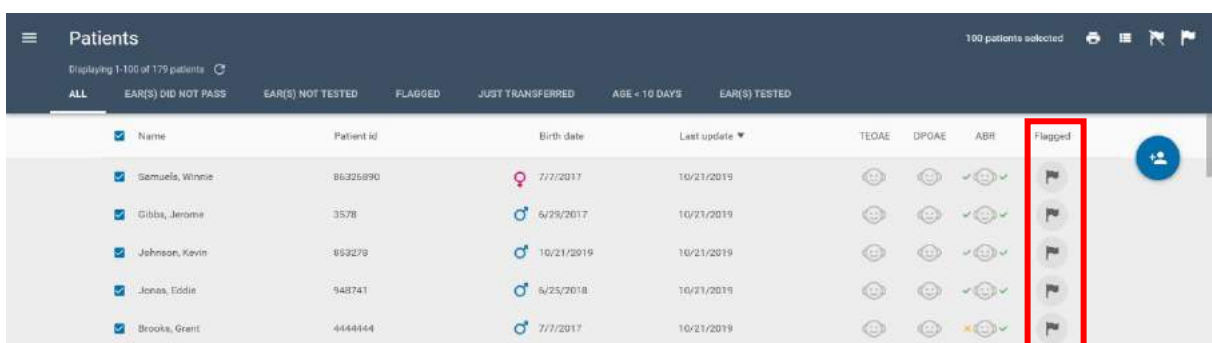

Name	Patient id	Birth date	Last update	TEOAE	DPOAE	ABR	Flagged
Samuels, Winnie	86326890	7/7/2017	10/21/2019	😊	😊	😊	🚩
Gibbs, Jerome	3578	6/29/2017	10/21/2019	😊	😊	😊	🚩
Johnson, Kevin	853278	10/21/2019	10/21/2019	😊	😊	😊	🚩
Jones, Eddie	948741	6/25/2018	10/21/2019	😊	😊	😊	🚩
Brooks, Grant	4444444	7/7/2017	10/21/2019	😊	😊	😊	🚩

3.6.3 Annullamento del contrassegno sui pazienti selezionati

Per i pazienti contrassegnati nell'elenco è possibile annullare il contrassegno selezionandoli e quindi

utilizzando l'icona **Annulla contrassegno**



3.6.4 Elenco filtrato dei pazienti contrassegnati

È possibile visualizzare tutti i pazienti contrassegnati selezionando l'elenco filtrato **contrassegnato**.

3.7 Trasferimento dei pazienti a un dispositivo

Per trasferire i pazienti al dispositivo, per prima cosa è necessario collegare il dispositivo al PC tramite il cavo d'interfaccia USB fornito con il dispositivo.

Quando il dispositivo viene rilevato dal software HearSIM™, verrà del dispositivo nell'angolo inferiore sinistro dello schermo del PC, a dispositivo.



visualizzata un'immagine indicare lo stato del

Lo schermo del dispositivo visualizzerà quando viene rilevato da HearSIM™.



"Controllato dal PC" o "Pronto"



NOTA: il dispositivo non sarà rilevato se è in corso la visualizzazione di una fase qualsiasi di un test (a partire dalla schermata di preparazione del paziente fino alla schermata di completamento del test). Tornare alla schermata iniziale se necessario.

NOTA: il dispositivo non sarà rilevato quando sono visualizzate alcune schermate. Spegner e riaccendere il dispositivo se non viene visualizzato "Pronto" subito dopo il collegamento con HearSIM™.



3.7.1 Stato del dispositivo e comandi per il trasferimento

Il simbolo visualizzato nell'immagine del dispositivo fornisce informazioni sul database del dispositivo e specifica se questo è pronto per il trasferimento dei pazienti. Passando il mouse sopra l'immagine, verrà visualizzata una descrizione del comando che ne spiega lo stato.



Dispositivo connesso, dati del test e del paziente presenti nel dispositivo

Fare clic sull'immagine del dispositivo per cominciare a importare i dati del dispositivo in HearSIM™.

Nota: Prima di eseguire altre funzioni come il trasferimento di pazienti al dispositivo, i dati di test sul dispositivo si devono trasferire su HearSIM™ quindi i dati sono eliminati automaticamente dal dispositivo.

**Dispositivo connesso, nessun dato rilevato**

Il dispositivo è pronto ad accettare i pazienti ma non è stato selezionato alcun paziente.

**Dispositivo connesso, pronto a trasferire i pazienti selezionati al dispositivo**

Fare clic sull'immagine del dispositivo per cominciare a trasferire i pazienti selezionati al dispositivo.

**Dispositivo connesso: pronto per trasferire le impostazioni del nuovo dispositivo****Dispositivo connesso: trasferimento delle impostazioni del dispositivo non supportato****Dispositivo connesso, impossibile comunicare**

Consultare la sezione relativa alla risoluzione dei problemi.

3.7.2 Trasferimento di pazienti


Dopo aver selezionato l'immagine per iniziare il trasferimento dei pazienti selezionati nel dispositivo, verrà visualizzata una finestra che mostrerà il numero di pazienti selezionati.



Selezionare **Trasferisci** per continuare con la procedura. La schermata visualizzerà l'avanzamento e comunicherà il completamento del processo.

3.8 Aggiunta di nuovi pazienti

È possibile aggiungere nuovi pazienti al database selezionando l'icona **Aggiungi nuovi pazienti**.

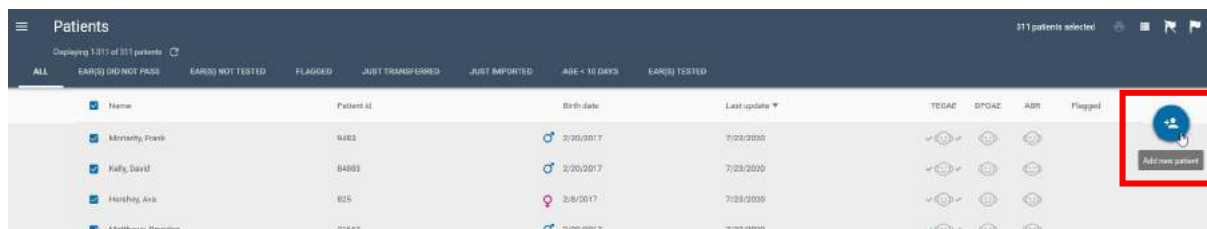

Verrà visualizzata la schermata Nuovo paziente in cui è possibile inserire i dati anagrafici di base. È possibile personalizzare i campi obbligatori nella pagina **Amministrazione/Dettagli paziente**. Non è possibile salvare il nuovo paziente se non vengono compilati i campi obbligatori.

The image shows two versions of the 'New patient' form. The left version is the initial state with empty fields for Patient ID, Last name, First name, Sex (set to 'Unspecified'), Consent for screening, Consent for tracking, and Ethnicity. The right version shows the form after entering '483833' for Patient ID. Red error messages 'This field is mandatory' appear above the Last name, First name, and Sex fields. Both versions have 'SAVE', 'SAVE AND EDIT', and 'CLOSE' buttons at the bottom.

3.8.1 ID paziente

Il campo ID paziente è necessario per salvare un nuovo paziente nel gestore dati. Il valore immesso in questo campo deve essere univoco nel database.

3.8.1.1 Conflitto fra ID pazienti

Non è possibile inserire il duplicato di un ID paziente. Al di sotto del campo relativo all'ID in cui si è inserito un valore che corrisponde a un ID già salvato nel gestore dati verrà indicato che è presente un conflitto. Questo significa che è già presente un paziente salvato con lo stesso ID. È possibile trovarlo ricercando tale ID nel campo di ricerca dell'elenco dei pazienti.

A close-up of the Patient ID field with the value '4728193847'. Below the input field, a red error message reads 'Please enter a unique id'.

Per salvare un nuovo paziente è necessario inserire un ID univoco.

3.8.2 Cognome e Nome

Questi campi consentono di inserire il nome e il cognome di un paziente. Tali campi sono opzionali.

3.8.3 Data di nascita

Il campo della data di nascita visualizza, per impostazione predefinita, la data odierna.

La data di nascita del paziente può essere inserita nel campo o immessa tramite il comando **Calendario**.

3.8.4 Genere biologico

È possibile immettere il genere del paziente attraverso un menu a discesa che visualizza un elenco contenente le seguenti voci: "Maschile", "Femminile" e "Non specificato", l'ultima delle quali è quella predefinita.

3.8.5 Consenso per lo screening

Per i programmi che richiedono il tracciamento del consenso dei genitori per lo screening, questo controllo può essere selezionato su Sì oppure si può selezionare X se il consenso non è stato concesso.

3.8.6 Consenso per il tracciamento

Per i programmi che richiedono il tracciamento del consenso dei genitori per l'invio di dati ad un centro di tracciamento, questo controllo può essere selezionato su Sì oppure si può selezionare X se il consenso non è stato concesso.

3.8.7 Appartenenza etnica

Per i programmi che richiedono il tracciamento dell'etnia del paziente, è possibile inserire questi dati in questa posizione utilizzando l'elenco a discesa contenente le voci della pagina Configurazione.

3.8.8 ID di tracciamento


Per i programmi che utilizzano un ID di tracciamento diverso dall'ID paziente assegnato in ospedale, è possibile abilitare un campo ID di tracciamento nella schermata Nuovo paziente.

3.8.8.1 ID di tracciamento e file di esportazione HiTrack


Quando viene immesso un ID di tracciamento per un paziente e i test relativi a tale paziente vengono salvati in un file di esportazione in formato HiTrack, l'ID di tracciamento verrà sostituito al campo ID paziente nel file HiTrack.

3.8.9 Contrassegno

Il paziente può essere contrassegnato all'interno della schermata Nuovo paziente selezionando il comando **Contrassegna**.

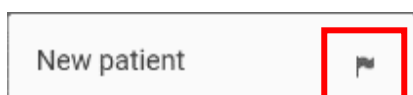

Contrassegno disattivato

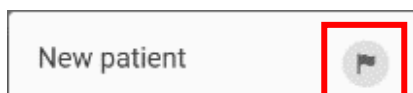

Contrassegno attivato

Il contrassegno sul paziente all'interno della schermata Nuovo paziente comporterà l'attivazione del contrassegno nella visualizzazione dell'elenco pazienti una volta che il paziente è stato salvato nel gestore dati.

3.8.10 Salva

Dopo aver immesso le informazioni del paziente, selezionare **Salva** per:

- Salvare il paziente nel gestore dati
- Cancellare i dati nella schermata Nuovo paziente per poter inserire i dati di un altro paziente

3.8.11 Salva e modifica

Dopo aver immesso le informazioni del paziente, selezionare **Salva e modifica** per:

- Salvare il paziente nel database
- Aprire la schermata Modifica paziente per aggiungere ulteriori dettagli e/o fattori di rischio per il paziente in questione

NOTA: consultare la sezione 3.11 per maggiori informazioni sulla schermata Modifica paziente.

3.8.12 Chiudi

Selezionare **Chiudi** per chiudere la schermata Nuovo paziente. Se sono presenti dati in uno qualsiasi dei campi quando viene selezionato il comando **Chiudi**, questi verranno ignorati.

3.9 Dettagli del paziente

Per analizzare tutti i campi contenenti informazioni sui pazienti, cliccare sul nome del paziente o sul suo ID nella relativa riga all'interno della visualizzazione dell'elenco pazienti. Tale vista è suddivisa in tre sezioni: Informazioni di base, Informazioni dettagliate e Fattori di rischio.

È possibile personalizzare i campi visualizzati in queste sezioni nella pagina **Amministrazione/Dettagli paziente**.

Name	Patient ID	Birth date	Last update
Montano, Frank	9482	2/20/2017	7/23/2020
Kelly, David	84853	2/20/2017	7/23/2020
Hensley, Joe	825	2/8/2017	7/23/2020
Matthews, Brandon	21667	2/20/2017	7/23/2020
Morris, Johnny	4838290901	2/19/2017	7/23/2020
Jackson, Janet	773885667	2/20/2017	7/23/2020
Jackson, Helen	5879932329	2/12/2017	7/23/2020
Johnson, Regina	483728718	1/17/2017	7/23/2020
Lopez, Judith	65853322	2/20/2017	7/23/2020
Evans, Bruno	2551667	2/20/2017	7/23/2020
Barnes, Georgia	462728	2/20/2017	7/23/2020
Biggs, Tami	848291	2/20/2017	7/23/2020
Brent, Bill	2736882	2/19/2017	7/23/2020

21667 Matthews, Brandon Male, born 2/20/2017	
TEST RESULTS PATIENT DETAILS CONTACT INFO	
Basic information	
Patient ID	21667
Last name	Matthews
First name	Brandon
Birth date	2/20/2017
Sex	Male
Consent for screening	☐
Consent for tracking	☐
Detailed information	
Birth order	Unspecified
Birth weight	
Gestational age (wks)	
Time of birth (h:mm)	
Expected birth date	

3.9.1 Informazioni di base

La sezione "Informazioni di base" supporta la visualizzazione dei seguenti dati demografici:

- ID paziente
- Cognome
- Nome
- Data di nascita
- Genere
- Consenso per lo screening
- Consenso per il tracciamento
- ID di tracciamento (se abilitato)

3.9.2 Informazioni dettagliate

La sezione "Informazioni dettagliate" consente di visualizzare i seguenti campi:

- Ordine di nascita
- Peso alla nascita [g]
- Età gestazionale
- Ora di nascita [hh:mm]
- Data di nascita prevista
- Razza
- Appartenenza etnica
- Struttura di nascita
- Tipo di nido
- Assicurazione
- Medico
- ID univoco regionale
- Variabile di tracciamento 1
- Ragione del mancato screening
- Note

3.9.3 Fattori di rischio

In questa sezione sono visualizzate le informazioni sui fattori di rischio.



3.10 Informazioni di contatto

Per controllare le informazioni di contatto di un paziente, cliccare sul nome del paziente nell'elenco dei pazienti e selezionare la scheda Informazioni di contatto. Le Informazioni di contatto sono divise in due sezioni, Informazioni sulla madre e Informazioni di contatto alternative.

È possibile personalizzare i campi visualizzati in queste sezioni nella pagina **Amministrazione/Dettagli paziente**.

3.10.1 Informazioni della madre

La sezione delle informazioni della madre supporta la visualizzazione dei seguenti campi:

- ID della madre
- Cognome della madre
- Nome della madre
- Cognome da nubile
- Data di nascita della madre
- Indirizzo Riga 1
- Indirizzo Riga 2
- Città
- Stato/Provincia/Regione
- Zip/Codice postale
- Paese/area
- Numero di telefono
- Indirizzo e-mail
- Lingua
- Livello di istruzione
- Partecipazione al WIC
- Comunicazione ADA richiesta
- Linguaggio orale visivo

3.10.2 Informazioni di contatto alternative

La sezione Informazioni di contatto alternative comprende i seguenti campi:

- Cognome
- Nome
- Indirizzo Riga 1
- Indirizzo Riga 2
- Città
- Zip/Codice postale
- Stato/Provincia/Regione
- Numero di telefono
- Lingua
- Relazione con il paziente

3.11 Modifica delle informazioni del paziente e di contatto

È possibile modificare o completare le informazioni del paziente e di contatto selezionando l'icona

Modifica  nell'angolo superiore destro della schermata delle Informazioni del paziente. I campi diventeranno così editabili.



3.11.1 Modifica dei campi delle informazioni di base


In questa sezione i comandi e i campi sono identici a quelli della schermata Aggiungi nuovi pazienti. Vedere la sezione 3.8.

3.11.2 Modifica dei campi relativi alle informazioni dettagliate

I campi e i comandi in questa sezione sono i seguenti.

3.11.2.1 Ordine di nascita

Il menu a discesa consente di selezionare l'ordine in cui il bambino è nato rispetto ad eventuali fratelli/sorelle. Il valore predefinito è "Non specificato".

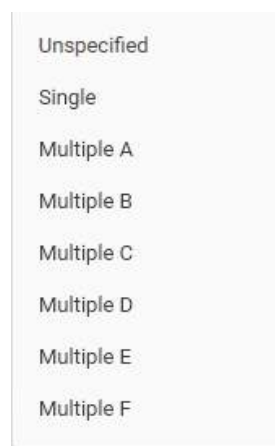

A screenshot of a dropdown menu with a light gray background. The menu is open, showing a list of options. The first option is "Unspecified". Below it are "Single", "Multiple A", "Multiple B", "Multiple C", "Multiple D", "Multiple E", and "Multiple F". Each option is preceded by a small, faint circular icon.

- Unspecified
- Single
- Multiple A
- Multiple B
- Multiple C
- Multiple D
- Multiple E
- Multiple F

3.11.2.2 Peso alla nascita [g]

Questo è un campo di inserimento testo in cui è possibile digitare il peso del bambino alla nascita espresso in grammi.

3.11.2.3 Età gestazionale [wks]

Il campo dell'età gestazionale consente di inserire l'età del bambino espresso in settimane.

3.11.2.4 Ora di nascita [hh:mm]

Il campo Ora di nascita è formattato per accettare dati solo nel formato hh:mm e accetta inserimenti di dati validi secondo l'orologio di 24 ore. Le immissioni non valide saranno eliminate o saranno ripristinati i dati validi inseriti più di recente.

3.11.2.5 Data di nascita prevista

Il campo consente di inserire la data di nascita prevista del bambino tramite l'inserimento diretto o il comando del calendario.

3.11.2.6 Razza

Il campo consente di selezionare la razza del bambino tramite il comando dell'elenco a discesa. Le voci dell'elenco sono configurate nella pagina di Configurazione, scheda delle Razze.

3.11.2.7 Struttura di nascita

Questo campo presenta un menu a discesa che visualizza l'elenco delle strutture definito nell'area di configurazione del software HearSIM™, nella scheda Strutture.

3.11.2.8 Tipo di nido

Il campo Tipo di nido è un elenco a discesa che mostra un elenco definito nella pagina di Configurazione, nella scheda Tipi di nido.

3.11.2.9 Assicurazione

Il campo Assicurazione è un elenco a discesa che mostra un elenco definito nella pagina di Configurazione, nella scheda Assicurazioni.

3.11.2.10 Medico

Il campo del Medico ha un elenco a discesa che mostra un elenco definito nella pagina di Configurazione, nella scheda dei Medici.

3.11.2.11 ID univoco regionale

Questo è un campo di testo in cui si può inserire un ID secondario per il paziente come ad esempio un ID di tracciamento.

3.11.2.12 Variabile di tracciamento 1

Questo campo è disponibile secondo necessità per il proprio programma.

3.11.2.13 Ragione del mancato screening

Il campo Ragione del mancato screening ha un elenco a discesa di ragioni possibili per cui un bambino non viene sottoposto a screening. L'elenco è fisso e non può essere modificato.

Quando dall'elenco si seleziona una "Ragione di mancato screening" si aprono campi aggiuntivi per inserire il nome dell'"analizzatore" (ad esempio la persona che inserisce i dati) e il nome della struttura dello screening in modo che questi campi di dati siano presenti anche nel record.

Per gli utenti del database di HiTrack che hanno attivato "esportazione automatica" in HearSIM™, la scelta di una voce in questo campo aggiungerà automaticamente un record nel file di esportazione di HiTrack in modo che l'unione del file ad HiTrack documenterà il paziente e la ragione del mancato screening.

Inoltre, se si esegue un'esportazione manuale con formato HiTrack o formato XML includendo i record creati per pazienti con una ragione di mancato screening, il paziente e la ragione saranno inclusi nel file di esportazione.

Nota: l'esportazione manuale o automatica di un file di tracciamento in un altro formato (CSV o OZ) ignorerà qualsiasi record di Ragione di mancato screening e non saranno inclusi nel file di esportazione.

3.11.2.14 Note

Questo è un campo di inserimento testo in cui è possibile inserire delle note sul paziente.

3.11.3 Modifica dei fattori di rischio

I fattori di rischio predefiniti disponibili in HearSIM™ comprendono i fattori di rischio raccomandati inclusi nel documento Joint Committee on Infant Hearing, year 2007 Position Statement¹, così come i fattori di rischio familiari. Tali fattori di rischio possono essere personalizzati nell'area di configurazione del programma HearSIM™.

3.11.3.1 Comandi relativi ai fattori di rischio

I comandi dei fattori di rischio consentono di impostare i valori Sì, No, oppure si può lasciare il valore vuoto. Quando la modalità di modifica è chiusa, nella vista dei dati del paziente sono visualizzati solo i fattori di rischio con il segno di spunta.

Family history of permanent childhood hearing loss		☒ ☐
☒ ☐	Sì, fattore di rischio presente	
☐ ☒	No, fattore di rischio assente	
☐ ☐	Fattore di rischio non specificato	

Altro fattore di rischio

Il campo **Altro** fattore di rischio consente di inserire un particolare fattore di rischio.

Recurrent otitis media or OM w/ effusion	☒ ☐
Syndrome assoc. w/ HL, progressive or late onset	☒ ☐
Other	

¹ Joint Committee on Infant Hearing, Year 2007 Position Statement: Principles and Guidelines for Early Hearing Detection and Intervention Programs, Pediatrics, 2007:Volume 120, Issue 4

3.11.4 Modifica delle informazioni della madre

Quando si visualizza la scheda Informazioni di contatto del paziente si possono aggiungere o modificare le informazioni di contatto della madre. Sono disponibili i seguenti campi.

3.11.4.1 ID della madre

Questo è un campo di inserimento testo in cui si può inserire un numero identificativo della madre.

3.11.4.2 Il cognome, il nome e il cognome da nubile

Questi sono campi di inserimento testo in cui è possibile inserire il nome della madre e il cognome da nubile.

3.11.4.3 Data di nascita della madre

In questo campo si può inserire la data di nascita della madre digitandola oppure usando il controllo del calendario.

3.11.4.4 Indirizzo della madre

In questi campi si possono inserire le voci di testo per riga 1 dell'indirizzo, riga 2 dell'indirizzo, città, CAP e stato/provincia/regione. L'elenco a discesa consente di inserire il Paese o l'area di residenza.

3.11.4.5 Numero di telefono della madre

Campo di inserimento testuale in cui è possibile digitare il numero di telefono della madre.

3.11.4.6 Indirizzo e-mail della madre

Campo di inserimento testuale in cui è possibile digitare l'indirizzo e-mail della madre.

3.11.4.7 Lingua e livello di istruzione della madre

Questi campi contengono un elenco a discesa da cui è possibile scegliere la lingua della madre. È possibile configurare questi elenchi nelle schede specifiche dello stesso nome presenti nella pagina di configurazione.

3.11.4.8 Partecipazione della madre al WIC

Questo campo consente di inserire "Sì", "No" o "Sconosciuto" in termini di partecipazione della madre a uno speciale programma nutrizionale supplementare per donne, neonati e bambini (WIC).

3.11.4.9 Comunicazione ADA richiesta

Questo campo consente l'inserimento di "Sì", "No" o "Sconosciuto" in termini di richiesta di una comunicazione specializzata.

3.11.4.10 Linguaggio orale visivo

Questo campo contiene un elenco a discesa fisso, da cui è possibile scegliere la modalità di comunicazione visiva/orale preferita della madre.

3.11.5 Modifica delle informazioni di contatto alternative

3.11.5.1 Cognome, nomi

Questi sono i campi di inserimento testo in cui è possibile digitare il nome del contatto alternativo.

3.11.5.2 Indirizzo

In questi campi si possono inserire le voci di testo del contratto alternativo per riga 1 dell'indirizzo, riga 2 dell'indirizzo, città, CAP e stato/provincia/regione.

3.11.5.3 Numero di telefono

Questi sono i campi di inserimento testo in cui è possibile digitare il numero di telefono.

3.11.5.4 Lingua


Questo è un elenco a discesa da cui scegliere la lingua del contatto alternativo.

3.11.5.5 Relazione con il paziente (bambino)

In questo campo è possibile eseguire una selezione in un elenco configurato che descrive la relazione del contatto alternativo con il bambino. È possibile personalizzare l'elenco nella scheda Configurazione/Relazioni.

3.11.6 Salvataggio o eliminazione delle modifiche

Per uscire dalla visualizzazione di modifica delle informazioni del paziente, è necessario salvare o annullare le modifiche tramite i comandi posti nell'area inferiore della finestra.

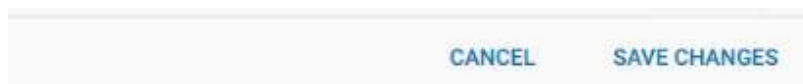

3.11.6.1 Salva modifiche

Selezionando **Salva modifiche** sarà possibile salvare le modifiche apportate e chiudere la visualizzazione di modifica della schermata relativa alle informazioni del paziente.

3.11.6.2 Annulla

Selezionando **Annulla** si cancelleranno tutte le modifiche apportate senza alcun avviso e tutti i campi torneranno ai valori precedenti, la visualizzazione di modifica della schermata delle informazioni del paziente verrà chiusa.


3.12 Cancellazione di un paziente

Un paziente può essere cancellato da HearSIM™ selezionando l'icona **Cancella**  nell'angolo superiore destro della visualizzazione dei dettagli del paziente.



3.12.1 Conferma della cancellazione

Viene visualizzata una finestra che chiede di confermare la cancellazione selezionando il comando **Elimina**. Se si cancella un paziente, si cancellano da HearSIM™ anche tutti i test ad esso associati.

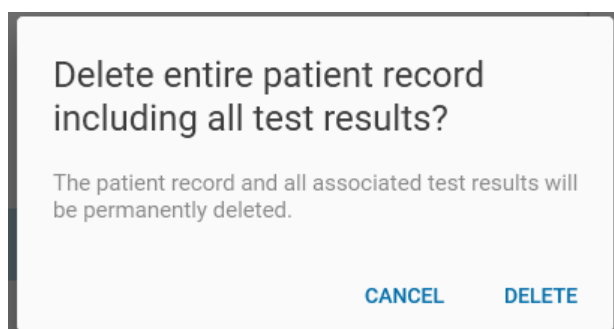


Selezionando **Annulla** si annulla l'operazione e si chiude la finestra a comparsa.

3.13 Elenco dei risultati dei test

Selezionare la scheda **Risultati dei test** nella schermata delle informazioni del paziente per visualizzare un elenco di tutti i test che sono stati trasferiti dal dispositivo a HearSIM™.

L'elenco dei test è ordinato in senso cronologico inverso.

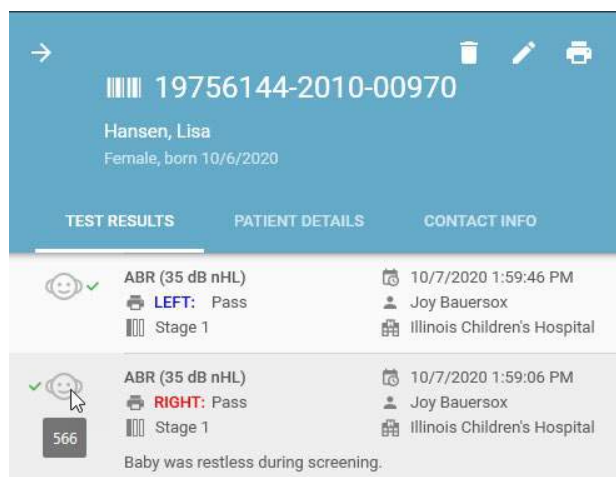


Le informazioni mostrate comprendono i seguenti dati (fase dello screening, analizzatore, struttura e commenti sono opzionali).

- Orecchio sottoposto a test
- Tipo di test
- Risultato
- Fase dello screening
- Data e ora del test
- Analizzatore
- Struttura dello screening
- Commenti sul test
- ID test (finestra a comparsa di suggerimento visualizzata passando il mouse sopra il grafico della testa del bambino)




Nell'elenco, i test ABR binaurali mostrano i risultati di entrambe le orecchie come riportato di seguito.

Per test incompleti, passare il mouse sul simbolo del punto interrogativo  per visualizzare il motivo per l'interruzione del test (se ne è stato inserito uno).

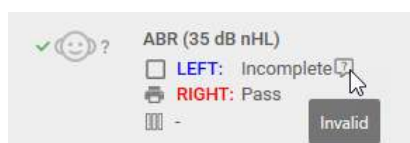

3.14 Visualizzazione dei dettagli dei test

Selezionare uno dei test dell'elenco per aprire una visualizzazione dettagliata di quel test.

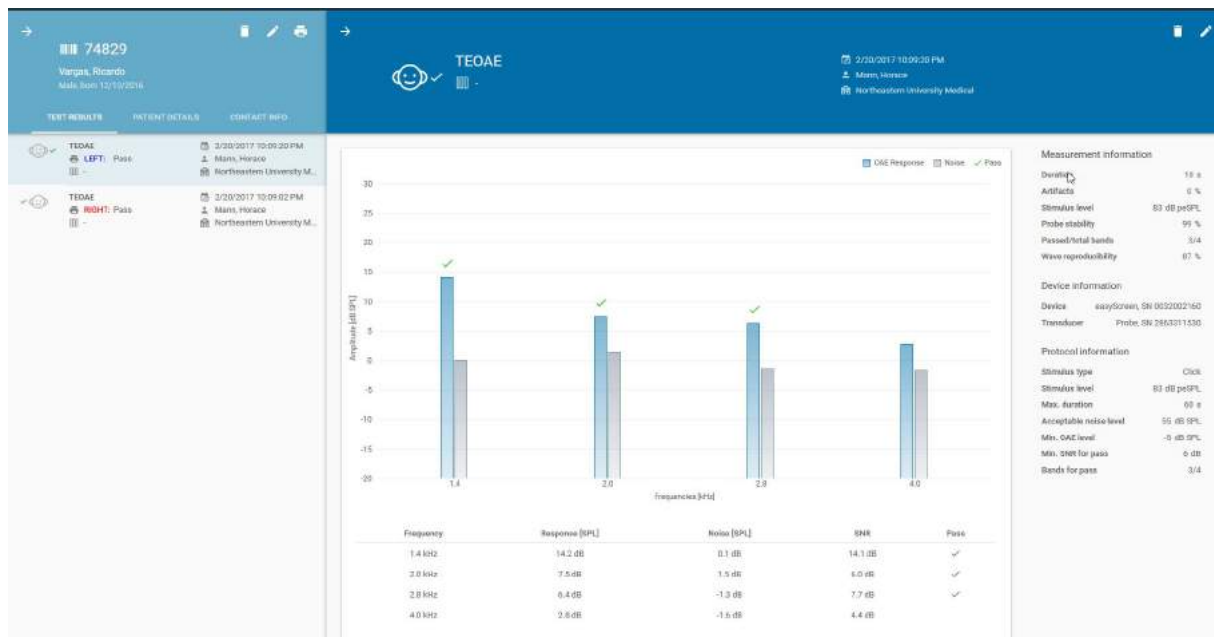

3.14.1 Visualizzazione grafica

Viene visualizzato un grafico da revisionare e che riflette i dati del test per il test selezionato.

Per i test DPOAE e TEOAE, un grafico a barre visualizza i valori di ampiezza del rumore e risposta OAE per ciascuna delle frequenze del test. Al di sotto del grafico a barre viene visualizzata una tabella di valori numerici.

Per i test ABR, un grafico temporale visualizza l'avanzamento del test verso l'ottenimento di un valore di superamento del test nel tempo.

3.14.2 Informazioni sulle misurazioni

In questa sezione, sono visualizzati i valori misurati del test che varieranno a seconda del tipo di test e del dispositivo usato per il test.

3.14.3 Informazioni sul dispositivo

Questa sezione visualizza le informazioni sul dispositivo e sul trasduttore utilizzato per l'esecuzione del test.

3.14.4 Informazioni sul protocollo

I parametri del protocollo in vigore per i test vengono visualizzati in questa sezione, insieme al nome del protocollo.

3.15 Modifica dei campi del test


Alcuni campi relativi al test possono essere modificati o aggiunti selezionando l'icona **Modifica** che appare quando è aperta la visualizzazione dei dettagli del test.



3.15.1 Finestra Modifica delle informazioni del test

Nella schermata Modifica delle informazioni del test possono essere modificati solo alcuni dati al fine di aggiungere informazioni che non erano disponibili al momento del test o per correggere eventuali errori di inserimento.

Come si può vedere a destra, la schermata di modifica per il test ABR binaurale contiene informazioni per entrambe le orecchie.

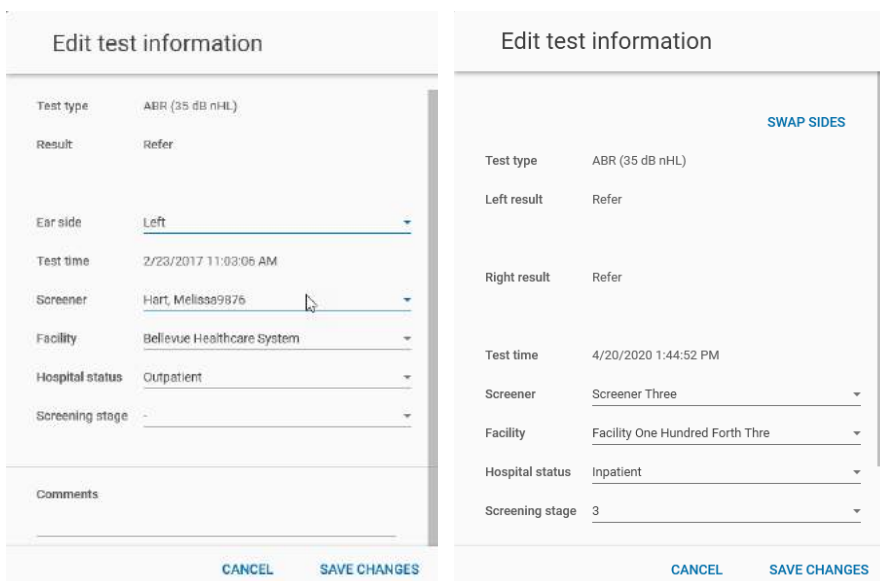

3.15.1.1 Campi non editabili

I campi relativi al tipo di test, al risultato, alla data e orario del test non possono essere modificati ma possono essere consultati.

3.15.1.2 Motivo della sospensione

Se il risultato di un test è impostato su "Incompleto", sarà presente un campo in cui specificarne il motivo con le seguenti opzioni:

- Impossibile eseguire il test
- Non valido

3.15.1.3 Lato orecchio

È possibile cambiare l'orecchio nel caso in cui l'analizzatore abbia commesso un errore nel documentare l'orecchio sottoposto a test durante lo screening.

Per un test ABR binaurale, è disponibile il pulsante **Scambia i lati**. Una volta selezionato, i risultati e i dati di avanzamento del test per le orecchie verranno scambiati. Questa funzione è disponibile per l'uso nell'eventualità in cui l'analizzatore abbia posizionato in maniera scorretta gli auricolari all'interno delle orecchie del paziente per l'esecuzione del test e se ne sia accorto solamente dopo il completamento del test.

3.15.1.4 Analizzatore

È possibile aggiungere o modificare il nome dell'analizzatore utilizzando il menu a discesa che visualizza l'elenco di operatori definito nella sezione di configurazione di HearSIM™.

3.15.1.5 Struttura

È possibile aggiungere o modificare il nome della struttura in cui è stato eseguito lo screening utilizzando il menu a discesa che visualizza l'elenco di strutture definito nella sezione di configurazione di HearSIM™.

3.15.1.6 Stato ospedaliero

È possibile aggiungere o modificare lo stato ospedaliero del paziente al momento dello screening utilizzando il menu a discesa che include le seguenti opzioni:

- Paziente ricoverato
- Paziente esterno
- Visita a domicilio

3.15.1.7 Fase dello screening


La fase dello screening si può selezionare da un elenco a discesa.

3.15.1.8 Commenti sul test

In questo campo è possibile aggiungere o modificare un commento relativo allo screening.

3.15.2 Salvataggio o eliminazione delle modifiche

Per uscire dalla visualizzazione Modifica informazioni del test, salvare o annullare le modifiche agendo sui comandi posti nell'area inferiore della vista.

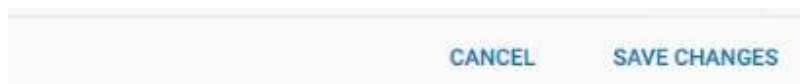

3.15.2.1 Salva modifiche

Selezionando **Salva modifiche** sarà possibile salvare le modifiche apportate e chiudere la schermata di modifica delle informazioni del test.

3.15.2.2 Annulla

Selezionando **Annulla** si cancelleranno tutte le modifiche apportate senza alcun avviso e tutti i campi torneranno ai valori precedenti, la schermata di modifica delle informazioni del test verrà chiusa.

3.16 Stampa del rapporto di un paziente

È possibile stampare un rapporto del test per un paziente durante la visualizzazione dell'elenco dei risultati del test per tale paziente.


3.16.1 Stampa predefinita

Con l'elenco aperto, selezionare l'icona **Stampa rapporto del paziente** sulla parte alta della finestra. Si aprirà automaticamente un'anteprima di stampa di un rapporto contenente l'ultimo test per ogni orecchio e per ogni tecnologia impiegata.



3.16.2 Selezione dei test


Se si preferisce selezionare test specifici da stampare piuttosto che includere quelli predefiniti, trascinare il mouse sull'icona della stampante nella riga dei test che si desidera stampare. L'icona della stampante diventerà una casella spuntata. Selezionare la casella per scegliere il test da stampare. Ripetere l'operazione per tutti i test che si desidera includere nel rapporto.

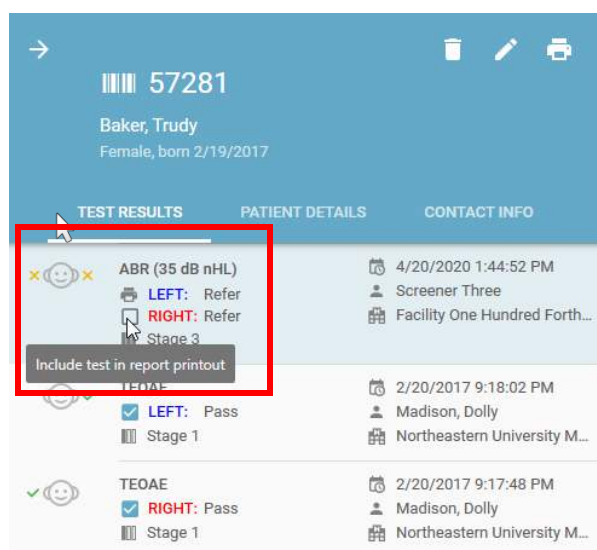

Sui test selezionati sarà visualizzata la casella rimasta visibile mentre si passa da un test all'altro.

3.16.3 Esecuzione della stampa del rapporto

Dopo aver scelto i test desiderati, selezionare l'icona di **Stampa** nell'angolo superiore destro dello schermo per visualizzare la schermata Anteprima di stampa.

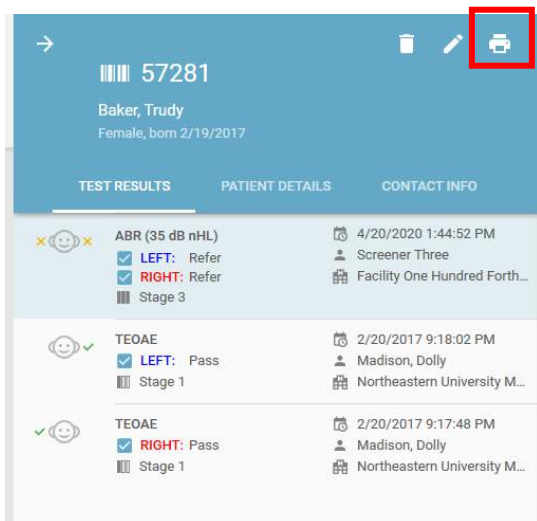

3.16.4 Anteprima di stampa

Viene visualizzata la seguente anteprima di stampa del rapporto del test:



I comandi consentono di eseguire le seguenti attività:

- Selezionare la stampante desiderata
- Impostare la dimensione della pagina
- Impostare i margini
- Impostare l'orientamento
- Selezionare la modalità colore
- Stampa
- Annulla

3.16.5 Formato rapporto

Il rapporto del test presenta un formato predefinito che visualizza le seguenti informazioni.

- Nome e logo della struttura (se questi sono stati configurati nella schermata Amministrazione/Stampa)
- Titolo
- Informazioni sul paziente
- Risultati dello screening

3.17 Trasferimento dei dati da un dispositivo a HearSIM™

Per trasferire le informazioni su test e pazienti dal dispositivo a HearSIM™, collegare il dispositivo al PC tramite il cavo d'interfaccia USB fornito con il dispositivo.

Quando il dispositivo viene rilevato dal software HearSIM™, verrà visualizzata un'immagine del dispositivo nell'angolo inferiore sinistro dello schermo del PC, a indicare lo stato del dispositivo. Lo schermo del dispositivo visualizzerà "Controllato dal PC" o "Pronto" quando viene rilevato da HearSIM™.

NOTA: il dispositivo non sarà rilevato se è in corso la visualizzazione di una fase qualsiasi di un test (a partire dalla schermata di preparazione del paziente fino alla schermata di completamento del test). Tornare alla schermata iniziale se ciò fosse necessario per stabilire la connessione.

3.17.1 Importazione dei dati del dispositivo

Consultare la sezione 3.7.1 per informazioni sulle possibili immagini del dispositivo che possono essere visualizzate quando HearSIM™ ha rilevato che il dispositivo è connesso.

Se sul dispositivo sono presenti dati del paziente e/o del test, verrà visualizzata la seguente immagine:



Dispositivo connesso, dati del test e del paziente presenti nel dispositivo

Fare clic sull'immagine del dispositivo per cominciare a importare i dati del dispositivo in HearSIM™.

Dopo aver fatto clic sull'immagine per iniziare l'importazione, verrà visualizzata una finestra in cui selezionare **Importa** per eseguire il trasferimento.



Al completamento del trasferimento, i dati verranno automaticamente cancellati dal dispositivo.

Il dispositivo, quindi, sarà pronto per trasferire i nomi dei pazienti selezionati da HearSIM™ oppure per inserire direttamente i dati ed eseguire i test sui nuovi pazienti.

Selezionare il pulsante **Annulla** per annullare l'operazione.

3.17.1.1 Modelli di screening rispetto ai modelli di dispositivi diagnostici



I modelli di screening di alcuni dispositivi OAE supportati da HearSIM™ utilizzano protocolli di test dotati dei seguenti nomi:

- DP 4s
- DP 2s
- TE 32s
- TE 64s

I test eseguiti usando questi protocolli sono supportati da HearSIM™ e saranno trasferiti in HearSIM™/OtoAccess®.

Alcuni modelli di questi dispositivi permettono di eseguire i test usando protocolli di screening o di diagnostica con nomi diversi rispetto a quelli dell'elenco di cui sopra. Quando si incontrano tali dati durante il trasferimento dati in HearSIM™, questi test **non saranno importati in HearSIM™ e saranno eliminati dal dispositivo**.



NOTA IMPORTANTE: I test eseguiti con protocolli non supportati **NON saranno trasferiti** nel database e saranno eliminati immediatamente dal dispositivo dopo l'avvenuto trasferimento. Assicurarsi di stampare o salvare i risultati dei test da protocolli non supportati prima di trasferire i dati in HearSIM™.

3.17.2 Risoluzione dei conflitti di unione

Quando i dati del dispositivo vengono trasferiti in HearSIM™, i dati verranno uniti qualora l'ID del paziente trasferito dal dispositivo corrisponda a un ID esistente nel database di HearSIM™.

Se l'ID paziente corrisponde ma altri campi di base del paziente presentano delle voci contrastanti, verrà visualizzata una finestra che consente di verificare il conflitto e risolverlo prima di completare il trasferimento.

Resolve conflict for patient ID 694783jsjd

An existing patient record for patient id 694783jsjd was found in the database.
Please resolve any conflicts by selecting which data to keep.
Alternatively, enter a new patient ID to create a new record.

☒ Merge with existing record

			
Last name	May	May	May
First name	Carl	Karl	?
Gender	Male	Male	Male
Birthdate	7/17/2019	7/18/2019	?
Time of birth [hh:mm]	08:14	08:14	08:14

☐ Create new record with different patient ID

694783jsjd

SKIP RESOLVE

La tabella mostra i campi di base del paziente all'interno delle righe. Nelle colonne sono visualizzate le voci dei vari campi del dispositivo  rispetto a HearSIM™ . L'ultima colonna mostra le voci che saranno salvate in HearSIM, dopo aver selezionato la voce corretta, risolvendo gli eventuali conflitti presenti.

Per risolvere il conflitto, osservare le righe che presentano il simbolo del punto interrogativo  nell'ultima colonna. Quindi selezionare la voce corretta per tale campo cliccando sul valore del dispositivo oppure sul valore di HearSIM™.

Resolve conflict for patient ID 694783jsjd

An existing patient record for patient id 694783jsjd was found in the database.
Please resolve any conflicts by selecting which data to keep.
Alternatively, enter a new patient ID to create a new record.

☒ Merge with existing record

			
Last name	May	May	May
First name	Carl	Karl	Carl
Gender	Male	Male	Male
Birthdate	7/17/2019	7/18/2019	7/18/2019
Time of birth [hh:mm]	08:14	08:14	08:14

☐ Create new record with different patient ID

694783jsjd

SKIP RESOLVE

Dopo aver selezionato la voce del campo appropriata, selezionare il pulsante **RISOLVI** per salvare il paziente e i test ad esso associati in HearSIM. I dati per questo paziente saranno salvati nel database di HearSIM, esattamente come sono visualizzati nell'ultima colonna.

Se si decide di selezionare **SALTA** per saltare il paziente, questo non verrà trasferito in HearSIM e non sarà cancellato dal dispositivo.

3.17.2.1 Modifica dell'ID del paziente

Mentre si analizzano i dati in conflitto, il dispositivo e il programma HearSIM™ potrebbero usare lo stesso ID paziente a causa di un errore di inserimento, pur trattandosi di due diversi pazienti. In questo caso, l'unione dei risultati del test non rappresenta l'opzione adeguata.

Per risolvere questa situazione si può scegliere l'opzione **Crea nuovo record con ID paziente diverso** e inserire un nuovo ID per il paziente da trasferire dal dispositivo.

Resolve conflict for patient ID 49dkjfdkjasd

An existing patient record for patient id 49dkjfdkjasd was found in the database.
Please resolve any conflicts by selecting which data to keep.
Alternatively, enter a new patient ID to create a new record.

☐ Merge with existing record

☒ Create new record with different patient ID

49dkjfdkjasd

Patient id is not unique

SKIP RESOLVE

Quando si modifica l'ID del paziente nel campo, le informazioni saranno visualizzate se l'ID corrisponde ancora al paziente già salvato in HearSIM™. Se non ci sono corrispondenze, allora si può creare il nuovo paziente in HearSIM™ quando si **RISOLVE** il conflitto. I campi del paziente provenienti dal dispositivo saranno salvati insieme ai test associati sotto questo nuovo numero di ID paziente.

Resolve conflict for patient ID 49dkjfdkjasd

An existing patient record for patient id 49dkjfdkjasd was found in the database.
Please resolve any conflicts by selecting which data to keep.
Alternatively, enter a new patient ID to create a new record.

☐ Merge with existing record

☒ Create new record with different patient ID

49dkj432

SKIP RESOLVE

3.17.3 Importazione di test non assegnati




Un tipo di dispositivo di test supportato consente di eseguire i test sul dispositivo che non siano associati al paziente specifico. Quando questo dispositivo è connesso a HearSIM™ e sono presenti dei test non assegnati, questi test saranno temporaneamente conservati nella pagina "Test non assegnati" di HearSIM™.

4 Test non assegnati



Un dispositivo supportato da HearSIM™ salva i test di screening con un ID di test come identificatore unico. Questi test si possono trasferire in HearSIM™ e sono salvati in una posizione temporanea in attesa di essere assegnati a un paziente già presente nel database o ad un nuovo paziente.

Dopo il trasferimento dei test in HearSIM™, selezionare la voce del menu Assegna test nel menu principale.

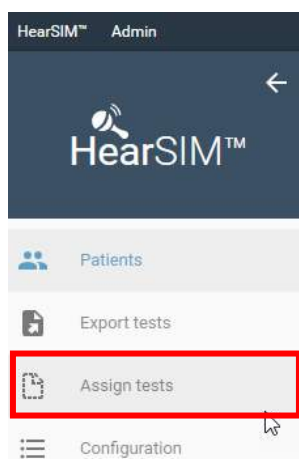

Un elenco di test non assegnati è visualizzato sulla sinistra mostrando il numero di test assegnato dal dispositivo ed anche le altre informazioni del test.

Tests

Test	Count	Time
DPOAE RIGHT: Pass	1	12/2/2019 8:45:45 AM
DPOAE LEFT: Pass	2	12/2/2019 8:46:07 AM
TEOAE LEFT: Pass	3	12/2/2019 8:47:36 AM
TEOAE RIGHT: Pass	4	12/2/2019 8:48:32 AM

Patients

Name	Patient id	Birth date	Last update
Young, Melissa	1456321	5/19/2018	11/26/2019
Winston, Emma	8642421	6/10/2018	11/26/2019
Skagert, Jason	4793486	8/1/2018	11/26/2019
Potts, Nina	86425	6/6/2018	11/26/2019
Miles, Max	858279	2/18/2018	11/26/2019
Jones, Mary	4837277	2/16/2018	11/26/2019
Hansen, Jackson	459222	2/17/2018	11/26/2019
Quincy, Adam	10483272	7/6/2018	11/26/2019
Tuley, Betty	878379	5/18/2018	11/26/2019

4.1 Assegnazione di un test ad un nuovo paziente





Selezionare i test che si desidera assegnare ad un paziente inserendo un segno di spunta nella casella di controllo che compare quando si passa con il mouse su un test nell'elenco.


Tests		
☐	DPOAE RIGHT: Pass	1 12/3/2019 8:45:43 AM
☐	DPOAE LEFT: Pass	2 12/3/2019 8:46:07 AM

Selezionare tutti i test da assegnare al paziente. Quindi selezionare l'icona **Aggiungi nuovi pazienti** per aprire la schermata della voce del Nuovo Paziente. Inserire le informazioni del paziente. Si deve inserire almeno un ID paziente per assegnare il test ad un paziente.

Selezionare **Salva e Seleziona** dopo aver inserito i dati.

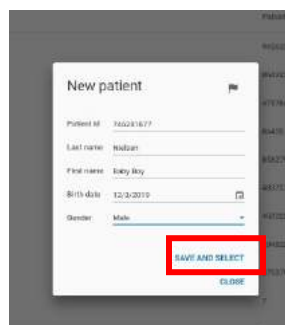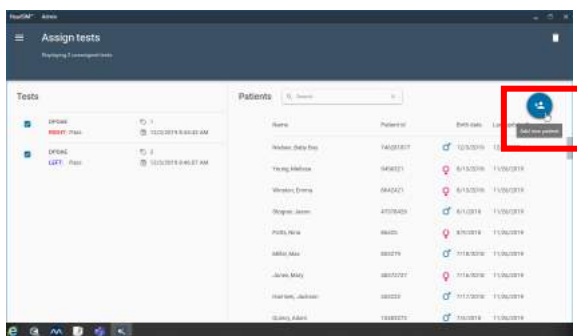

Controllare le scelte effettuate nella schermata successiva per verificare che tutte le informazioni siano corrette. Selezionare **ASSEGNA** per completare la procedura. I test scompariranno dall'elenco una volta che saranno assegnati.

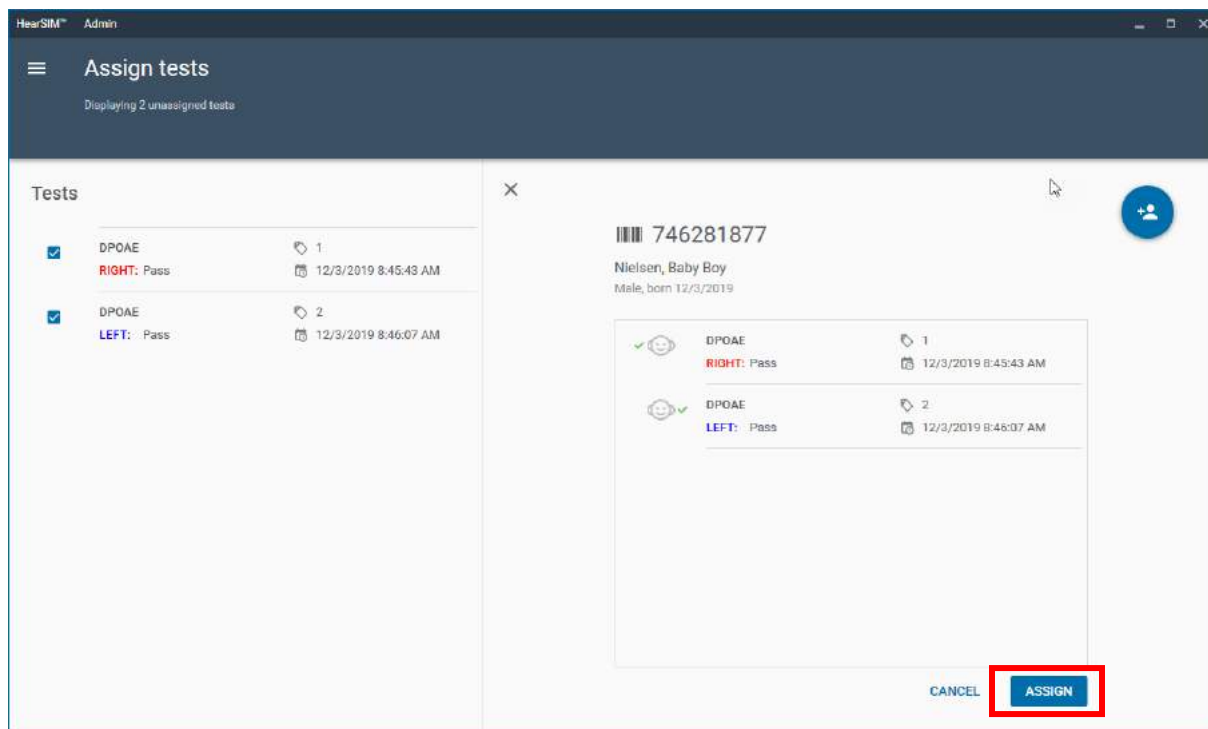


4.2 Assegnazione di un test ad un paziente esistente




Selezionare i test che si desidera assegnare ad un paziente inserendo un segno di spunta nella casella di controllo che compare quando si passa con il mouse su un test nell'elenco.

Selezionare un paziente dall'elenco dei pazienti sul lato destro dello schermo. Usare la funzione di Ricerca per trovare il paziente desiderato inserendo l'ID Paziente o il cognome per ridurre l'elenco di voci corrispondenti.

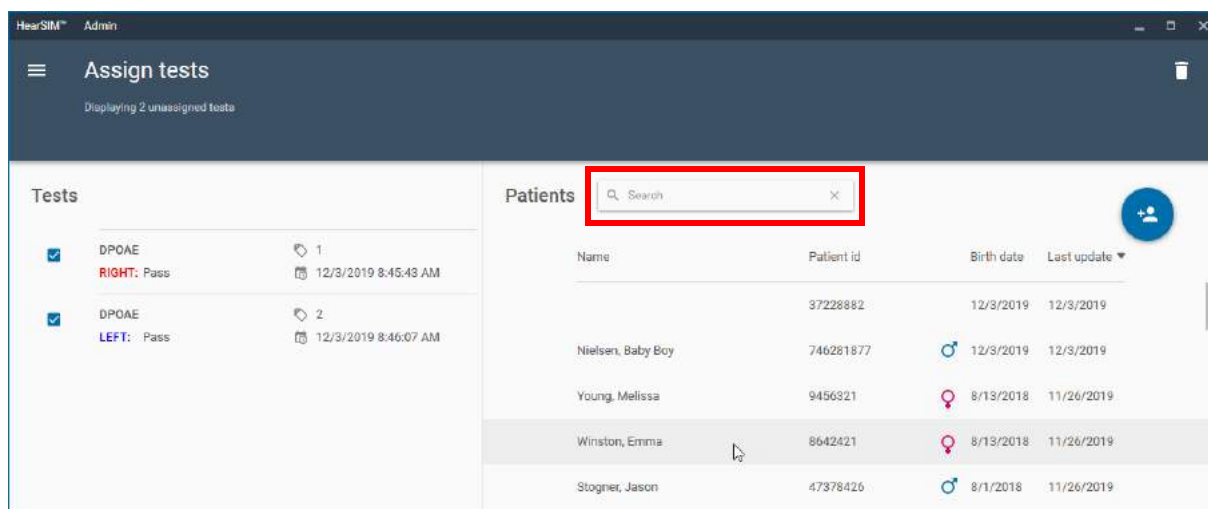


Quando si seleziona un paziente, compare una schermata di conferma. Verificare l'esattezza delle informazioni e selezionare **ASSEGNA**. I test saranno rimossi dall'elenco.

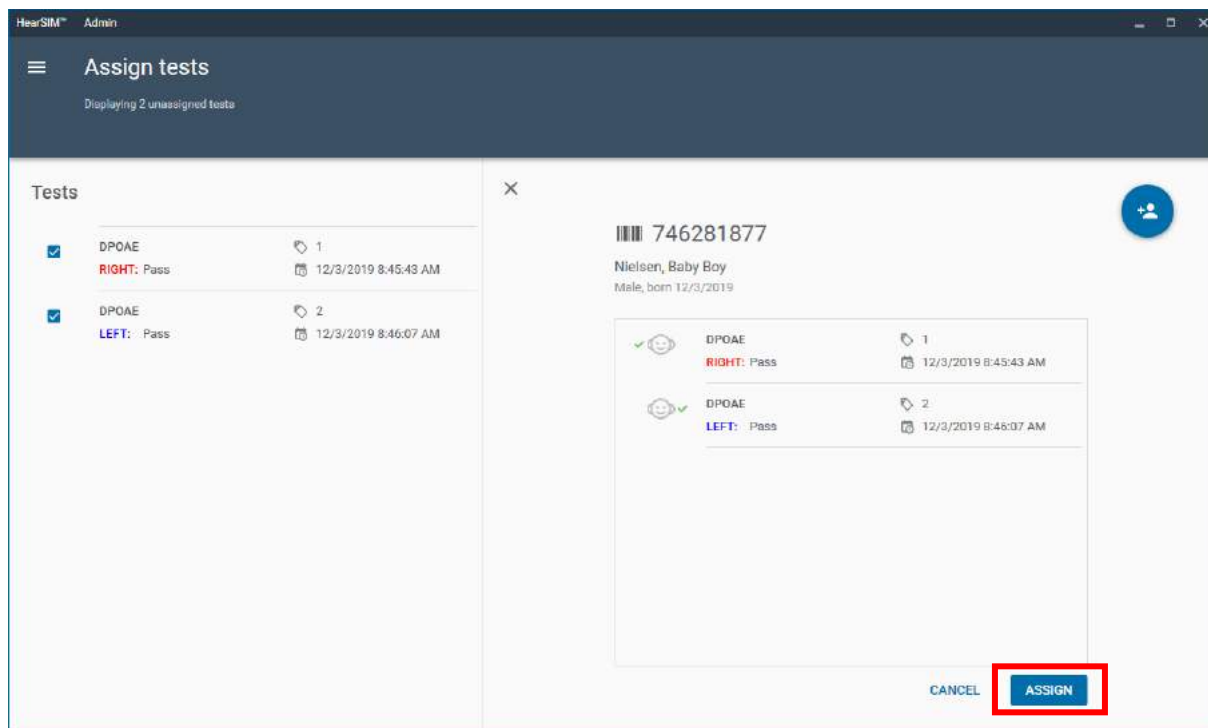

4.3 Eliminazione di test non assegnati



Selezionare il test che si desidera eliminare cliccando sulla sua casella di controllo. Selezionare l'icona del cestino per eliminarlo dall'elenco.

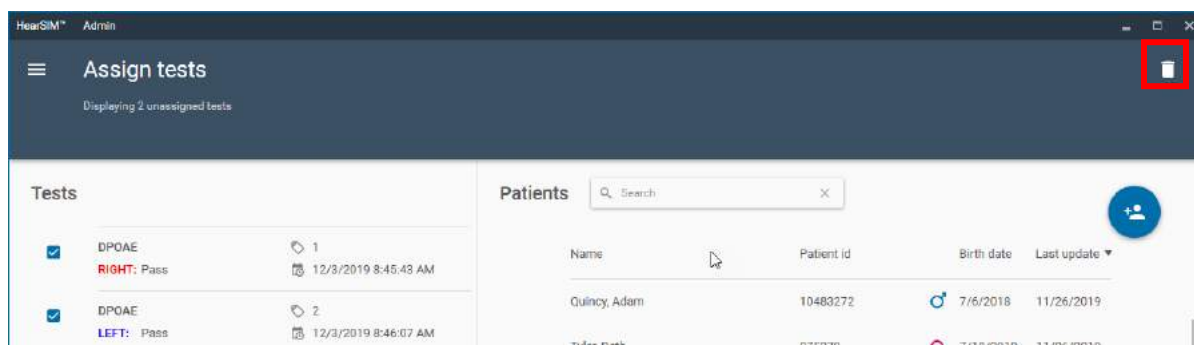

Confermare che si desidera eliminare in modo permanente il test dall'elenco selezionando **ELIMINA**. Oppure, **ANNULLA** l'operazione.

Delete all selected tests?

The selected tests will be permanently deleted.

CANCEL

DELETE

5 Importazione di pazienti

La funzione di importazione pazienti consente di importare in HearSIM un elenco di pazienti da un file esportato da un database diverso. Ad esempio, si possono esportare le informazioni dei pazienti da un sistema di informazioni di un ospedale o da un altro database terzo come HiTrack e poi importarli in HearSIM. Ciò permette di evitare errori di inserimento manuale dei dati.

5.1 Importazione di campi

L'importazione è compatibile con un file di esportazione contenente questi campi di dati:

- ID paziente
- Cognome
- Nome
- Genere
- Data di nascita
- Ora di nascita

5.2 Importazione del formato di file

Sono supportati i seguenti formati di file.

5.2.1 Formato del file HiTrack

Esempio di formato di file di importazione "HiTrack":

```
"123456","Mueller","Anna","F",20190821,"03:00"  
"123455","Meyer","Bernd","M",20190821,"02:00"  
"a67123iojq","Cooper","Chad","M",20190821,"01:00"  
"973441123","PAULSON","Paul","M",20190821,"04:16"
```

5.2.2 XML di HearSIM


Esempio di file XML di HearSIM:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<HearSimXml xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-  
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
Version="0.3" ExportTime="2020-07-28T14:43:00.3559418+02:00">  
  <Patients>  
    <Patient>  
      <Guid>2e392835-af98-4e44-8fab-a9777caccba0</Guid>  
      <PatientId>948727</PatientId>  
      <FirstName>Anna</FirstName>  
      <LastName>Mueller</LastName>  
      <Birthdate>2020-07-27T00:00:00</Birthdate>  
      <TimeOfBirth>03:00</TimeOfBirth>  
      <Gender>Unspecified</Gender>  
    </Patient>  
  </Patients>  
</HearSimXml>
```


5.3 Impostazioni

Per importare i pazienti in HearSIM™, selezionare il Formato del file da importare.

Sfogliare il percorso contenente il file di importazione cliccando sull'icona del documento. Cercare il percorso in cui è stato salvato il file. Selezionarlo e **Aprirlo**.

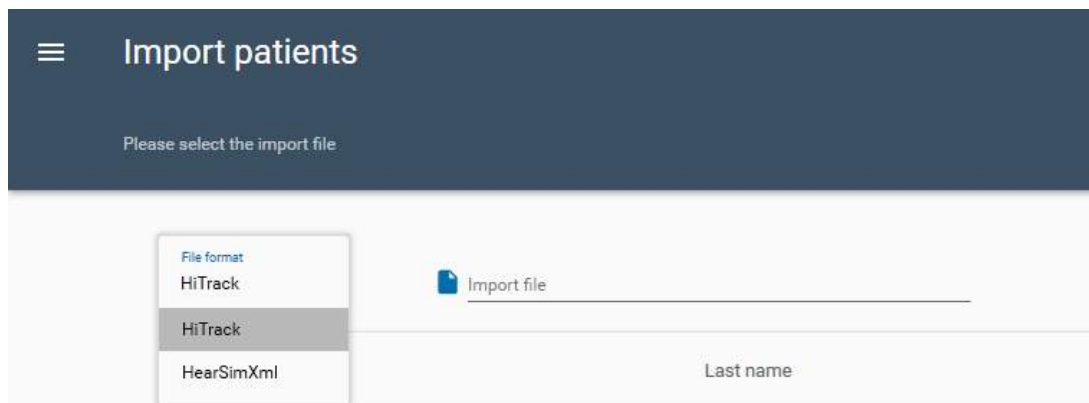


5.4 Eseguire l'importazione

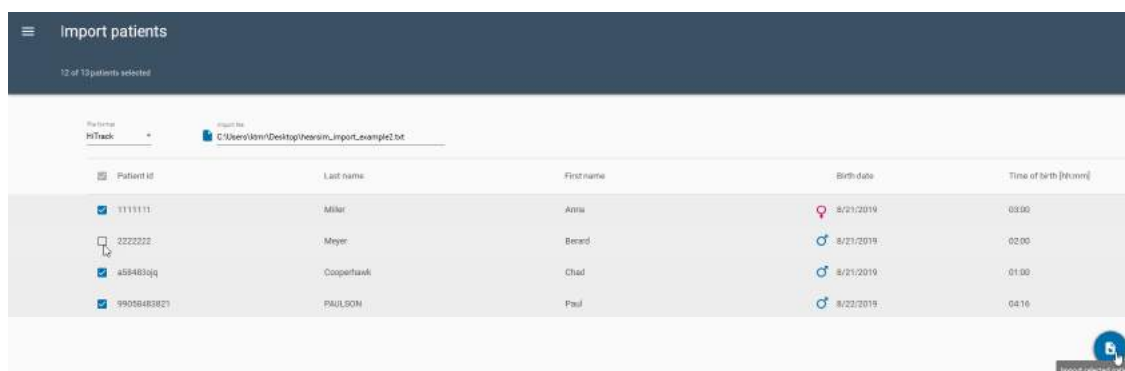

Sarà visualizzato un elenco di pazienti del file. Per impostazione predefinita tutte le voci saranno selezionate per l'importazione. Tuttavia, se si desidera escludere alcuni pazienti dall'importazione, si può deselezionare la casella di controllo vicino al nome.

Per finalizzare l'importazione, selezionare il pulsante **Importa i pazienti selezionati** nell'angolo inferiore destro dello schermo.

Un messaggio di conferma mostrerà il numero di pazienti aggiunti al database di HearSIM™.

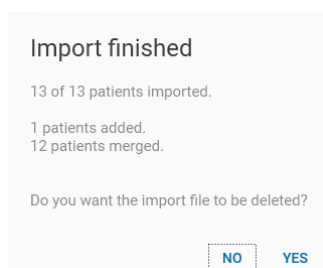

Selezionare **No** per chiudere il messaggio e mantenere il file di importazione nel suo percorso. Selezionare **Si** per chiudere il messaggio e cancellare il file.

6 Esportazione dei test

HiTrack e OZ eSP™ sono gestori di dati di terze parti ideati in modo specifico per gestire i dati di screening uditivo di neonati. HearSIM™ consente di esportare i dati di screening in formati compatibili con HiTrack o OZ eSP™.

Esistono due metodi per esportare i dati di HearSIM™ nel formato di file HiTrack o OZ eSP™.

6.1 Esportazione automatica

HearSIM™ può essere configurato per esportare automaticamente i dati di screening in un file compatibile con HiTrack o con OZ eSP™ durante il trasferimento dei dati.

Quando questa funzione è attiva, ogni volta che i dati sono trasferiti in HearSIM™ i dati dei test saranno aggiunti al file specificato.

Consultare la sezione 8.1 per ulteriori informazioni sulla configurazione della funzionalità di esportazione automatica.

6.2 Esportazione manuale

È possibile eseguire in qualsiasi momento un'esportazione manuale dei dati di screening in un file compatibile con HiTrack (hearsim.txt), in un file compatibile con OZ eSP™ (hearsim.oz), un formato di file con valori delimitati da virgole (hearsim.csv) o in formato XML (hearsim.xml).

6.2.1 Finestra di dialogo Esporta test

Selezionare la voce Esporta test nel menu HearSIM™. Sono presenti diverse impostazioni che consentono di definire i criteri per l'esportazione.

The screenshot shows the 'Export tests' window. On the left, under 'Search parameters', there are date pickers for 'Start date' (9/1/2016) and 'End date' (9/30/2016). Below these are two checkboxes: 'Exclude incomplete results' (checked) and 'Exclude exported results' (checked). There is also a 'Test date' dropdown menu. A blue 'SEARCH' button is at the bottom. The right side of the window displays a list of test results with columns for test ID, ear, result, and patient information.

Test ID	Ear	Result	Patient Information
19812853	Left ear	TEOAE Pass	Prescott, Abigail 9/30/2016 13:38:44 O'Hara, MaryC127462 Hope Memorial Hospital
19812853	Right ear	TEOAE Pass	Prescott, Abigail 9/30/2016 13:38:44 O'Hara, MaryC127462 Hope Memorial Hospital
392847563	Right ear	TEOAE Refer	Menikov, Olga 9/30/2016 12:57:44 Francis, Corinne765 Bloomington Children's Hospital
392847563	Left ear	TEOAE Pass	Menikov, Olga 9/30/2016 12:57:44 Francis, Corinne765 Bloomington Children's Hospital

6.2.1.1 Intervallo di tempo

Questi due campi consentono di impostare la data di inizio e di fine per i test che si desiderano esportare. Inserire la data desiderata oppure usare il calendario per selezionarla.

6.2.1.2 Escludi i risultati incompleti

Attivare questa impostazione se si desidera esportare solo i risultati di screening con risultato Superato o Non Superato e non i test incompleti.

6.2.1.3 Escludi i risultati esportati

Attivare questa impostazione per escludere dall'esportazione qualsiasi test che sia stato precedentemente esportato in un file.

NOTA: I record "Ragione del mancato screening" non verranno esclusi utilizzando questa funzione.

6.2.1.4 Cerca

Dopo aver impostato i criteri per l'esportazione, selezionare il pulsante **Ricerca** per eseguire la ricerca nel database dei test che soddisfino i criteri impostati.

6.2.1.5 Elenco dei test da esportare

Dopo aver eseguito la ricerca, l'elenco verrà aggiornato in modo da visualizzare un elenco di test che saranno esportati. Ciò consente di analizzare l'elenco e affinare i criteri di esportazione, se necessario.


6.2.1.6 Metodo di ordinamento dell'elenco dei test da esportare

L'elenco dei test può essere ordinato per data, Id paziente o nome del paziente.

6.2.2 Esporta



Selezionare il pulsante Esporta per procedere con l'esportazione. Apparirà la finestra di dialogo Salva come per definire la destinazione, il nome del file e il tipo di file (HiTrack, con valori delimitati da virgole, HearSIM™, XML o OZ eSP™ Binary). Si consiglia di utilizzare il nome predefinito "hearsim.xxx" che può, tuttavia, essere modificato a discrezione dell'utente.

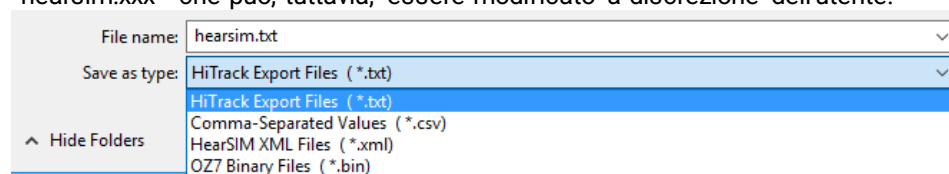

Dopo aver eseguito queste operazioni, selezionare Salva per effettuare l'esportazione e salvarla nel percorso di destinazione prescelto.

7 Configurazione

La sezione di Configurazione di HearSIM™ consente la configurazione di diversi elenchi tra cui i seguenti:

- Analizzatori (*)
- Strutture (*)
- Medici
- Fattori di rischio (*)
- Appartenenza etnica (*)
- Lingue
- Tipi di nido
- Caratteristiche razziali
- Assicurazioni
- Livello di istruzione
- Relazioni (con il bambino)

Questi elenchi sono utilizzati da HearSIM e alcuni possono essere trasferiti nel dispositivo.



Solo un dispositivo con schermo tattile supporta il trasferimento di alcuni elenchi configurati nel dispositivo.

Le funzioni di aggiunta ed eliminazione dei valori negli elenchi sono uguali per tutti gli elenchi. Verrà descritto in dettaglio solo per gli elenchi Analizzatore, Strutture e Fattori di rischio. Attenersi alle medesime istruzioni per configurare gli altri elenchi.

7.1 Analizzatori

Qui sono gestiti i nomi degli analizzatori e le password che saranno trasferiti al dispositivo.


7.1.1 Aggiunta di operatori

Selezionare l'icona **AGGIUNGI**  per aprire i campi ed inserire una nuova password e il nome di un nuovo analizzatore. Dopo aver inserito le informazioni, selezionare il comando **AGGIUNGI** per salvarle oppure **ANNULLA** per annullare l'operazione senza salvare.



7.1.2 Cancellazione di analizzatori

Selezionare un nome facendo clic su di esso e quindi selezionare l'icona **Altro** per aprire un menu a comparsa che include il comando **Rimuovi**. Selezionarlo per eliminare il nome dell'analizzatore dall'elenco.

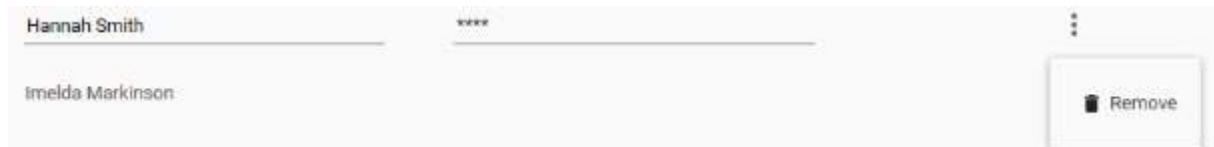

7.1.3 Modifica delle password

Dopo l'immissione degli analizzatori, le password vengono visualizzate nell'elenco con *****. Tuttavia, la password può essere visualizzata e modificata selezionando il nome dell'analizzatore e facendo clic con il mouse sul campo della password.



7.2 Strutture


I nomi delle strutture sono gestiti qui. Questa lista viene utilizzata come elenco a discesa nei campi relativi alla struttura di nascita e di screening.

7.2.1 Aggiunta di strutture

Selezionare l'icona **AGGIUNGI** per aprire il campo in cui inserire il nome della nuova struttura. Dopo aver inserito le informazioni, selezionare il comando **AGGIUNGI** per salvarle oppure **ANNULLA** per annullare l'operazione senza salvare.

7.2.2 Cancellazione di strutture

Selezionare una struttura facendo clic su di essa e quindi selezionare l'icona **Altro** per aprire un menu a comparsa che include il comando **Rimuovi**. Selezionarlo per eliminare il nome della struttura dall'elenco.

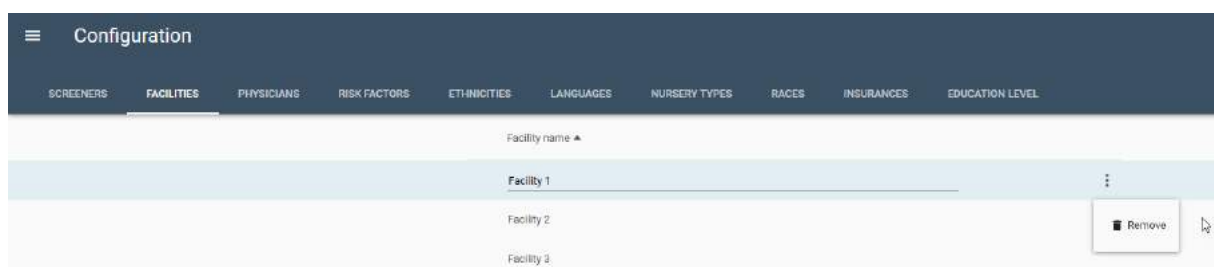


7.3 Fattori di rischio

L'elenco dei fattori di rischio è gestito qui.

7.3.1 Aggiunta dei fattori di rischio

L'elenco dei fattori di rischio è precompilato con i fattori di rischio indicati dalla Joint Committee for Infant Hearing così come da fattori di rischio familiari.

Selezionare l'icona **AGGIUNGI**  per aprire il campo in cui inserire un nuovo fattore di rischio. Dopo aver inserito le informazioni, selezionare il comando **AGGIUNGI** per salvarle oppure **ANNULLA** per annullare l'operazione senza salvare.

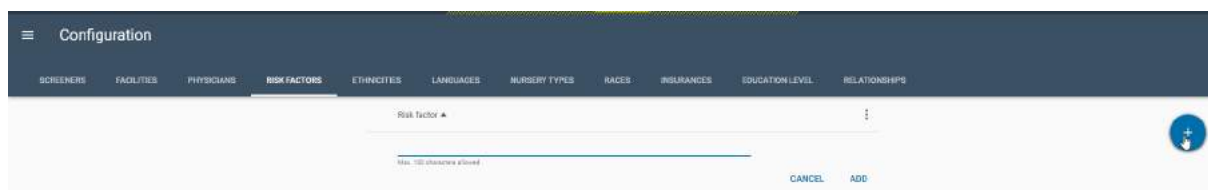

7.3.2 Cancellazione dei fattori di rischio

Selezionare un fattore di rischio facendo clic su di esso e selezionare l'icona **Altro**  vicina per aprire un menu a comparsa contenente il comando **Rimuovi**. Selezionarlo per eliminare il fattore di rischio dall'elenco.


7.3.3 Ripristino dei predefiniti del produttore

I seguenti elenchi sono preconfigurati con dei valori. Alcuni si basano su HiTrack, un database di terze parti di screening dell'udito di neonati.

- Fattori di rischio (*)
- Appartenenza etnica (*)
- Lingue
- Tipi di nido
- Razza
- Assicurazione
- Livello di istruzione
- Relazioni

Si può scegliere di modificare gli elenchi preconfigurati per inserire i propri valori. Tuttavia, se si utilizza HiTrack, ciò potrebbe invalidare le voci in modo tale da non poter essere esportate in HiTrack. Modificare gli elenchi preconfigurati solo se non si utilizzeranno per scopi di esportazione in HiTrack.

Per ripristinare i valori nell'elenco dei predefiniti del produttore, cliccare sull'icona **Altre Opzioni** accanto alla riga di intestazione dell'elenco per aprire un menu di scelta rapida con il comando **Ripristina predefiniti**. Selezionarlo per ritornare ai predefiniti del produttore.

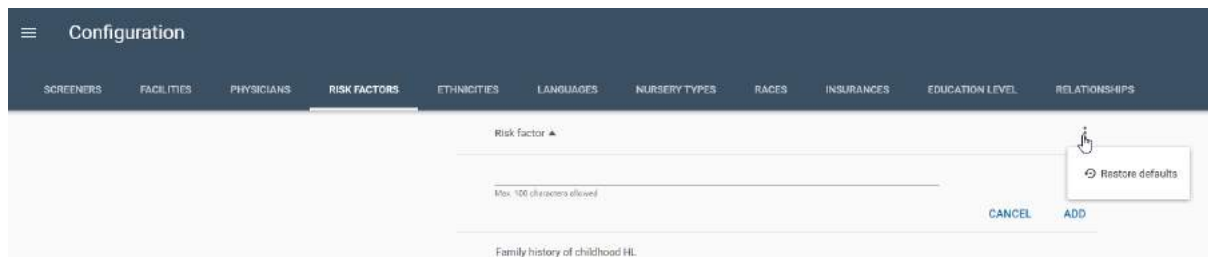


The screenshot shows the 'Configuration' page with a dark blue header. The 'RISK FACTORS' tab is selected. Below the header, there is a table with columns for 'Risk Factor', 'Max 100 characters allowed', and 'Family history of childhood HL'. A dropdown menu is open on the right side of the table, showing the 'Restore defaults' option. The 'CANCEL' and 'ADD' buttons are visible at the bottom right of the table.

8 Dispositivi

La pagina Dispositivi di HearSIM™ consente di configurare le opzioni da impostare sul tipo di

dispositivo dotato di schermo tattile.  Questo è l'unico tipo di dispositivo che supporta le funzioni descritte in questa sezione.

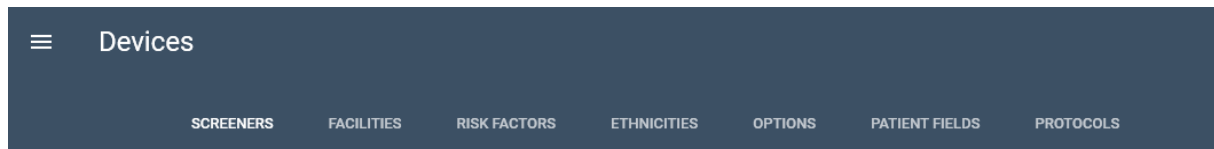

Nella pagina dei Dispositivi è possibile scegliere i nomi degli operatori che si desidera trasferire al dispositivo. È anche possibile visualizzare i vari protocolli di screening disponibili per l'uso e selezionare quelli che si desidera trasferire nel dispositivo.

Inoltre si possono controllare gli elenchi impostati nella sezione di Configurazione e scegliere di trasferire questi e le altre impostazioni, anche rendendo obbligatori alcuni campi, nel dispositivo.

8.1 Analizzatori



Qui sono visualizzati automaticamente i nomi degli analizzatori che sono stati aggiunti nella sezione di Configurazione.

8.1.1 Stato attivo/inattivo per il trasferimento al dispositivo

È possibile impostare un comando **Attivo**  (o **Inattivo** ). Solo gli analizzatori attivi di questo elenco verranno trasferiti al dispositivo.

Screener ID ▲	Screener code	Device password	Transfer to device
Blake Sheldie		Password	
Elisabeth Shore		Password	
Hallie Caplan		Password	

8.1.2 Ordine

L'ordine dell'elenco può essere modificato qui prima del trasferimento al dispositivo. Ad esempio, è possibile collocare i nomi degli analizzatori che eseguono la maggior parte degli screening in cima all'elenco per evitare di dover scorrere la lista sul dispositivo per localizzarli.

È possibile selezionare l'intestazione della colonna **ID analizzatore** per impostare l'elenco in ordine

alfabetico dalla A alla Z. Inoltre, davanti al nome viene visualizzato un comando **Trascina**  quando si passa il mouse sopra la riga di un analizzatore. Si può cliccare, tenere premuto il comando di trascinamento, spostare e rilasciare il nome dell'analizzatore in una diversa posizione all'interno dell'elenco.

8.2 Strutture



Qui sono visualizzati automaticamente i nomi delle strutture aggiunte nella sezione Configurazione. Tutti i nomi delle strutture nell'elenco saranno inviati al dispositivo se si decide di trasferirli.

Nel dispositivo, è possibile impostare la struttura di screening in cui viene eseguito il test, ma è anche necessario abilitare le impostazioni dei campi relativi alle opzioni e al test. Consultare la sezione 7.4.

Devices	
SCREENERS	FACILITIES
RISK FACTORS	ETHNICITIES
OPTIONS	PATIENT FIELDS
PROTOCOLS	
Facility name	
Facility code	
Homewood Regional Medical Center	
Hope Memorial Hospital	
Illinois Children's Hospital	

8.3 Fattori di rischio



Qui sono visualizzati automaticamente i Fattori di rischio impostati nella sezione Configurazione. Tutti i fattori di rischio nell'elenco verranno inviati al dispositivo se si decide di trasferirli.

Devices	
SCREENERS	FACILITIES
RISK FACTORS	ETHNICITIES
OPTIONS	PATIENT FIELDS
PROTOCOLS	
Risk factor	
Family history of childhood HL	
Birth weight < 1500 grams	
Postnatal infection assoc. w/ SNHL (e.g. meningitis)	
Ototoxic medications	

8.4 Appartenenza etnica




Le etnie impostate nella sezione Configurazione vengono automaticamente visualizzate qui. Tutte le etnie nell'elenco verranno inviate al dispositivo, se lo si desidera.

8.5 Opzioni



Le opzioni del dispositivo sono impostate qui in preparazione al trasferimento al dispositivo. Ognuna di esse può essere impostata sullo stato attivo o inattivo.

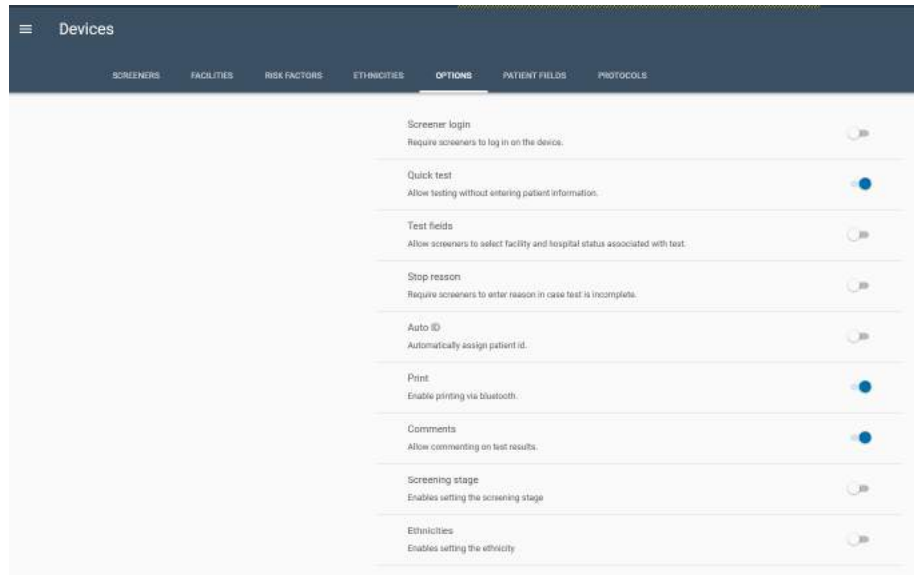

8.5.1 Login analizzatore

Attivare questo comando se si desidera che un analizzatore selezioni il proprio nome e immetta la relativa password al fine di utilizzare il dispositivo. In questo modo il nome dell'analizzatore è automaticamente associato agli screening eseguiti.

Assicurarsi che siano impostati i nomi degli operatori nella sezione Configurazione di HearSIM™, se si attiva questa impostazione sul dispositivo, e che i nomi degli operatori siano attivati per l'invio al dispositivo. Se si abilita questa funzione sul dispositivo ma non si configurano o si trasferiscono i nomi degli operatori, non sarà possibile effettuare il login: questa situazione dovrà essere risolta prima di poter utilizzare lo strumento.

8.5.2 Test rapido

Attivare questo comando se si desidera consentire che i test di screening vengano eseguiti senza la necessità di inserire l'ID paziente.

8.5.3 Campi del test

Attivare questo comando se si desidera salvare le informazioni relative alla struttura di screening e allo stato ospedaliero (paziente ricoverato, esterno o visita a domicilio) insieme ai dati di screening. Se l'accesso dell'analizzatore è disabilitato, questa impostazione consentirà anche di selezionare il nome di un analizzatore da un elenco che verrà salvato insieme al test dello screening.

Assicurarsi che siano impostati i nomi delle strutture nella sezione Configurazione di HearSIM™, se si attiva questa impostazione sul dispositivo. Se si abilita questa funzione sul dispositivo ma non si configurano o si trasferiscono i nomi delle strutture, non sarà possibile eseguire un test, questa situazione dovrà essere risolta.

8.5.4 Motivo della sospensione

Attivare questo comando se si desidera che gli operatori inseriscano un motivo per i test incompleti impostati su "Non valido" o "Impossibile eseguire il test".

8.5.5 ID automatico

E' richiesto l'inserimento di un ID paziente per salvare i test sul dispositivo e, in seguito, per trasferirli in HearSIM™. In genere, tale ID viene assegnato al paziente dall'ospedale. Attivare questo comando se i propri pazienti non hanno alcun ID e si desidera che il dispositivo ne assegni uno automaticamente.

8.5.6 Stampa



Attivare questo comando se è stata acquistata la stampante wireless per etichette. Tale prodotto rappresenta un'opzione offerta insieme al dispositivo.

8.5.7 Osservazioni

Attivare questo comando se si desidera avere la possibilità di inserire un commento sul dispositivo associato al test di screening.

8.5.8 Fase dello screening

Attivare questo controllo per poter inserire un valore (1,2 o 3) sul dispositivo per la fase dello screening da associare al test dello screening.

8.5.9 Appartenenza etnica

Attivare questo controllo se si desidera selezionare un valore dall'elenco dell'appartenenza etnica quando si inseriscono le informazioni del paziente nel dispositivo.

8.6 Campi del paziente



Abilitare o disabilitare i campi seguenti per renderli obbligatori per il completamento prima di consentire il salvataggio del paziente sul dispositivo e quando si aggiunge un nuovo paziente in HearSIM™.

- ID paziente (obbligatorio per impostazione predefinita)
- Cognome
- Nome
- Genere
- Consenso per lo screening
- Consenso per il tracciamento
- Appartenenza etnica

8.7 Protocolli



Ogni dispositivo è consegnato pronto per eseguire un protocollo di screening predefinito del produttore per ciascun metodo di test acquistato con il proprio strumento (ABR, TEOAE, DPOAE). Per rivedere i parametri dei protocolli alternativi o trasferire più di un protocollo per metodo di test nel dispositivo, aggiungere altri protocolli in questa pagina, quindi rivedere e selezionare quelli da trasferire al dispositivo.

8.7.1 Aggiunta di protocolli all'elenco

La pagina Protocollo è vuota per impostazione predefinita. Per accedere all'elenco dei protocolli disponibili sul disco rigido del PC durante l'installazione di HearSIM, selezionare il pulsante Aggiungi protocollo.



Verrà visualizzata una finestra del browser di Windows nella posizione dei file dei protocolli disponibili salvati sul PC. Il nome del file indicherà se si tratta di un protocollo ABR (ABRIS), DPOAE o TEOAE. Inoltre, il nome del file fornirà informazioni sui parametri dei protocolli, in modo da scegliere quelli da aggiungere alla pagina.

Name	Date modified	Type	Size
IEC	11/3/2020 12:05 PM	File folder	
ABRIS A00 CE-Chirp 35 dB nHL.hpd	9/8/2020 3:34 PM	HPD File	1 KB
ABRIS A01 CE-Chirp 30 dB nHL.hpd	9/8/2020 3:34 PM	HPD File	1 KB
ABRIS A02 CE-Chirp 40 dB nHL.hpd	9/8/2020 3:34 PM	HPD File	1 KB
ABRIS A03 CE-Chirp 45 dB nHL.hpd	9/8/2020 3:34 PM	HPD File	1 KB
ABRIS A04 Click 35 dB nHL.hpd	9/8/2020 3:34 PM	HPD File	1 KB
ABRIS A05 Click 30 dB nHL.hpd	9/8/2020 3:34 PM	HPD File	1 KB
ABRIS A06 Click 40dB nHL.hpd	9/8/2020 3:34 PM	HPD File	1 KB
ABRIS A07 Click 45dB nHL.hpd	9/8/2020 3:34 PM	HPD File	1 KB
ABRIS A08 CE-Chirp 25 dB nHL.hpd	10/20/2020 3:50 PM	HPD File	1 KB
ABRIS A09 Click 25dB nHL.hpd	10/20/2020 3:50 PM	HPD File	1 KB
DPOAE D00 2-5 kHz, 3-4, SNR 6 dB.hpd	9/8/2020 3:34 PM	HPD File	1 KB
DPOAE D01 1.5-4 kHz, 3-4, SNR 6 dB.hpd	9/8/2020 3:34 PM	HPD File	1 KB
DPOAE D02 1.5-6 kHz, 3-5, SNR 6 dB.hpd	9/8/2020 3:34 PM	HPD File	1 KB
DPOAE D05 1.5-6 kHz, 3-6, SNR 7 dB.hpd	9/8/2020 3:34 PM	HPD File	1 KB
TEOAE T00 1.5-4 kHz, 3_4, SNR 4 dB.hpd	9/8/2020 3:34 PM	HPD File	1 KB
TEOAE T01 1.5-4 kHz, 2_4, SNR 6 dB.hpd	9/8/2020 3:34 PM	HPD File	1 KB
TEOAE T02 1.5-4 kHz, 3_4, 80 dB SPL.hpd	9/8/2020 3:34 PM	HPD File	1 KB

Ad esempio, i nomi dei protocolli ABR conterranno informazioni sullo stimolo, ovvero se è un CE-Chirp (predefinito) o un clic, e l'intensità dello stesso.

Per i protocolli DPOAE o TEOAE, il nome del file comprenderà informazioni sulla gamma di frequenza testata, il numero di frequenze da superare rispetto al numero totale di quelle testate e il rapporto segnale/rumore per ottenere un risultato positivo.

È possibile utilizzare i protocolli contenuti nella cartella IEC per i test del tipo. Non se ne consiglia l'uso per gli screening generali.

Selezionare tutti i protocolli da aggiungere alla pagina e premere il pulsante **Apri** nella parte inferiore della finestra del browser.

8.7.2 Tipo di test e nome

Una volta aggiunti alla pagina Protocolli, i protocolli vengono visualizzati nell'elenco con il tipo di test (ABR, DPOAE o TEOAE), il nome, contenente un identificativo univoco (es. A00 o D01), e una descrizione dei parametri più importanti. Questo è il nome che apparirà sul dispositivo.

Test type	Name	Transfer to device
TEOAE	T00 1.5-4 kHz, 60 dB SPL, IEC	☐
TEOAE	T00 1.5-4 kHz, 3/4, SNR 4 dB	☒
TEOAE	T01 1.5-4 kHz, 2/4, SNR 6 dB	☐
TEOAE	T00 1.5-4 kHz, 3/4, 80 dB SPL	☐
DPOAE	D00 2-5 kHz, 3/4, SNR 6 dB	☒
DPOAE	D01 1.5-4 kHz, 3/4, SNR 6 dB	☐
DPOAE	D02 1.5-6 kHz, 3/5, SNR 6 dB	☐
DPOAE	D05 1.5-6 kHz, 3/6, SNR 7 dB	☐

I protocolli identificati come A00, T00 e D00 sono i protocolli predefiniti del produttore rispettivamente per ABR, TEOAE e DPOAE.

Selezionare un protocollo facendo clic su di esso per aprire una descrizione più dettagliata dei parametri definiti in questo protocollo. Ulteriori informazioni sui protocolli forniti con HearSIM™ sono disponibili nella documentazione separata associata al dispositivo. In caso di domande, contattare il rappresentante o il produttore del dispositivo.

Test type	Name	Transfer to device
ABR	A00 CE-Chirp 35 dB nHL	☒
ABR	A03 CE-Chirp 45 dB nHL	☒
DPOAE	D00 2-5 kHz, 3/4, SNR 6 dB	☒
ABR	A01 CE-Chirp 30 dB nHL	☐
TEOAE	T01 1.5-4 kHz, 2/4, SNR 6 dB	☒
ABR	A02 CE-Chirp 40 dB nHL	☐
ABR	A04 Click 35dB nHL	☒
ABR	A05 Click 30 dB nHL	☐
ABR	A06 Click 40dB nHL	☒

TEOAE Protocol		
T01 1.5-4 kHz, 2/4, SNR 6 dB		
Stimulus type	Click	
Stimulus level	83 dB peSPL	
Max. duration	60 s	
Acceptable noise level	55 dB SPL	
Min. OAE level	-5 dB SPL	
Bands for pass	2/4	
Frequency	Min. SNR	Mandatory
1.4 kHz	6.0 dB	No
2.0 kHz	6.0 dB	No
2.8 kHz	6.0 dB	No
4.0 kHz	6.0 dB	No

8.7.3 Stato attivo/inattivo per il trasferimento al dispositivo

È possibile impostare un comando **Attivo**  (o **Inattivo** ) per ogni protocollo. Solo i protocolli attivi di questo elenco verranno trasferiti al dispositivo. I protocolli inviati al dispositivo che non sono supportati dalle licenze acquistate con il sistema non verranno visualizzati sul dispositivo.

8.7.4 Ordine

L'ordine dell'elenco può essere modificato qui prima del trasferimento al dispositivo. Ad esempio, si potrebbero inserire all'inizio dell'elenco i nomi dei protocolli eseguiti con maggiore frequenza.

Il comando **Trascina**  viene visualizzato davanti al nome del/tipo di test quando si passa il mouse sopra la riga di un protocollo. È possibile fare clic e tenere premuto il comando di trascinamento e spostare e rilasciare il protocollo in una diversa posizione all'interno dell'elenco.

PROTOCOLLS		
Test type	Name	Transfer to device
ABR	A00 CE-Chirp 35 dB nHL	
ABR	A03 CE-Chirp 45 dB nHL	
DPOAE	D00 2-5 kHz, 3_4, SNR 6 dB	
ABR	A01 CE-Chirp 30 dB nHL	
TEOAE	T01 1.5-4 kHz, 2_4, SNR 6 dB	
 ABR	A02 CE-Chirp 40 dB nHL	 
Drag to reorder list		

8.7.5 Eliminazione dei protocolli dall'elenco

Se si desidera eliminare un protocollo dall'elenco HearSIM™, selezionarlo facendo clic su di esso,

quindi selezionare l'icona **Altre opzioni**  per aprire un menu a comparsa che contiene il comando **Rimuovi**. Selezionarlo per eliminare il protocollo dall'elenco.


8.7.6 Protocolli personalizzati

I protocolli salvati sul PC durante l'installazione sono i più utilizzati/richiesti per ciascun tipo di test. È possibile che un programma di screening dell'udito per neonati richieda un protocollo personalizzato e che il produttore del dispositivo tenti di soddisfare la richiesta fornendo un file di protocollo personalizzato che è possibile aggiungere a questo elenco.

Per aggiungere un protocollo personalizzato che è stato fornito su richiesta, selezionare l'icona

AGGIUNGI  per aprire una schermata del browser in cui è possibile definire il percorso in cui è

stato salvato il file personalizzato. Dopo aver individuato il file (con estensione .hpd) e averlo selezionato, selezionare il pulsante Apri per aggiungerlo all'elenco.

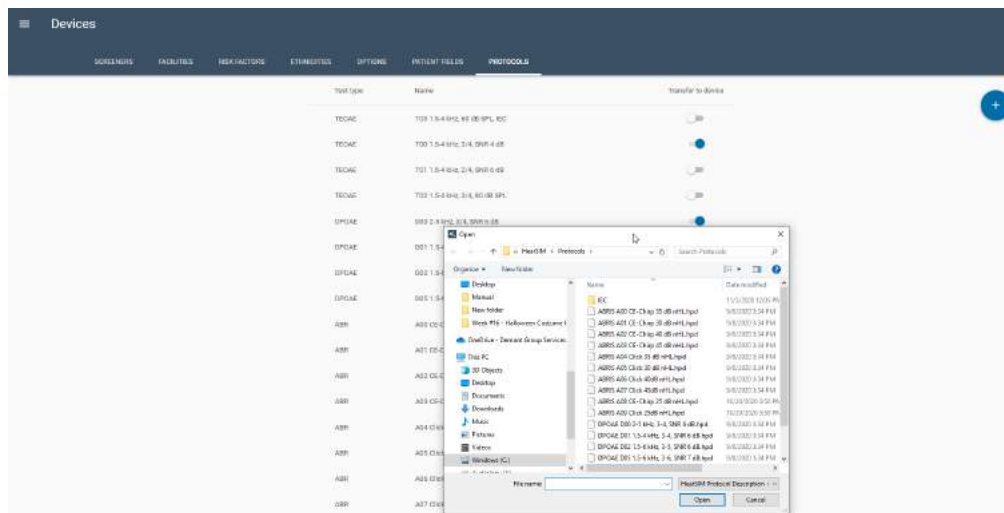

8.8 Trasferimento di impostazioni personalizzate sul dispositivo



Dopo aver personalizzato le impostazioni del dispositivo, compresi i protocolli desiderati, è possibile trasferirli allo strumento supportato. Connettere il dispositivo HearSIM™ al PC mediante il cavo USB in dotazione. Accedere al menu Impostazioni del dispositivo in HearSIM™.


Se i dati del paziente sono presenti sul dispositivo, è necessario trasferire i dati su HearSIM™ prima di poter trasferire le nuove impostazioni.



Quando viene visualizzata l'icona dell'ingranaggio, il dispositivo è pronto per ricevere le nuove impostazioni. Fare clic sull'icona per aprire la finestra "aggiorna configurazione dispositivo".



Se l'immagine dell'ingranaggio sul dispositivo ha un barra sull'ingranaggio, il dispositivo collegato non supporta queste impostazioni.

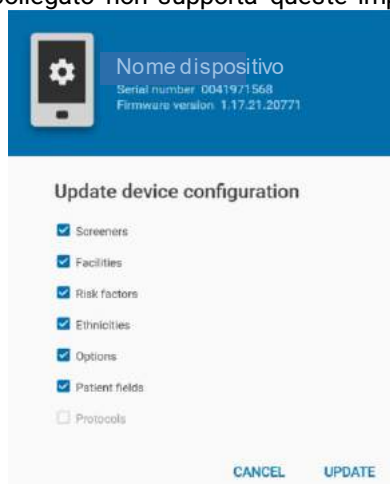

Selezionare le caselle di controllo accanto alle impostazioni che si desidera trasferire. Selezionare il comando **Aggiorna** per procedere con il trasferimento. Riavviare il dispositivo dopo il trasferimento affinché le nuove impostazioni abbiano effetto.

Tutte le precedenti impostazioni sul dispositivo verranno sovrascritte con le nuove impostazioni.

8.8.1 Impostazioni del dispositivo incompatibile

Durante il trasferimento delle impostazioni sul dispositivo, vengono eseguiti dei controlli per assicurare che le relative impostazioni siano configurate correttamente affinché il dispositivo funzioni regolarmente.

Ad esempio, l'opzione **Login analizzatore** richiede che ci sia un elenco di analizzatori definito e che almeno uno sia abilitato nella pagina degli Analizzatori.

L'opzione **Campi del test** richiede che ci siano Analizzatori abilitati e che ci sia almeno una Struttura nell'elenco di configurazione.

In presenza di incoerenze durante il trasferimento delle impostazioni al dispositivo, alcune Opzioni saranno automaticamente disabitate e non saranno trasferite nel dispositivo. Comparirà un messaggio per informare che l'opzione è stata disabilitata.

9 Amministrazione


Le schede nella sezione Amministrazione consentono di impostare le preferenze relative a:

- Esportazione dei dati del test o delle impostazioni di HearSIM
- Dettagli della stampa del rapporto
- Importazione delle impostazioni di HearSIM
- Importazione dell'elenco di selezione HiTrack
- Campi del paziente visualizzati e resi obbligatori

È disponibile anche una scheda per visualizzare le informazioni di registrazione dell'audit relative alle modifiche apportate ai dati del paziente o test.


La scheda "Informazioni" visualizza le informazioni sulle versioni del software.

9.1 Esporta

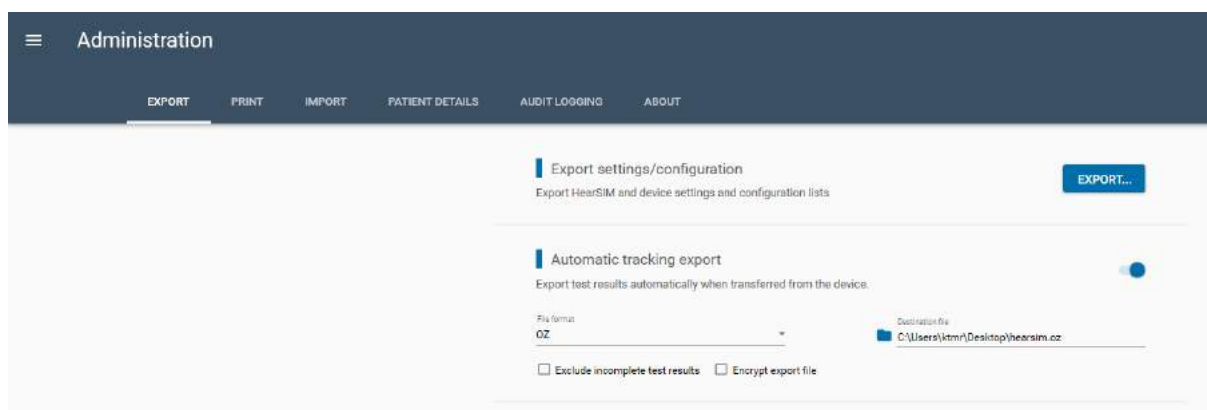

9.1.1 Esporta impostazioni/configurazioni


Per condividere la configurazione e le impostazioni del dispositivo su un altro PC, selezionare il pulsante Esporta nell'area Esporta impostazioni/configurazioni. Quindi, selezionare le impostazioni e gli elenchi di configurazione da condividere.

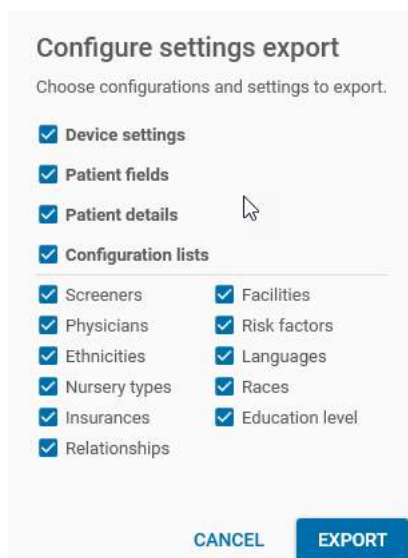

Dopo aver effettuato le selezioni, selezionare il controllo Esporta, che aprirà la finestra "Salva con nome" di Windows, che consente di scegliere il percorso in cui salvare il file. Il nome del file viene impostato automaticamente come "Configuration.hsim". È possibile spostare questo file su un altro PC e importarlo per evitare l'inserimento manuale di elenchi e impostazioni.

9.1.2 Esportazione del tracciamento automatico

È possibile abilitare questa funzione per salvare automaticamente i dati trasferiti dal dispositivo in un file di tracciamento.

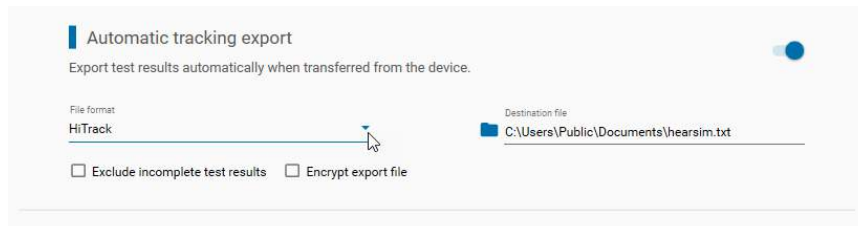

9.1.2.1 Esportazione del tracciamento automatico: on / off

Attivare questa impostazione per esportare, automaticamente e subito dopo il trasferimento, i dati dello screening appena trasferiti in un file di tracciamento. Quando l'impostazione è attiva, saranno disponibili altre impostazioni. Queste vengono richiamate quando il programma viene chiuso e rilanciate in modo che la configurazione sia necessaria solo una volta.

9.1.2.2 Formato file

Utilizzare il menu a discesa per selezionare il formato del file creato. Le scelte sono:

- HiTrack
- Oz
- XML di HearSIM
- CSV

9.1.2.3 File di destinazione

Selezionare l'icona Cartella  che precede il campo che consente di cercare la destinazione preferita. Impostare il percorso di destinazione del file. Saranno presenti i nomi dei file predefiniti per tutti i formati.

Questo campo deve contenere il percorso di destinazione e il nome del file. I nomi dei file predefiniti vengono inseriti automaticamente. È possibile modificare il percorso e il nome del file: verificare di aver immesso le informazioni complete. Il trasferimento dei dati in un file di tracciamento non avrà esito positivo se l'istruzione del percorso completo e il nome del file non sono presenti in questo campo.


9.1.2.4 Escludi i risultati incompleti

Selezionare questa casella per non esportare i test contenenti risultati incompleti nel file di tracciamento. Questo significa che saranno esportati solo i test di screening con status Superato o Non superato.

9.1.2.5 Crittografia (decriptografia) file di esportazione

Selezionare questa casella di controllo per crittografare il file di tracciamento e non salvare le informazioni sulla salute personale in formato leggibile.

Uno strumento di decrittografia (DecryptionTool.exe) viene inserito in questo percorso durante l'installazione di HearSIM: C:\Program Files (x86)\HearSIM. Utilizzare questo strumento per decrittografare un file di tracciamento crittografato, in modo da aprirlo e leggerlo nell'applicazione prevista.

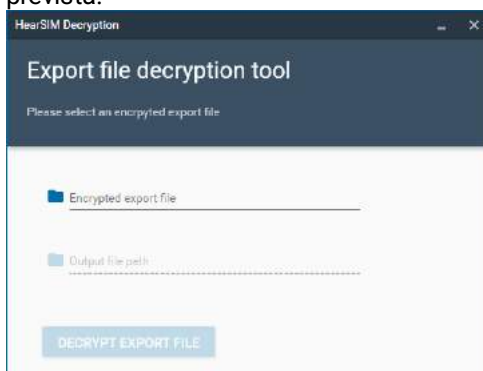


Lo strumento di decrittografia richiede la selezione del file crittografato e l'impostazione del percorso dello stesso in modo da decrittografarlo.

Se si utilizza abitualmente HiTrack Merge Companion o OZ Telepathy sullo stesso PC in cui è installato HearSIM™, per unire automaticamente i file di tracciamento Hitrack o OZ nei database di terze parti una volta eseguito l'accesso, non attivare la crittografia del file di tracciamento. Se si abilita la crittografia, utilizzare prima lo strumento per decrittografare il file, quindi eseguire HiTrack Merge Companion o OZ Telepathy.

9.1.3 Consenso per il tracciamento


Attivare questa impostazione per rendere in automatico anonimi i dati del paziente nei file di esportazione del tracciamento nel caso in cui il paziente non presti il consenso al tracciamento dello screening uditivo.

9.1.4 Caricamento dell'esportazione del tracciamento

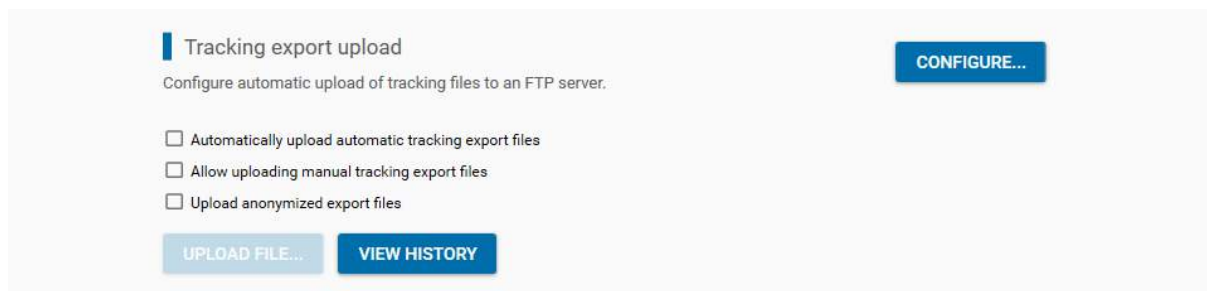

The screenshot shows a configuration panel titled "Tracking export upload". Below the title is the instruction "Configure automatic upload of tracking files to an FTP server." and a "CONFIGURE..." button. There are three checkboxes: "Automatically upload automatic tracking export files", "Allow uploading manual tracking export files", and "Upload anonymized export files". At the bottom are two buttons: "UPLOAD FILE..." and "VIEW HISTORY".

La funzione consente di impostare una connessione server FTP direttamente dall'applicazione HearSIM™ per trasferire i file di esportazione del tracciamento a un server FTP dedicato.

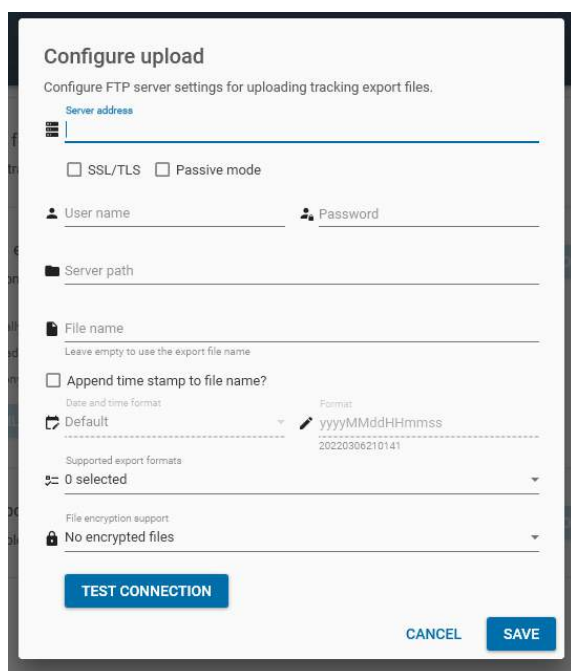

The screenshot shows a "Configure upload" dialog box. It contains the following fields and options: "Server address" (text input), "SSL/TLS" and "Passive mode" (checkboxes), "User name" and "Password" (text inputs), "Server path" (text input), "File name" (text input with a hint "Leave empty to use the export file name"), "Append time stamp to file name?" (checkbox), "Date and time format" (dropdown menu set to "Default"), "Format" (text input showing "yyyyMMddHHmmss" and "20220306210141"), "Supported export formats" (dropdown menu showing "0 selected"), and "File encryption support" (dropdown menu showing "No encrypted files"). At the bottom are "TEST CONNECTION", "CANCEL", and "SAVE" buttons.

È possibile configurare l'indirizzo del server e inserire le proprie credenziali per la connessione al server FTP. Inserire il percorso di scrittura sul server dei file di tracciamento. Specificare il nome del file di caricamento per il server FTP. È possibile aggiungere o meno un timestamp al nome del file specificato e configurare tale elemento in modo più dettagliato.

Selezionare i formati dei file di tracciamento da supportare e l'eventuale utilizzo di file crittografati.

È possibile testare la connessione al server FTP.

9.1.4.1 Carica automaticamente i file di esportazione del tracciamento automatici

Selezionare l'opzione per caricare i file di esportazione del tracciamento automatici sul server FTP dopo la loro creazione.

9.1.4.2 Consenti il caricamento dei file di esportazione del tracciamento manuali


Selezionare l'opzione per consentire il caricamento dei file di esportazione del tracciamento creati manualmente.

9.1.4.3 Carica file di esportazione anonimizzati

Selezionare l'opzione per caricare file di esportazione anonimizzati.

9.2 Impostazioni di stampa

Selezionare la scheda Stampa per definire un'intestazione del rapporto e caricare il file di un logo che sarà stampato sull'elenco pazienti e sui rapporti dei test, poi selezionare il tipo di formato del rapporto preferito.

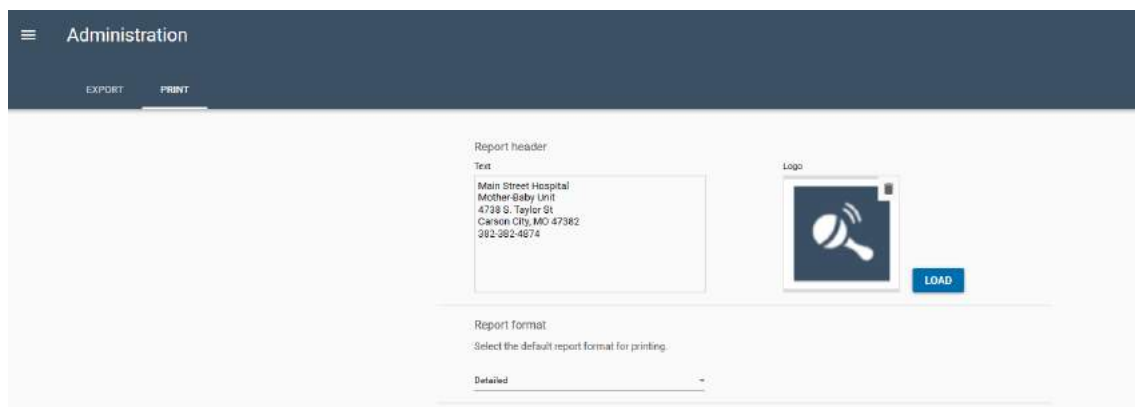

Administration

EXPORT PRINT

Report header

Text

Main Street Hospital
Mother-Baby Unit
4738 S. Taylor St
Carson City, MO 47382
982-352-4574

Logo

LOAD

Report format

Select the default report format for printing.

Detailed

9.2.1 Testo

L'area Testo consente di inserire molteplici righe di testo, ognuna con un massimo di 50 caratteri. Sarà collocata sul lato superiore sinistro dei rapporti.

9.2.2 Logo


È possibile selezionare un logo ricercandolo nella finestra che si apre selezionando il pulsante **Carica**. Il logo verrà visualizzato nell'angolo superiore destro della stampa.

9.2.2.1 Cancellazione del logo

Se si desidera rimuovere il logo dai rapporti, selezionare l'icona **Cancella** nell'angolo dell'area di visualizzazione del logo. Inoltre, è possibile selezionare il pulsante **Carica** e scegliere un diverso logo.

9.2.3 Formato rapporto

Il comando Formato Rapporto consente di selezionare le preferenze per il modello di rapporto che si desidera stampare per i rapporti dei pazienti. È possibile scegliere tra Base o Dettagliato.

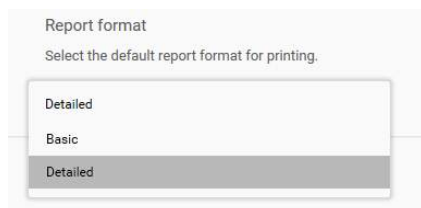

Un rapporto di base stamperà alcune informazioni demografiche del paziente insieme alle seguenti informazioni per ciascun test selezionato:

- Orecchio sottoposto a test
- Risultato
- Data e ora del test
- Tipo di test
- Nome dell'analizzatore
- Struttura

Un rapporto dettagliato comprende tutti i campi ma anche le informazioni aggiuntive che possono includere alcuni dei seguenti campi:


- Durata del test
- % artefatto
- Valori aggiuntivi misurati o condizioni del test (varia in base al tipo di test)
- Nome e numero di serie del dispositivo
- Numero di serie e tipo di trasduttore
- Nome del protocollo di test
- Per i test OAE, grafico a barre indicante i valori di ampiezza del rumore e OAE
- Per i test ABR, un grafico mostra l'avanzamento del test rispetto al superamento nel tempo.

9.2.4 Creazione di rapporti/anteprima OtoAccess®

Abilitare l'impostazione per visualizzare anteprime e rapporti nell'interfaccia di OtoAccess® Database. Per impostazione predefinita, l'impostazione è disabilitata per risparmiare memoria nel database.


9.3 Importa

Consultare la scheda Informazioni per esaminare i dati del produttore e della versione del software.

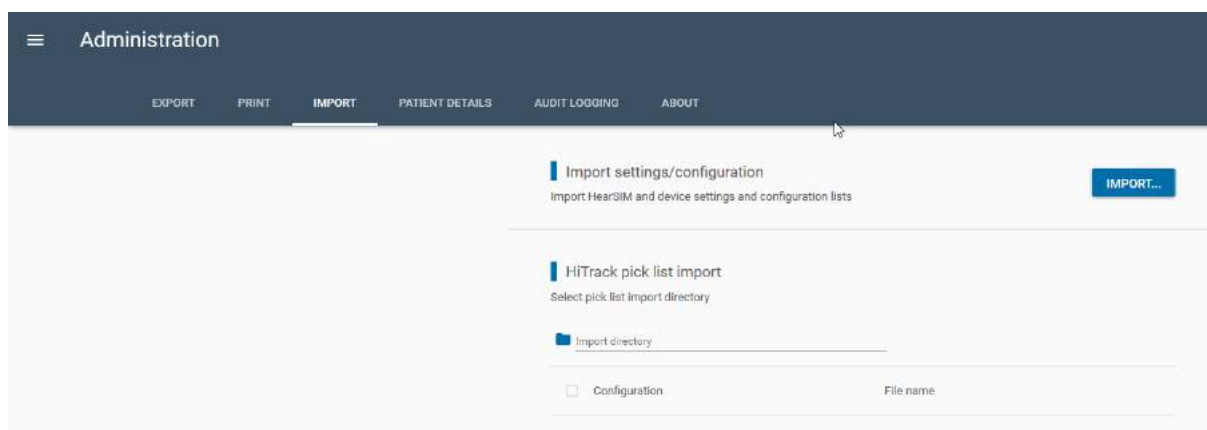

9.3.1 Importa impostazioni/configurazioni

Per copiare la configurazione e le impostazioni del dispositivo da un altro PC, in cui sono state esportate le impostazioni (vedere la sezione 9.1.1), selezionare il pulsante Importa nell'area Importa impostazioni/configurazioni. Quindi, selezionare il file creato dal PC originale. Il nome del file utilizzerà l'estensione "*.hsim".

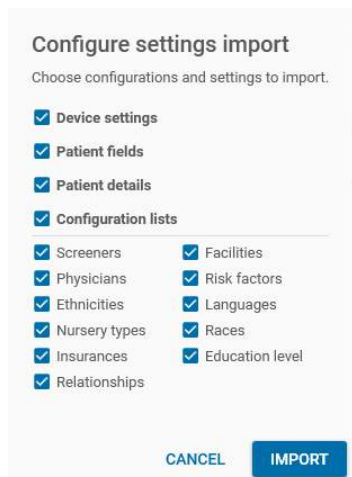

Configure settings import

Choose configurations and settings to import.


- ☒ Device settings
- ☒ Patient fields
- ☒ Patient details
- ☒ Configuration lists
- ☒ Screeners
- ☒ Facilities
- ☒ Physicians
- ☒ Risk factors
- ☒ Ethnicities
- ☒ Languages
- ☒ Nursery types
- ☒ Races
- ☒ Insurances
- ☒ Education level
- ☒ Relationships

CANCEL IMPORT

Selezionare le categorie da importare utilizzando le caselle di controllo e quindi **Importa** una volta definite le preferenze.

9.3.2 Importazione dell'elenco di selezione HiTrack

Accedere alla directory di importazione che contiene i file piani dell'elenco di selezione HiTrack. Il programma rileverà gli elenchi di selezione presenti nel percorso e visualizzerà una lista degli elenchi disponibili.

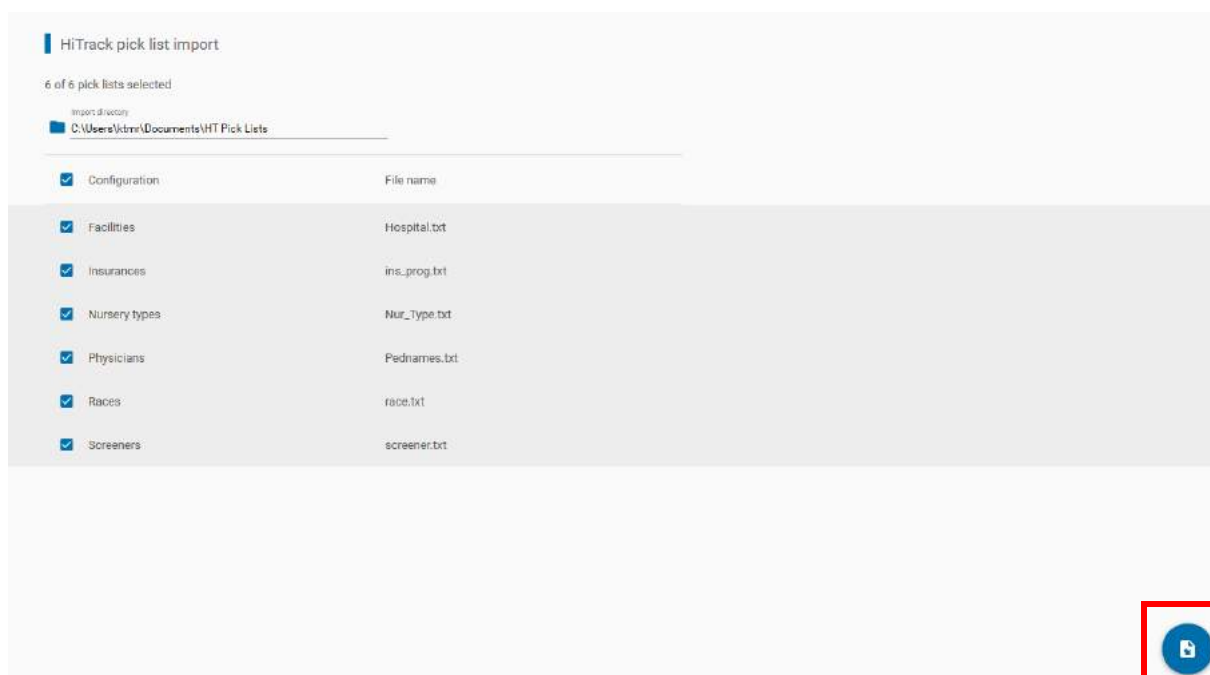

HiTrack pick list import

6 of 6 pick lists selected

Import directory
C:\Users\jdmr\Documents\HT Pick Lists

☒ Configuration	File name
☒ Facilities	Hospital.txt
☒ Insurances	ins_prog.txt
☒ Nursery types	Nur_type.txt
☒ Physicians	Pednames.txt
☒ Races	race.txt
☒ Screeners	screener.txt

Import

Utilizzare le caselle di controllo per scegliere gli elenchi di selezione da importare. Fare clic sul controllo Importa nell'angolo in basso a destra per eseguire l'importazione.

9.4 Dettagli del paziente

La scheda Amministrazione/Dettagli paziente consente la personalizzazione dei campi del paziente, che vengono visualizzati nella sezione Informazioni dettagliate e Informazioni di contatto negli elenchi dei pazienti. Queste impostazioni si applicano anche ai campi paziente visualizzati sul dispositivo in uso.

Inoltre, è possibile rendere obbligatori i campi da compilare per eseguire il salvataggio del paziente.

Alcune impostazioni presenti in questa pagina influenzeranno anche quelle presenti nella scheda Dispositivi/Campi paziente.

Patient field	Display	Mandatory	Default value
Basic information			
Patient id	☐	☐	
Last name	☐	☒	
First name	☐	☐	
Birth date	☐	☐	Today's date
Sex	☐	☒	
Consent for screening	☐	☐	
Consent for tracking	☐	☐	
Tracking id	☒	☐	
Detailed information			
Birth order	☒	☐	
Birth weight	☒	☐	
Gestational age [wks]	☒	☐	

I campi delle informazioni di base sono abilitati per impostazione predefinita e non è possibile disabilitarli sullo schermo, ma solo impostarli come obbligatori in base alle proprie preferenze.

È possibile personalizzare completamente le informazioni dettagliate sul paziente, sulla madre e le informazioni di contatto alternative in base alle preferenze.

9.4.1 Campi del valore predefinito

Il campo "Data di nascita" presenta un'impostazione aggiuntiva che è possibile personalizzare in base alle proprie preferenze. È possibile impostare il valore predefinito su "Data odierna", in modo da inserire il valore della data corrente nel campo, per impostazione predefinita, alla creazione di un nuovo paziente. È possibile modificare la data selezionando il controllo del calendario e scegliendone una diversa.

Il valore predefinito "Vuoto" farà in modo che nessuna data venga inserita preventivamente nel campo e che l'utente debba selezionare la data di nascita.

9.5 Registrazione dell'audit

Selezionare questa pagina per verificare le modifiche al database, comprese le informazioni su:

- Ora e data
- Entità (paziente o test)
- ID paziente
- ID del test
- Utente
- Soggetto
- Vecchio valore (quando viene apportata una modifica)
- Nuovo valore (quando viene apportata una modifica)

Administration

EXPORT

PRINT

IMPORT

PATIENT DETAILS

AUDIT LOGGING

ABOUT

Search parameters

Patient id

Test id

Screening range

From

To

☒ Include patient changes

☒ Include test changes

CLEAR

SEARCH

Create date ▼	Entity	Patient id	Test id	User	Subject	Old value	New value
11/03/2020 13:35:29	Patient	3875379		KSM	First name		Milo
11/03/2020 13:35:03	Patient	60962929-2010000...		KSM	Sex	Unspecified	Female
11/03/2020 13:34:52	Patient	22812		KSM	Ethnicity		TSI
11/03/2020 13:34:52	Patient	22812		KSM	Consent for tracking	Unspecified	Yes
11/03/2020 13:34:52	Patient	22812		KSM	Consent for screening	Unspecified	Yes
11/03/2020 13:34:52	Patient	22812		KSM	Last name	Francis, Felicia	Francis
11/03/2020 13:31:47	Patient	23423423		KSM	Ethnicity		Hispanic
11/03/2020 13:31:47	Patient	23423423		KSM	Sex	Unspecified	Female
11/03/2020 13:31:47	Patient	23423423		KSM	Last name		Murphy
11/03/2020 13:31:47	Patient	23423423		KSM	First name		Emma

9.5.1 Parametri di ricerca

È possibile definire i parametri di ricerca in modo da individuare informazioni specifiche per l'audit. Una volta definiti i parametri della ricerca, eseguirla selezionando il pulsante **RICERCA**.


Utilizzare il pulsante **CANCELLA** per rimuovere i parametri di ricerca.

9.5.1.1 ID paziente

Immettere l'ID paziente per ottenere informazioni su un paziente specifico.

9.5.1.2 ID del test

Immettere l'ID del test per ottenere le informazioni relative a un test specifico. L'ID del test verrà visualizzato nella scheda Risultati del test spostando il mouse sopra l'immagine della testa del bambino per il test desiderato.

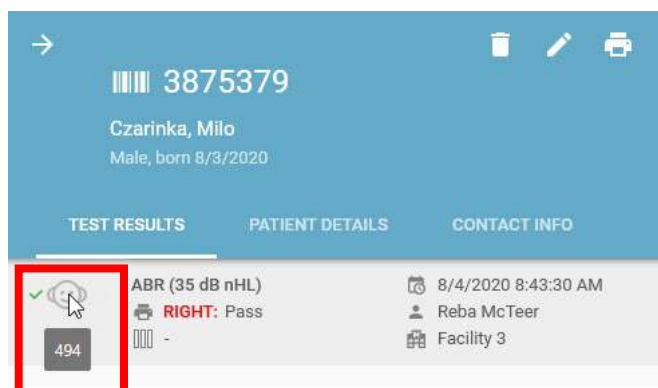

9.5.1.3 Intervallo di tempo

Immettere un intervallo di date "Da" e "A" per individuare le informazioni per un periodo di tempo specifico.

9.5.1.4 Includere i cambiamenti del paziente

Selezionare o deselezionare la casella di controllo per indicare la preferenza in termini di ricerca delle modifiche apportate alle informazioni sul paziente.

9.5.1.5 Includere i cambiamenti del test

Selezionare o deselezionare la casella di controllo per indicare la preferenza in termini di ricerca delle modifiche apportate alle informazioni sul test.

9.5.1.6 Esporta registro di audit

Consente di esportare il registro di audit per successive archiviazioni e revisioni.


9.6 A proposito

Consultare la scheda Informazioni per esaminare i dati del produttore e della versione del software.

9.6.1 Consentire le statistiche sull'utilizzo

Vengono inviate statistiche di utilizzo anonime al produttore di HearSIM per agevolare i piani di sviluppo futuri, ma solo se la funzione è abilitata e il PC connesso a Internet.

Disattivare questa funzione per non inviare le statistiche sull'utilizzo.

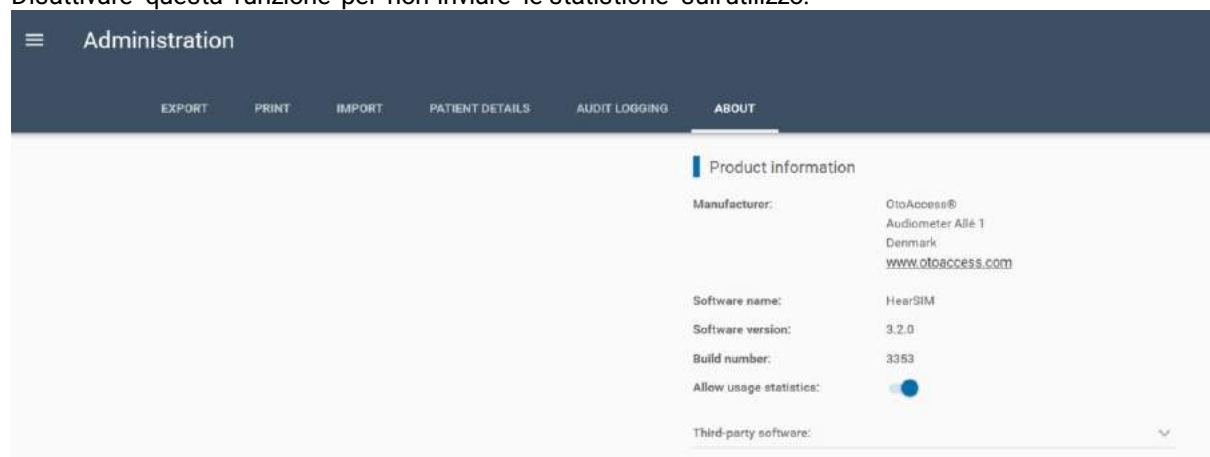

9.6.2 Aggiornamento

Eventuali aggiornamenti per l'applicazione HearSIM™ o per il firmware del dispositivo verranno visualizzati qui. Se la funzione di aggiornamento è stata disabilitata nella configurazione dell'installazione, la funzione non verrà visualizzata qui.

10 Funzioni di OtoAccess®

L'installazione di OtoAccess® colloca due icone di collegamenti rapidi sullo schermo del PC. Uno è denominato OtoAccess® Database e l'altro OtoAccess® Database Administration.

Questa sezione del manuale di HearSIM™ intende trattare solo alcune funzioni presenti in OtoAccess® che possono interessare gli utenti di HearSIM™. È disponibile un manuale che descrive in dettaglio le funzioni di OtoAccess® e il lettore è rimandato a quel manuale per maggiori informazioni.

10.1 Database OtoAccess®

I pazienti di HearSIM™ e i test possono essere visualizzati in forma sintetica all'interno di OtoAccess®. La funzione può interessare generalmente solo i clienti che usano OtoAccess® Database per altri prodotti e tipi di test in modo che tutti i dati da tutti i dispositivi siano contenuti in un solo database.



È improbabile che gli utenti del solo HearSIM™ visualizzino i dati di screening dei neonati in OtoAccess®. Le informazioni visualizzate sono limitate ai dati di base. Maggiori dettagli sono contenuti nel modulo di HearSIM™.

10.2 OtoAccess® Database administration

Il programma di utilità OtoAccess® Database Administration installato sul proprio PC ha delle funzioni che possono interessare gli utenti di HearSIM™. Le funzioni disponibili sono le seguenti:

- Impostazione degli Account utente e regole di autenticazione
- Impostazione delle regole di backup automatico del database
- Ripristino di una versione precedente del database
- Visualizzazione di un registro di sicurezza
- Impostazione delle regole di conservazione di un registro di sicurezza

Consultare il manuale delle istruzioni per l'uso di OtoAccess® per maggiori informazioni su queste funzioni.

10.2.1 Account degli utenti

Quando HearSIM™ e OtoAccess® sono installati, i profili utente specifici di HearSIM™ sono disponibili nell'elenco di selezione dei profili degli Account Utente.

I profili di account specifici di HearSIM™ sono i seguenti: Amministratore, Supervisore, Redattore e Visualizzatore.

Un Amministratore HearSIM™ può eseguire tutte le funzioni in HearSIM. È richiesto almeno un account Amministratore.

Fare riferimento alla tabella seguente per le restrizioni imposte ai profili Supervisore, Redattore e Visualizzatore.

	Supervisore	Redattore	Analizzatore	Visualizzatore
Modifica delle informazioni del test			No	No
Eliminazione di test	No	No	No	No
Modifica delle informazioni di pazienti esistenti				No
Risoluzione dei problemi di trasferimento delle informazioni dei pazienti				No
Cancellazione di pazienti	No	No	No	No
Visualizzazione/modifica delle impostazioni del dispositivo	2	No	No	No
Visualizzazione/modifica delle impostazioni di configurazione		No	No	No
Esecuzione di un'esportazione manuale				No
Visualizzazione/modifica delle impostazioni dell'Amministratore	No	No	No	No

² I supervisori possono accedere, modificare e trasferire tutte le impostazioni del dispositivo con una eccezione.

11 Risoluzione dei problemi e condivisione del feedback

Sintomo	Causa	Suggerimento
 Il dispositivo viene rilevato ma la comunicazione non è possibile	Il database del dispositivo è incompatibile con l'applicazione HearSIM™	Consultare l'assistenza clienti del produttore del dispositivo per informazioni su "Strumento riparazione ERIS"
Il dispositivo è collegato al PC ma non viene rilevato da HearSIM™	- Il display del dispositivo mostra una delle schermate di test - Il dispositivo potrebbe essere stato in uso e pertanto non rilevato	- Premere il tasto Home sul dispositivo per uscire dalla schermata di test - Spegnere e riaccendere il dispositivo - Ricollegare il dispositivo con il cavo USB
Alcuni dati non sono stati trasferiti in  HearSIM™	- HearSIM supporta solo il trasferimento di dati effettuato con questi nomi di protocolli da questo tipo di dispositivo: - DP 4s - DP 2s - TE 32S - TE 64S	- Usare solo questi protocolli per i dati che si desidera trasferire in HearSIM - Prima del trasferimento in HearSIM, stampare o salvare i dati acquisiti usando i protocolli con un nome diverso perché saranno eliminati dal dispositivo dopo il trasferimento.

Contattare il rappresentante locale del produttore per ricevere assistenza se non è possibile risolvere un problema seguendo i suggerimenti specificati in questa sezione.

11.1 Arresto anomalo del sistema

In presenza di un arresto anomalo del sistema, verrà visualizzata la schermata "Si è verificato un problema". Il salvataggio di un file contenente le informazioni sull'arresto anomalo consente di ottimizzare le versioni future del software.

SOMETHING WENT WRONG.

GENERAL EXCEPTIONS

! This is a test exception for demonstrating the crash report

Application: HearSIM 3.1.0 PREVIEW

Email: email@email.com

Please tell us how the application crashed so we can fix it.

Type your comments here...

I was transferring data to HearSIM from my device when the system crashed.

☒ I agree to the [exclusion of Liability](#)

NB: Submitted crash reports will be investigated internally. You will only be contacted with the email address provided in the event that more information is required.


SEND REPORT SAVE CANCEL

Dopo aver salvato le informazioni sull'arresto anomalo e accettato l'esclusione di responsabilità, **inviare una segnalazione** o **salvare** un file di arresto anomalo in modo da inviarlo all'assistenza tecnica, che eseguirà la revisione.

Le informazioni salvate e trasmesse in questo rapporto sull'arresto anomalo contengono solo informazioni sui processi in esecuzione quando si è verificato l'arresto anomalo. Non viene salvata o trasmessa alcuna informazione sanitaria personale.

11.2 Condivisione del feedback

Per fornire un feedback sull'applicazione HearSIM™, selezionare il comando **Condividi il tuo feedback** nella parte inferiore del menu principale una volta connesso a Internet. Selezionare **Invia** per inoltrare il feedback al produttore di HearSIM™.

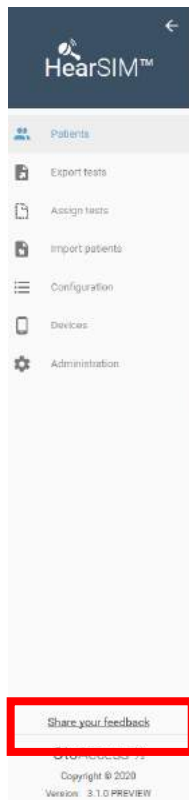

Share your feedback

How do you like the HearSIM software?

★★★★★

If you have any feedback on the HearSIM software, let us know:

Type your comments here...

Enter your feedback here

Max. 1000 characters allowed

CANCEL SEND

12 Proprietà, garanzia e dichiarazione di non responsabilità

12.1 Proprietà

HearSIM™ (in seguito denominato "SOFTWARE") è di esclusiva proprietà di OtoAccess A/S. Acquistando il SOFTWARE l'acquirente ottiene il diritto di uso del prodotto, ma non la proprietà del SOFTWARE. Il SOFTWARE deve essere utilizzato secondo i termini d'uso concordati forniti da OtoAccess®.

12.2 Copyright

OtoAccess A/S è riconosciuto come proprietario del SOFTWARE a livello mondiale, pertanto la proprietà è tutelata da qualsiasi copia non autorizzata del SOFTWARE. L'uso non conforme del SOFTWARE è severamente proibito.

12.3 Limitazioni

Non è consentito:

- Decodificare o cercare in alcun modo di trovare il codice sorgente del SOFTWARE
- Cercare di alterare qualsiasi meccanismo nel SOFTWARE, inclusi quelli responsabili della protezione con password dei dati e della limitazione del numero di utenti simultanei
- Dare in affitto o in noleggio, o concedere in sub-licenza o in altro modo, copiare o trasferire (ad eccezione di quanto specificato sopra) il SOFTWARE
- Celare o eliminare qualsiasi indicazione relativa al copyright o al marchio di OtoAccess A/S che appaia sul SOFTWARE, sulla documentazione, sullo schermo o che sia in altro modo collegata al SOFTWARE
- OtoAccess A/S desidera sottolineare esplicitamente come qualsiasi violazione o inosservanza delle limitazioni specificate sopra comporteranno un'azione legale
- Il SOFTWARE può essere utilizzato da qualsiasi numero di utenti, su qualsiasi numero di computer e in qualsiasi luogo, purché non sia impiegato su più di uno schermo allo stesso tempo

12.4 Garanzia limitata

OtoAccess A/S garantisce che qualsiasi supporto fisico e documentazione fisica forniti da OtoAccess A/S sono esenti da difetti nei materiali e nella fabbricazione. Tale garanzia limitata è valida per un periodo di novanta (90) giorni dalla data di acquisto originale.

Se OtoAccess A/S riceve notifica entro il periodo di garanzia di difetti nei materiali o nella fabbricazione e determina che tale notifica sia corretta, OtoAccess A/S procederà alla sostituzione del supporto o della documentazione.

Non procedere al reso di alcun prodotto senza previa autorizzazione da parte del fornitore. L'intera e completa responsabilità e il risarcimento per violazioni di tale garanzia limitata saranno limitati alla sostituzione del supporto o della documentazione difettosi forniti da OtoAccess ^{AS}, e non includeranno o comprenderanno qualsiasi richiesta o diritto di risarcimento di altri danni, inclusi, in via esemplificativa e non esaustiva, mancato profitto, perdita di dati o mancato impiego del SOFTWARE, o danni speciali, incidentali o consequenziali, o altre richieste simili, anche nel caso in cui OtoAccess ^{AS} sia stata specificatamente avvertita della possibilità di tali danni. In nessun caso la responsabilità di OtoAccess ^{AS} per qualsiasi danno arrecato all'utente o a qualsiasi altra persona potrà superare il prezzo di listino più basso o il prezzo effettivo pagato per la licenza d'uso del SOFTWARE, indipendentemente dalla forma del reclamo.

12.5 Dichiarazione di non responsabilità

OtoAccess ^{AS} copre, a titolo esemplificativo, tutte le garanzie, rappresentazioni e termini e condizioni, sia espressi sia impliciti, ai sensi dei termini specifici di utilizzo e applicazione del SOFTWARE per il suo scopo specifico. Tutti gli altri termini e condizioni non sono applicabili.

OtoAccess ^{AS} non garantisce, inoltre, che il SOFTWARE o la documentazione siano esenti da errori o soddisfino gli standard, i requisiti o le necessità di un utente. In questo caso, le garanzie, i termini e le condizioni della documentazione o dei dischi fisici consegnati da OtoAccess ^{AS} saranno limitati al periodo di garanzia di 90 giorni.

OtoAccess ^{AS} non si assume la responsabilità di alcun prodotto, disco, SOFTWARE o documentazione di terze parti utilizzati insieme al SOFTWARE o ai programmi OtoAccess ^{AS} ma non prodotti o forniti da OtoAccess ^{AS}.

12.6 Condizioni generali

Qualsiasi modifica apportata al presente accordo sarà notificata per iscritto, accettata e firmata da entrambe le parti, ovvero l'acquirente del SOFTWARE e un rappresentante di OtoAccess ^{AS}.

Nel caso in cui lo scopo essenziale del rimedio di cui sopra (garanzia limitata) non sia soddisfatto, tutte le altre responsabilità limitate, compresi i limiti di responsabilità e le esclusioni delle richieste di risarcimento, continuano ad applicarsi.

Il SOFTWARE è protetto dalla legge sul Copyright e dai trattati internazionali sul Copyright. La copia del SOFTWARE è severamente proibita ad eccezione delle copie del SOFTWARE eseguite a fini di backup per evitare la perdita dei dati.